

# Maxi Sky 2



## Trasferimento dalla posizione seduta

1




Posizionare il corsetto attorno al paziente. Nel caso di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2



Avvicinare il sollevatore. Posizionare la barra di sollevamento in corrispondenza delle spalle, abbastanza vicina da poter attaccare le cinghie delle spalle.


3

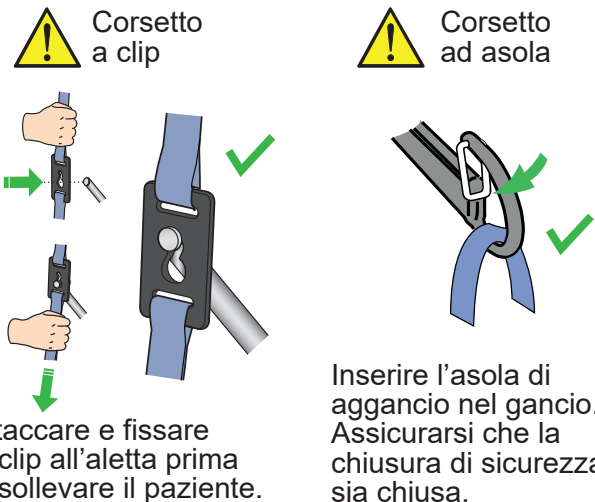

Attaccare e fissare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.

Inserire l'asola di aggancio nel gancio. Assicurarsi che la chiusura di sicurezza sia chiusa.

4

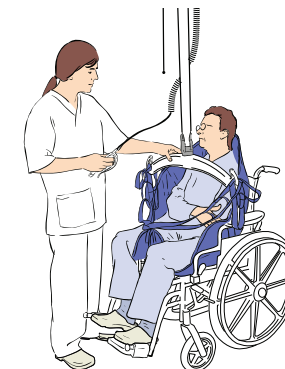


Collegare le asole o le clip del corsetto alla barra di sollevamento.

5




Per la barra di sollevamento con Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS) e corsetto a clip, inclinare la barra di sollevamento per collegare le clip delle gambe.

6

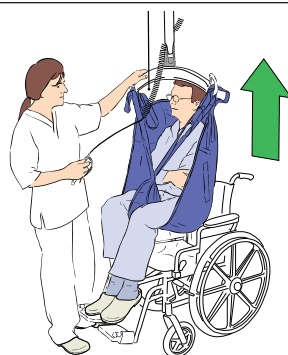


Sollevare il paziente.

7

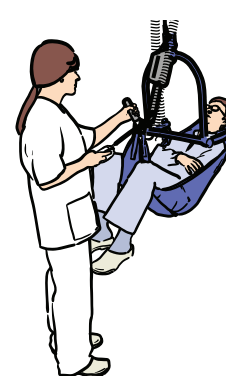

Spostare il paziente.

8

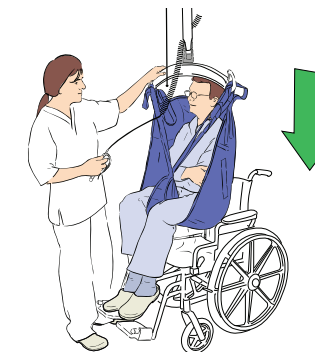

Abbassare fino a che non c'è più tensione. Scollegare le asole o clip.

## Trasferimento dalla posizione supina

1




Posizionare il corsetto sotto il paziente in posizione centrale. Nel caso di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2



Posizionare il sollevatore sopra il paziente.

3

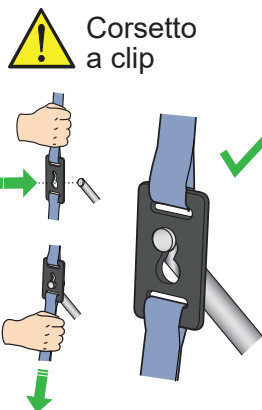

Attaccare e fissare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.




Inserire l'asola di aggancio nel gancio. Assicurarsi che la chiusura di sicurezza sia chiusa.

4




Collegare le asole o le clip del corsetto alla barra di sollevamento. Attaccare prima le cinghie delle spalle, quindi quelle delle gambe.

5

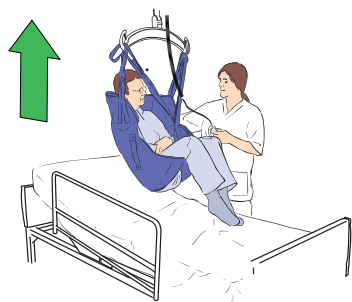


Sollevare il paziente.

6

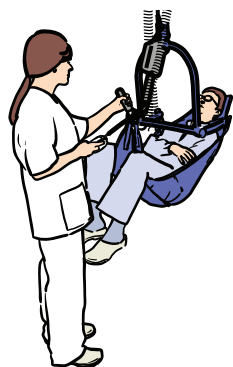


Spostare il paziente.

7

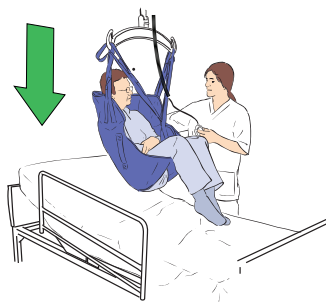


Abbassare il paziente sul punto di arrivo.

8

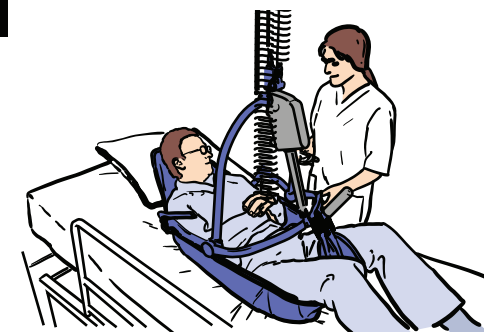


Quando il peso del corpo del paziente è completamente sostenuto, scollegare le asole o clip.


## Riposizionamento nel letto verso l'alto

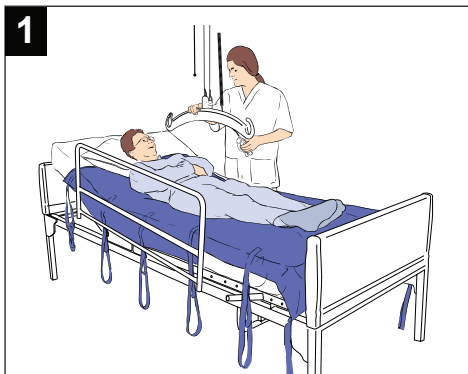


Collocare il corsetto sotto il paziente e posizionare il sollevatore sopra il paziente.

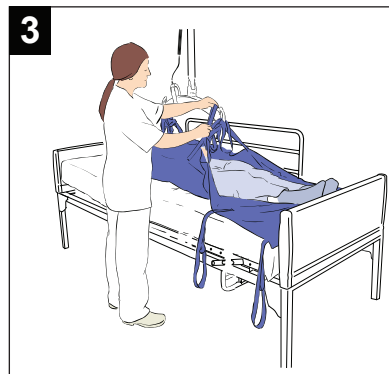

Attaccare quante più asole possibili alla barra di sollevamento. Iniziare dalle asole del lato testa.

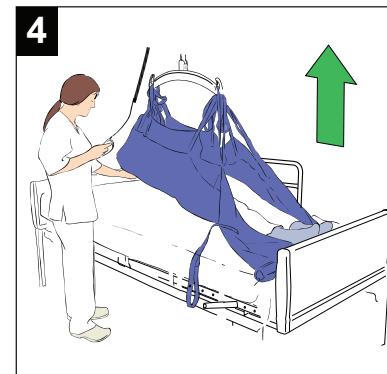


Sollevare fino a quando i fianchi non sono sostenuti e muovere verso l'alto.

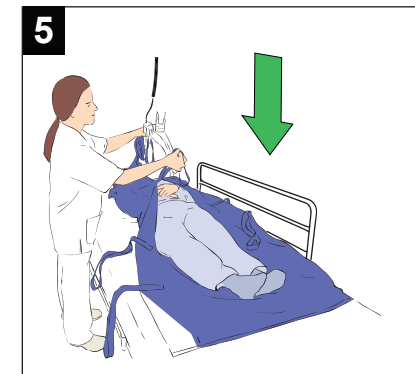


Abbassare il paziente sul punto di arrivo e scollegare tutte le asole.


## Riposizionamento - rotazione nel letto

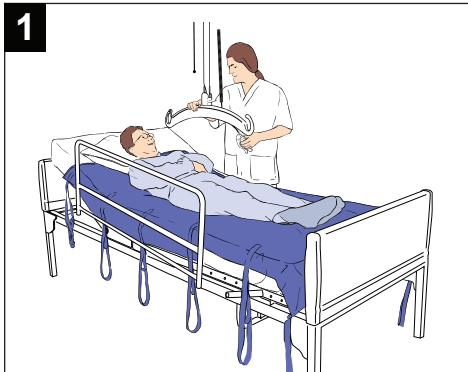


Collocare il corsetto sotto il paziente e posizionare il sollevatore sopra il paziente.

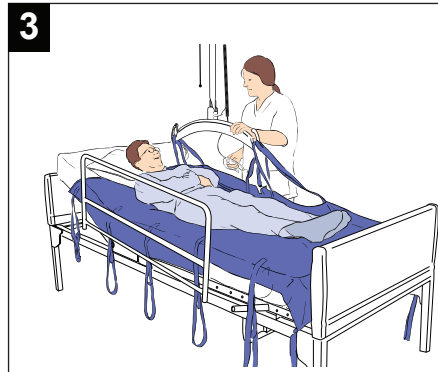

Attaccare quante più asole possibili da un lato del corsetto alla barra di sollevamento. Iniziare dalle asole del lato testa.

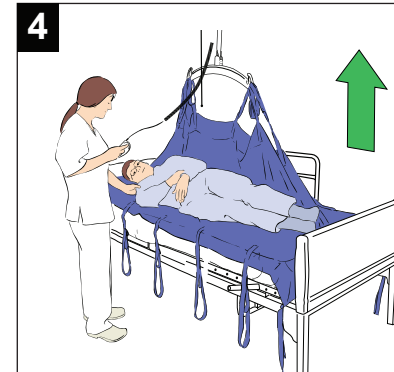

Sollevare fino a che il paziente non ruota nella posizione desiderata.

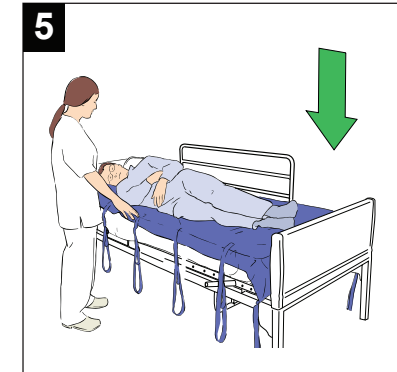


Abbassare fino a che non c'è più tensione e scollegare tutte le asole.


## Trasferimento di un paziente in posizione supina




Collocare il corsetto sotto il paziente assicurandosi di identificare il lato testa del corsetto.

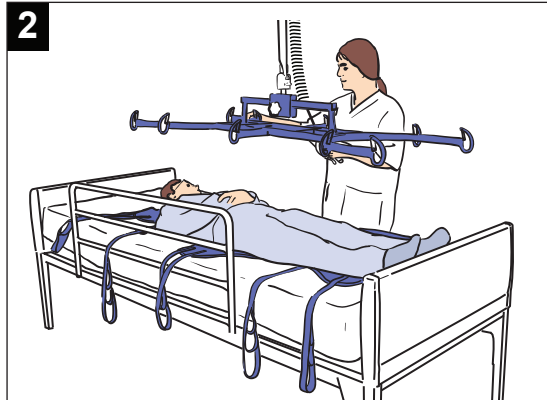


Posizionare il sollevatore sopra il paziente.

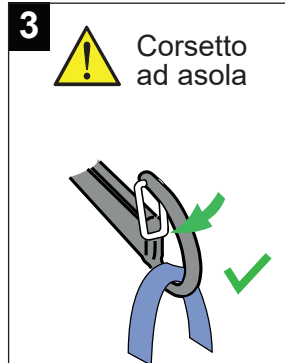


Inserire l'asola di aggancio nel gancio. Assicurarsi che la chiusura di sicurezza sia chiusa.

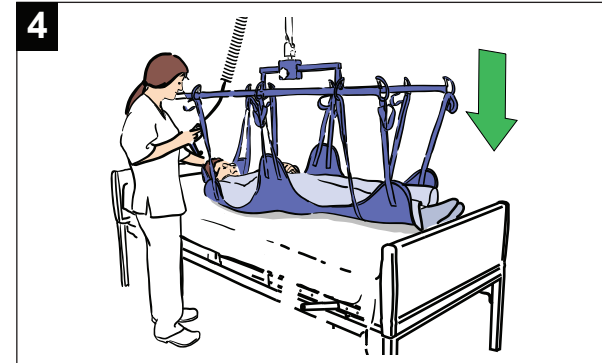


Abbassare con attenzione la barra per barelle, in modo che la parte centrale corrisponda all'ombelico del paziente. Attaccare le asole del corsetto.

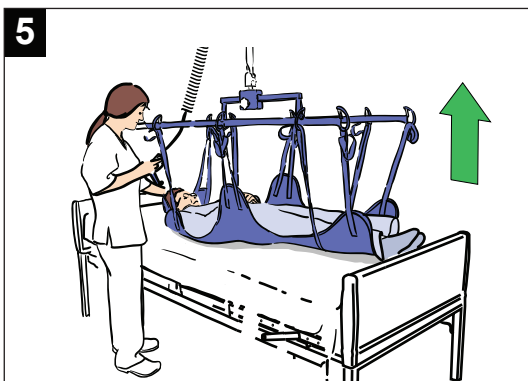


Sollevare il paziente e allontanarlo dal letto.

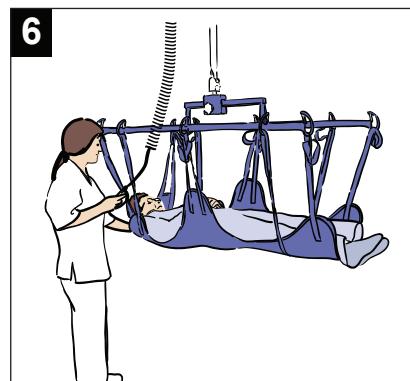

Trasferire il paziente.

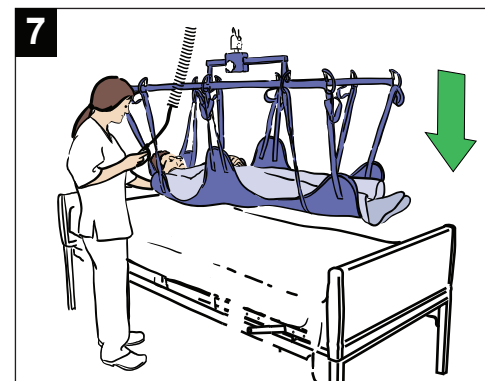

Abbassare il paziente sul punto di arrivo e scollegare tutte le asole.

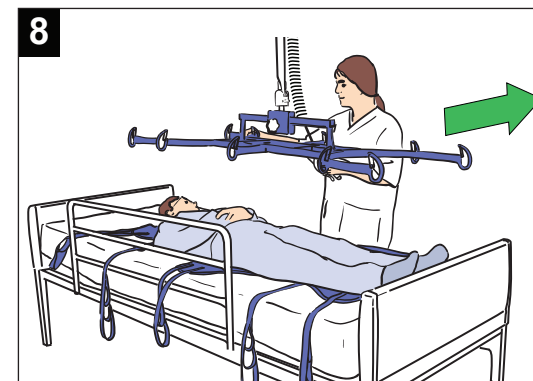

Spostare la barra lontano dal paziente.