

Maxi Sky 2

Forflytte fra sittende stilling




1




Legg seilet rundt pasienten. Hvis seilet har hodestøtte, må du passe på at det går helt opp til toppen av pasientens hode.

2

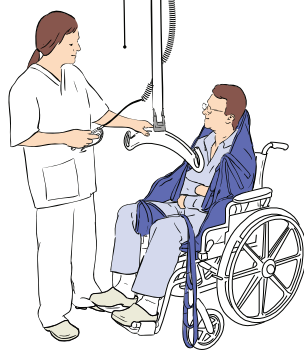

Flytt løfteren nærmere. Sett løftebøylen i skulderhøyde og nær nok til at skulderremmene kan festes.


3

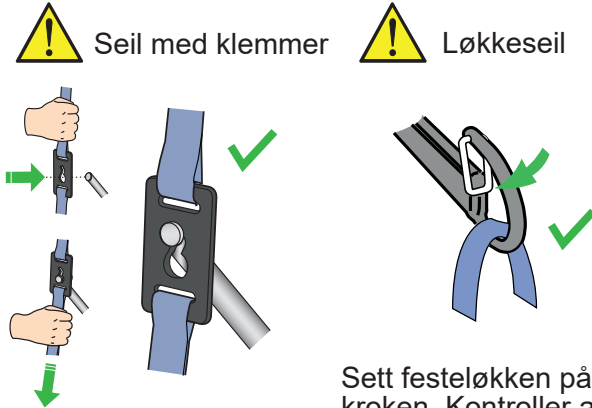

Fest og sikre klipset i festeøret før pasienten løftes.

Sett festeløkken på kroken. Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.

4

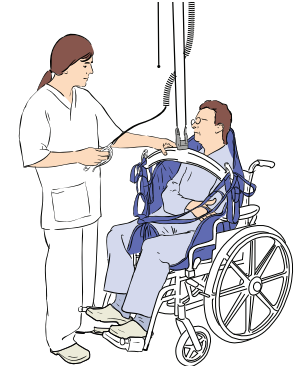


Koble løkkene eller klipsene til løftebøylen.

5




For DPS-løftebøyler og seil med klemmer må du vippe løftebøylen for å feste benklammene.

6

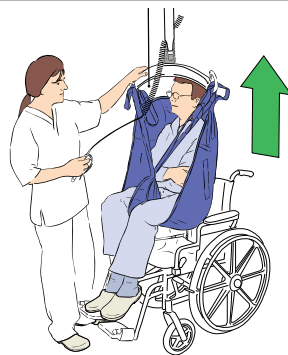


Løft pasienten.

7

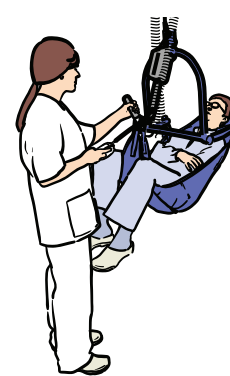

Flytt pasienten.

8

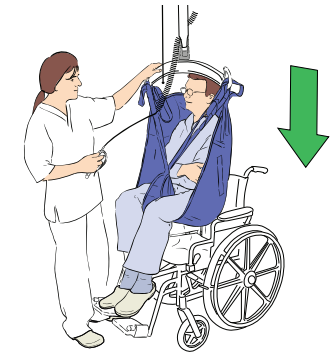

Senk til det ikke er strekk i seilet. Løsne løkkene eller klemmene.

Forflytte fra ryggleie

1



Legg seilet midt under pasienten. Hvis seilet har hodestøtte, må du passe på at det går helt opp til toppen av pasientens hode.

2



Sett løfteren over pasienten.


3




Seil med klemmer



Løkkeseil

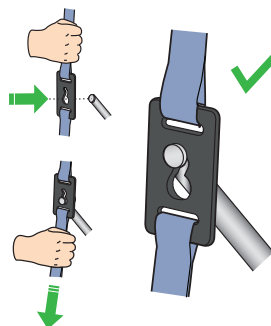


Fest og sikre klipset i festeøret før pasienten løftes.

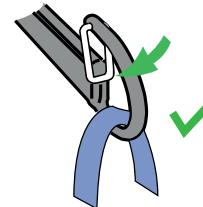

Sett festeløkken på kroken. Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.

4

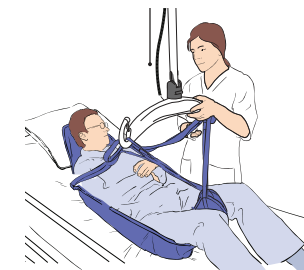


Koble løkkene eller klipsene til løftebøylen. Fest skulderremmene, og deretter benremmene.

5




Løft pasienten.

6

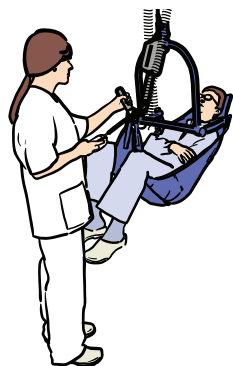


Flytt pasienten.

7

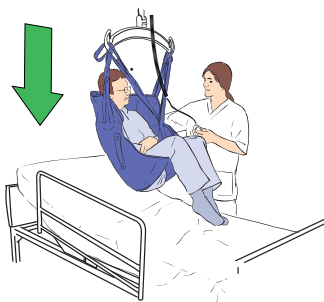

Senk pasienten til det nye stedet.

8

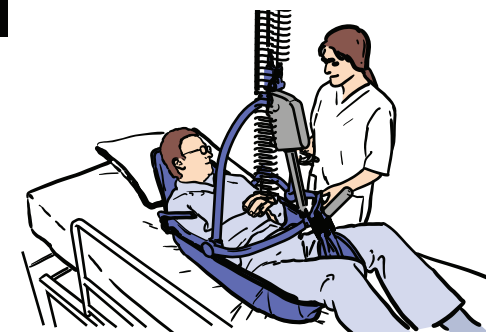

Når pasientens kroppsvekt er helt støttet opp, løsner du løkkene eller klemmene.

Reposisjonering – flytte opp i sengen

1



Legg seilet under pasienten og plasser løfteren over pasienten.

2

! Løkkeseil



Sett festeløkken på kroken. Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.

3



Fest så mange løkker som mulig til løftebøylen. Begynn med løkkene i hodeenden.

4



Løft til hoftene er støttet opp og bevegtes oppover.

5



Senk pasienten til det nye stedet og løsne alle løkker.

Reposisjonering – snu i sengen

1



Legg seilet under pasienten og plasser løfteren over pasienten.

2

! Løkkeseil



Sett festeløkken på kroken. Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.

3



Fest så mange løkker som mulig fra den ene siden til løftebøylen. Begynn med løkkene i hodeenden.

4



Løft til pasienten er rullet over i ønsket stilling.

5



Senk pasienten til det ikke er strekk i seilet, og løsne alle løkker.


Forflytte pasienten til ryggleie

1



Legg seilet under pasienten, og pass på å identifisere seilets hodeende.


2

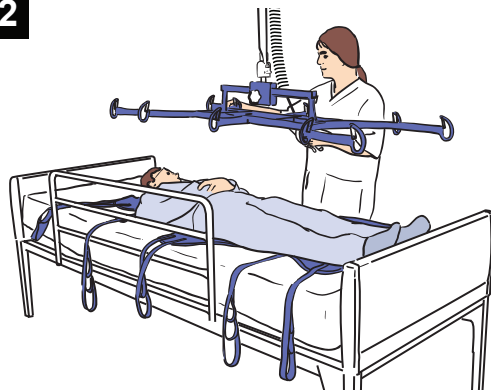

Sett løfteren over pasienten.


3

! Løkkeseil

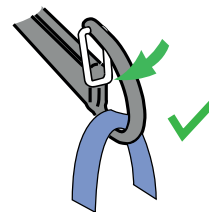


Sett festeløkken på kroken. Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.

4

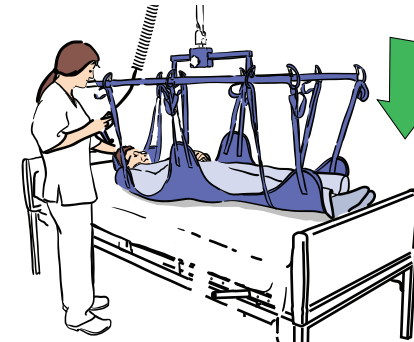


Senk bærerammen forsiktig og innrett midten av rammen mot pasientens navle. Fest alle løkkene.

5

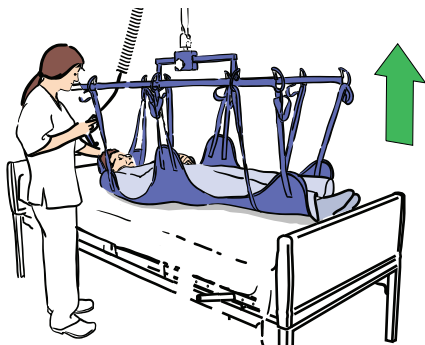


Løft og flytt pasienten vekk fra sengen.

6

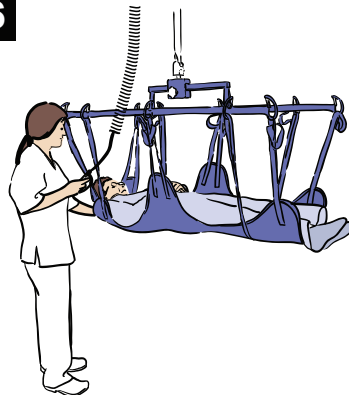


Flytt pasienten

7

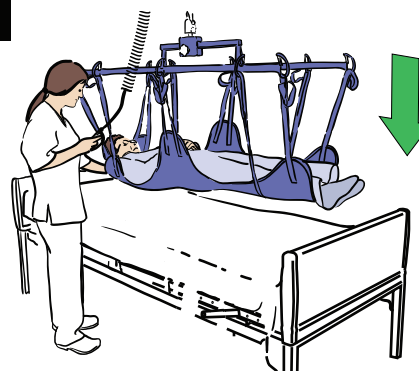

Senk pasienten til det nye stedet og løsne alle løkker.

8

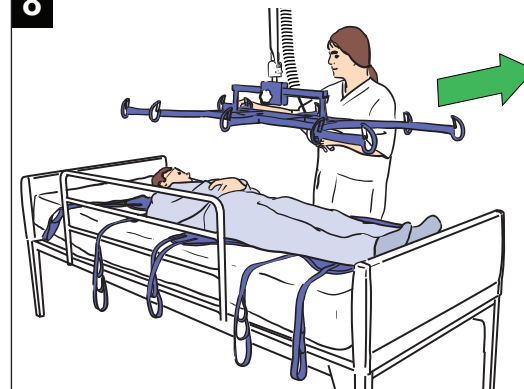

Flytt rammen vekk fra pasienten.

