

Maxi Sky 2



Transferência a partir da posição sentada

1




Coloque a funda em torno do paciente. No caso de fundas com suporte para a cabeça, certifique-se de que se estendem até ao topo da cabeça do paciente.

2



Aproxime o elevador. Coloque a barra de suporte ao nível dos ombros e suficientemente próxima para prender as extensões para os ombros.

3

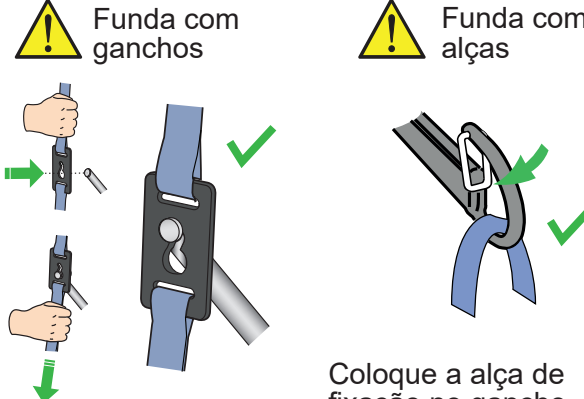

Funda com ganchos
Instale e fixe o gancho na presilha antes de elevar o paciente.


Funda com alças
Coloque a alça de fixação no gancho. Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

4



Ligue as alças ou ganchos da funda à barra de suporte.

5




No caso da barra de suporte e funda com ganchos DPS, incline a barra de suporte para prender os ganchos das pernas.

6




Levante o paciente.

7

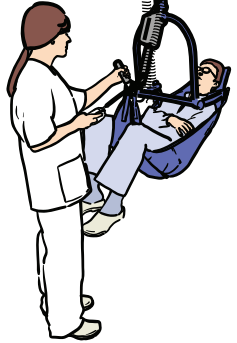

Mova o paciente.

8

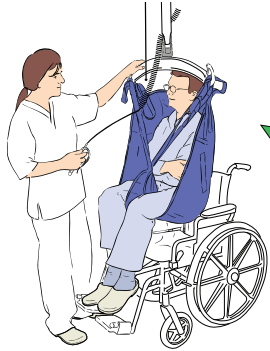

Baixe até não sentir tensão. Solte as alças ou ganchos.

Transferência a partir da posição de decúbito dorsal

1




Coloque e centre a funda por baixo do paciente. No caso de fundas com suporte para a cabeça, certifique-se de que se estendem até ao topo da cabeça do paciente.

2




Posicione o elevador sobre o paciente.

3

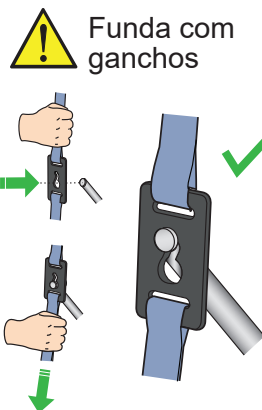

Instale e fixe o gancho na presilha antes de elevar o paciente.

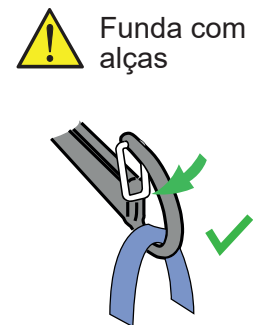

Coloque a alça de fixação no gancho. Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

4




Ligue as alças ou ganchos da funda à barra de suporte. Prenda as extensões para os ombros e depois as extensões para as pernas.

5




Levante o paciente.

6

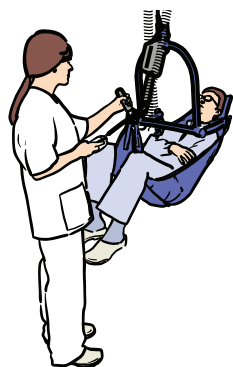


Mova o paciente.

7

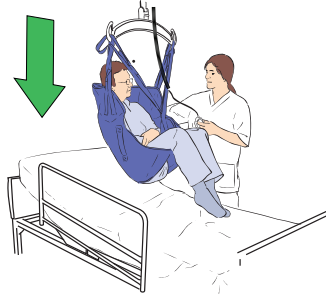

Baixe o paciente no novo local.

8

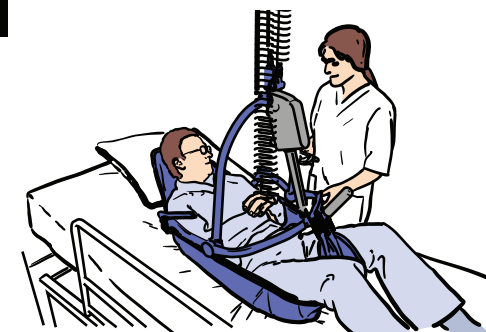


Quando o peso do corpo do paciente estiver totalmente apoiado, solte as alças ou ganchos.

Reposicionamento - mover para cima na cama

1



Coloque a funda por baixo do paciente e posicione o elevador sobre paciente.

2  Funda com alças



Coloque a alça de fixação no gancho. Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

3



Prenda tantas alças da funda quanto possível à barra de suporte. Comece pelas alças do lado da cabeça.

4



Suba até as ancas estarem apoiadas e mova para cima.

5



Baixe o paciente no novo local e solte todas as alças.

Reposicionamento - virar na cama

1



Coloque a funda por baixo do paciente e posicione o elevador sobre paciente.

2  Funda com alças



Coloque a alça de fixação no gancho. Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

3



Prenda tantas alças da funda quanto possível de um lado da barra de suporte. Comece pelas alças do lado da cabeça.

4



Suba até o paciente rolar para a posição pretendida.

5




Baixe até não sentir tensão e desprenda todas as alças.

Transferência do paciente na posição de decúbito dorsal




Coloque a funda por baixo do paciente. Certifique-se de que identifica o lado da cabeça da funda.

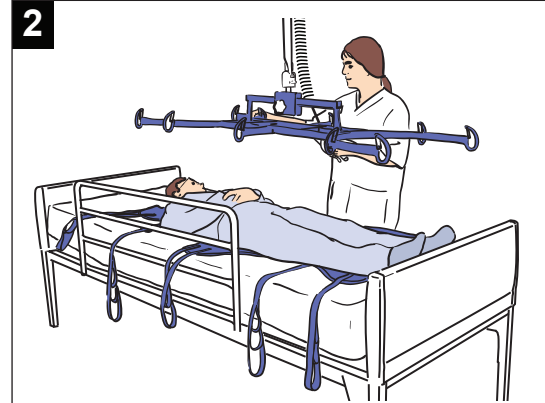


Posicione o elevador sobre o paciente.




Coloque a alça de fixação no gancho. Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

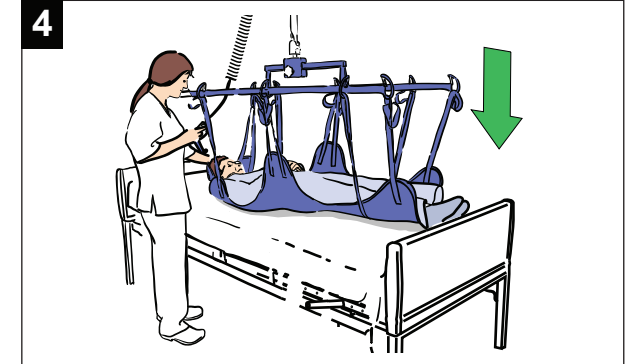


Baixe a estrutura da maca com cuidado e alinhe o centro da estrutura com o umbigo do paciente. Prenda todas as alças da funda.

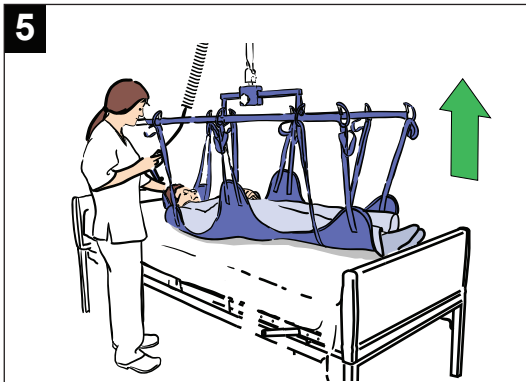


Levante e afaste o paciente da cama.

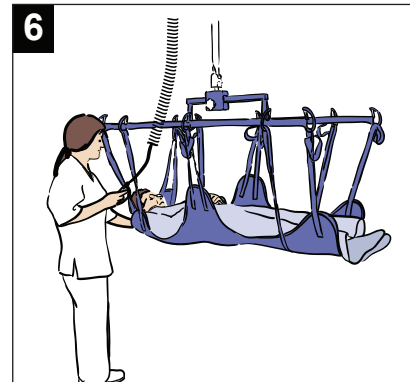

Transfira o paciente.

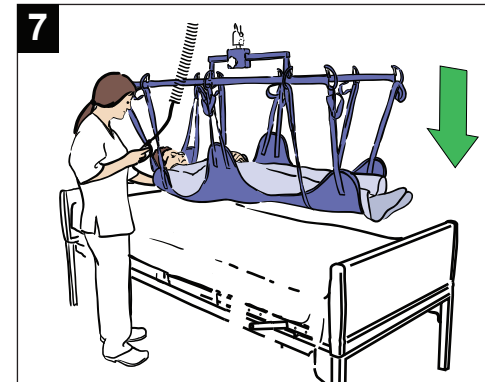

Baixe o paciente no novo local e solte todas as alças.

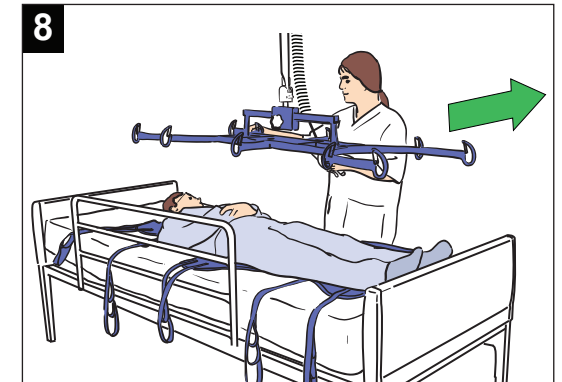

Afaste a estrutura do paciente.