

# Maxi Sky 2

## Flytta från sittande ställning




1



Placera selen runt patienten. För sele med huvudstöd, se till att den sträcker sig hela vägen upp på patientens huvud.

2

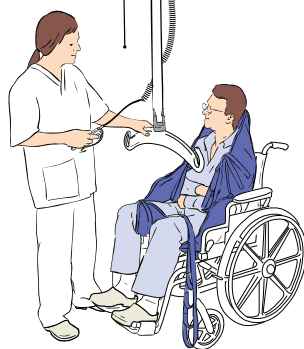


Flytta lyften närmare patienten. Placera lyftbygeln i axelnivå och tillräckligt nära för att fästa axelremmarna.

3




Sele med klämman

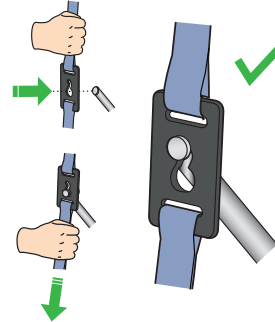

Fäst och säkra klämman vid fästknoppen innan patienten lyfts.




Sele med öglor

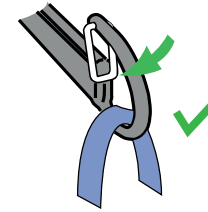

Placera fästöglan på kroken. Se till att säkerhetsspärren stängs.

4

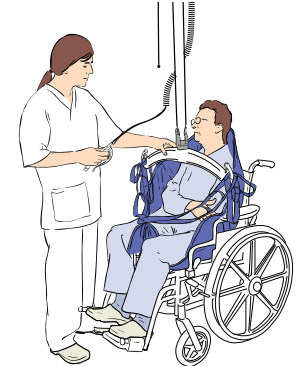


Fäst selens öglor eller klämmor på lyftbygeln.

5




Gällande DPS-lyftbygeln och selklämman, luta lyftbygeln för att fästa benklämmorna.

6

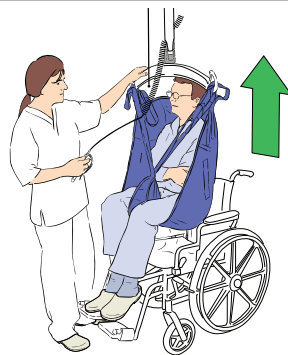


Hissa upp patienten.

7

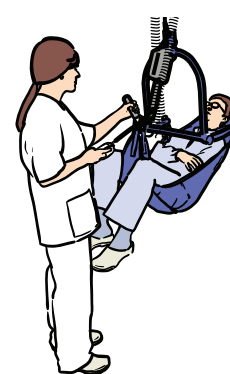

Flytta patienten.

8

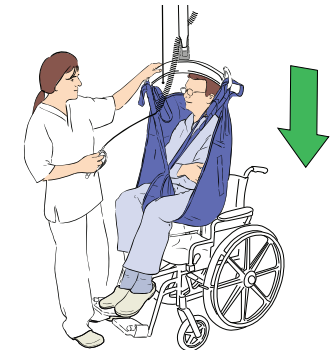

Sänk tills selen inte är spänd längre. Lossa öglor eller klämmor.

## Flytta från liggande ställning

1




Placera och centrera selen under patienten. För sele med huvudstöd, se till att den sträcker sig hela vägen upp på patientens huvud.

2




Placera lyften ovanför patienten.

3

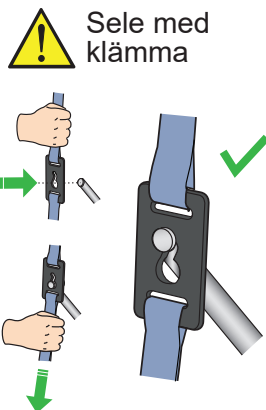

Sele med klämma

Fäst och säkra klämman vid fästknoppen innan patienten lyfts.

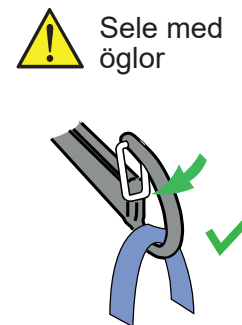

Sele med öglor

Placera fästöglan på lyftbygeln. Se till att säkerhetsspärren stängs.

4




Fäst selens öglor eller klämmor på lyftbygeln. Fäst axelremmarna och sedan benremmarna.

5




Hissa upp patienten.

6

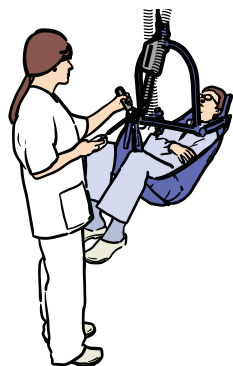


Flytta patienten.

7

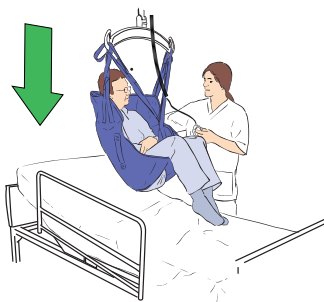


Sänk ner patienten till den nya platsen.

8

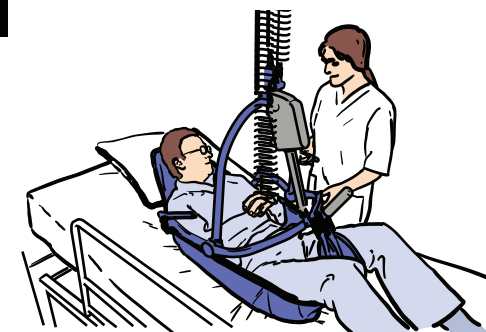

Lossa inte öglor eller klämmor förrän patientens kroppsvikt stöttas helt och hållet.


## Omflyttning - flytta patienten uppåt i sängen

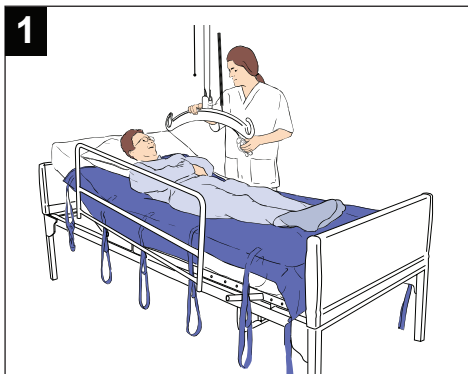


Placera selen under patienten och positionera lyften över patienten.




Placera fästöglan på kroken. Se till att säkerhetspärren stängs.

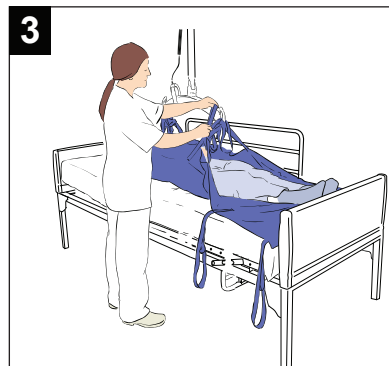

Fäst så många selöglor som möjligt på lyftbygeln. Börja med öglorna vid huvudändan.

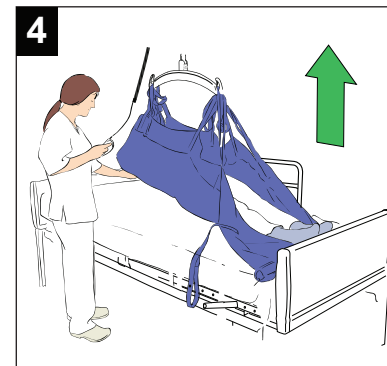


Hissa upp tills höfterna stöds och lyfts upp.

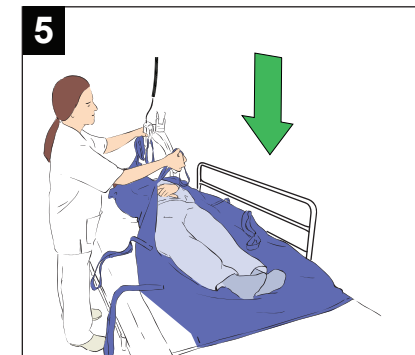

Sänk ner patienten till den nya platsen och lossa alla öglor.


## Omflyttning - vända patienten i sängen

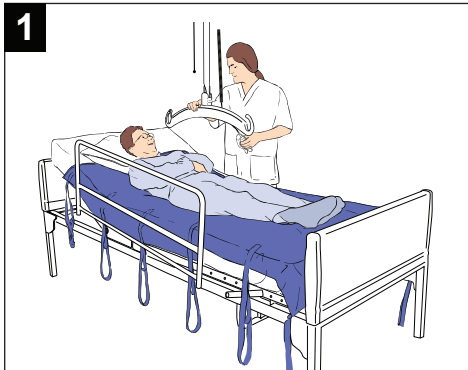


Placera selen under patienten och positionera lyften över patienten.




Placera fästöglan på kroken. Se till att säkerhetspärren stängs.

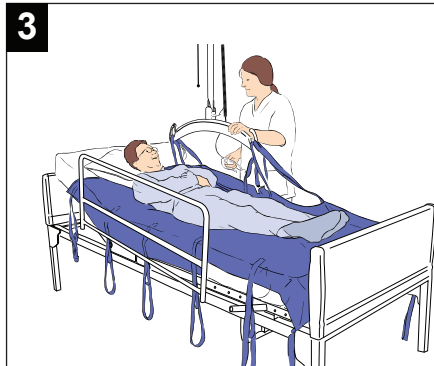

Fäst så många selöglor som möjligt från en sida på lyftbygeln. Börja med öglorna vid huvudändan.

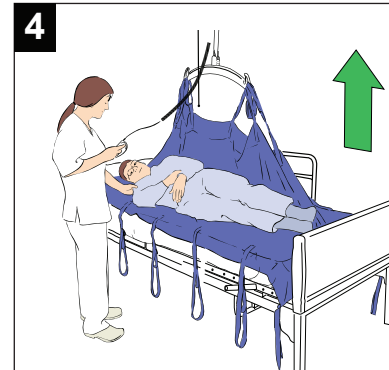

Hissa upp tills patienten har vänts till önskat läge.

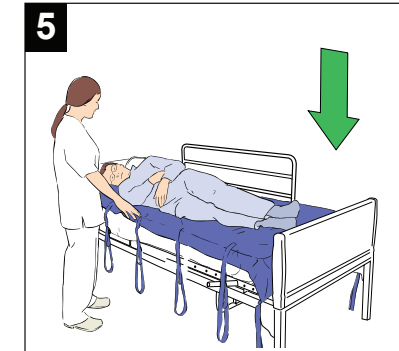

Sänk ner tills selen inte är spänd längre och lossa alla öglor.


## Flytta patienten i liggande ställning

1



Placera selen under patienten och ta reda på selens huvudände.


2

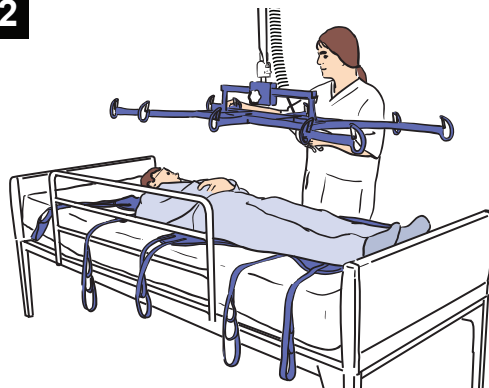

Placera lyften ovanför patienten.


3

! Sele med öglor

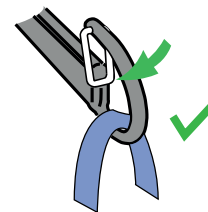


Placera fästöglan på kroken. Se till att säkerhetsspärren stängs.

4

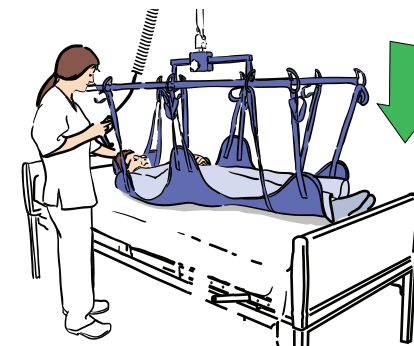


Sänk bärramen försiktigt och rikta in ramens mitt mot patientens navel. Fäst alla selöglor.

5

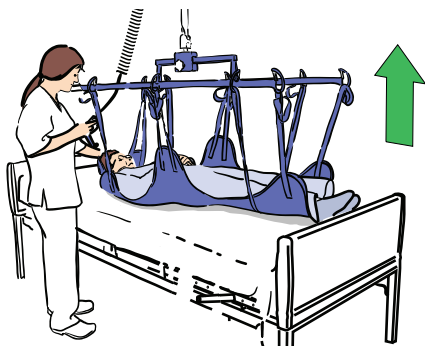


Hissa upp patienten och flytta honom/henne bort från sängen.

6

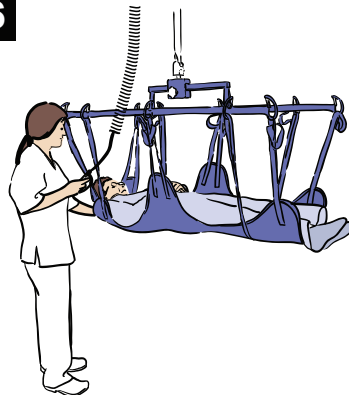


Flytta över patienten.

7

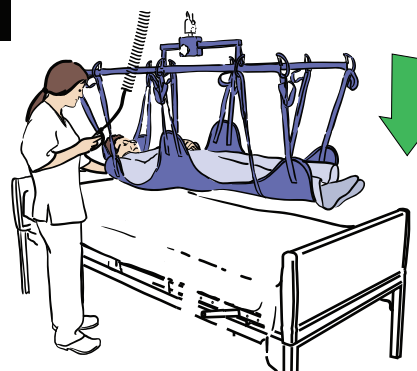

Sänk ner patienten till den nya platsen och lossa alla öglor.

8

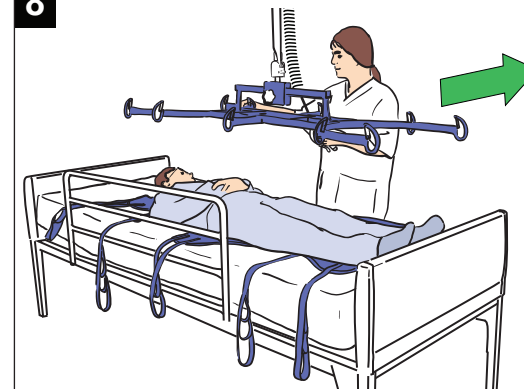

Flytta ramen bort från patienten.

