


Maxi Twin


Forflytning fra stol

1

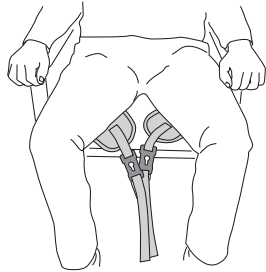

Anbring sejlet omkring plejemandtageren, således at den nederste del af ryggen er dækket, og hovedstøtten dækker bag ved hovedet. Træk hvert benstykke ind under hvert lår.


2

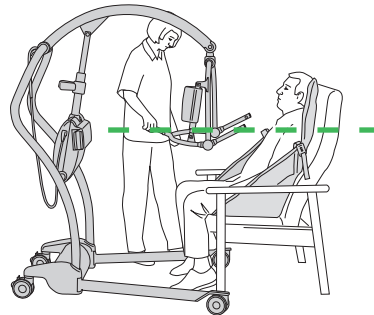


Placer liften foran plejemandtageren. Åbn chassisbenene om nødvendigt. Juster afstandsbojlen til skulderhøjde.

3

Løkkesejl

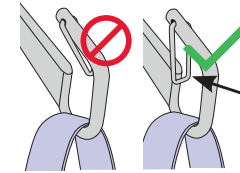


Sejl med clips

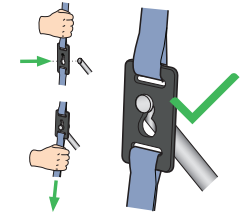

Låse-
anordning
lukket

Hægt sejlklemmerne eller -løkkerne på de relevante hæftepunkter på afstandsbojlen.

4

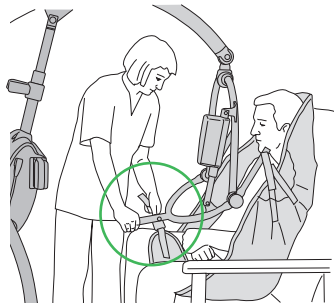

For lifte med DPS-afstandsbojle:
Tryk styrehåndtaget nedad, og fastgør clipsene, der sidder i benstropperne.

5



Risiko
for fald



Risiko for
fastklemning

Sørg for, at bremserne ikke er aktiveret. Sørg for, at sejlet er sikret, inden plejemandtageren løftes.




Brug håndbetjeningen til at løfte plejemandtageren, og juster med styrehåndtaget, indtil plejemandtageren ligger lænet tilbage i sejlet.

Fortsæt med trinnene på næste side


Forflytning fra en stol (fortsat)

6

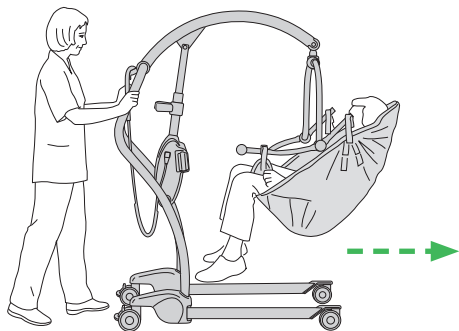


Luk chassisbenene, og forflyt plejemodtageren.

7

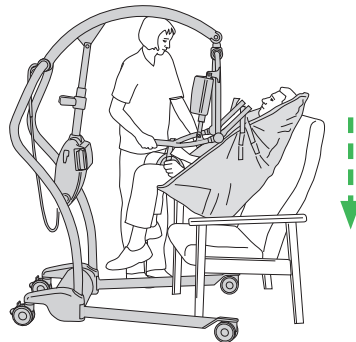

Sænk klienten og juster styrehåndtaget så klienten bringes i en egnet position.


8

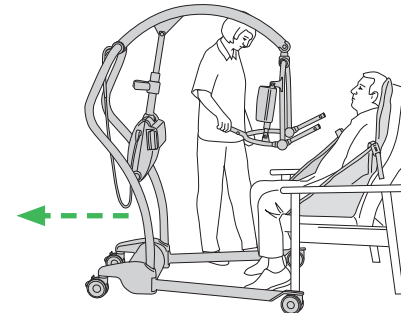

Frigør sejlet fra afstandsbøjlen.
Flyt liften, og sørg for, at plejemodtagerens fødder og krop er fri af liften.
Fjern sejlet fra plejemodtageren.


Forflytning fra en seng

1

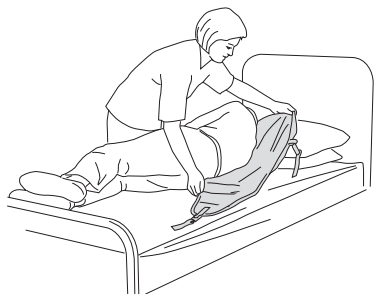


Rul plejemodtageren ind mod dig selv.
Fold sejlet halvvejs, og læg det bag plejemodtagerens ryg.

2

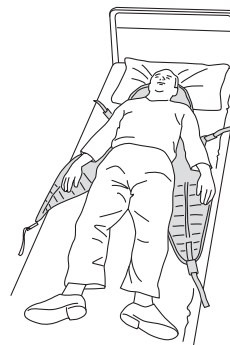

Anbring sejlet, således at plejemodtageren bliver rullet tilbage midt på sejlet.

3

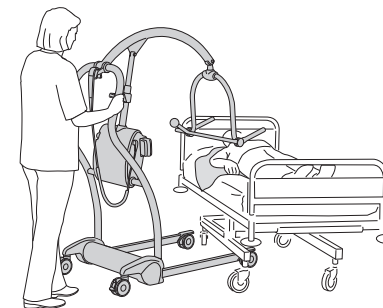


Sørg for, at afstandsbøjlenes åbne side vender mod plejemodtagerens brystkasse.

Fortsæt med trinnene på næste side

Forflytning fra en seng (fortsat)


4

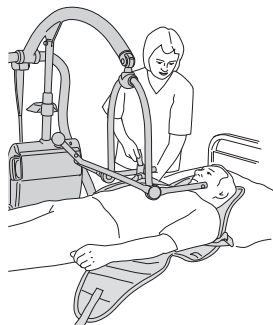

Anbring afstandsbøjlen lige over plejemodtageren. Vip afstandsbøjlen, indtil skulderfastgørelsespunkterne kan forbindes med sejlet.


5

Løkkesejl

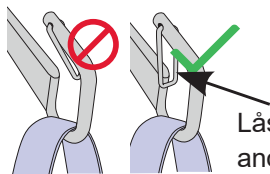

Låse-anordning lukket

Sejl med clips

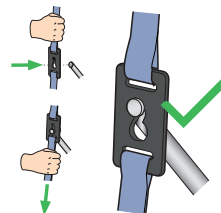

Hægt sejlklemmerne eller -løkkerne på de relevante hæftepunkter på afstandsbøjlen.

6



For lifte med DPS-afstandsbøjle: Benstykkerne skal føres under lårene. Tryk styrehåndtaget nedad, og fastgør clipsene, der sidder i benstropperne.


7



Risiko for fald




Risiko for fastklemning

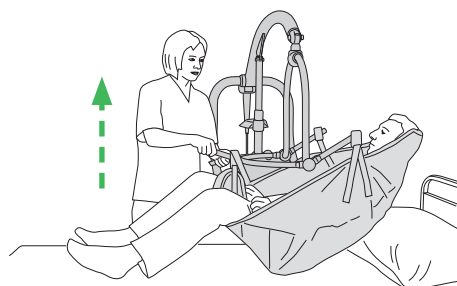

Sørg for, at bremserne ikke er aktiveret. Sørg for, at sejlet er sikret, inden plejemodtageren løftes.


Løft plejemodtageren ved hjælp af håndbetjeningen, og anbring plejemodtageren i en behagelig stilling. Flyt plejemodtageren.

8

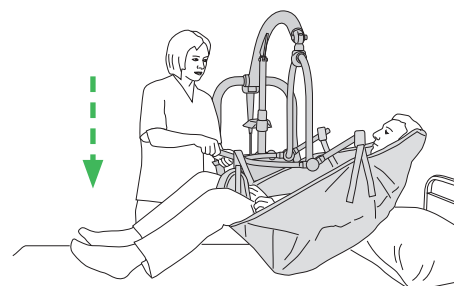

Når plejemodtageren skal tilbage i sengen: Brug lifthåndtagene på sejlet til at anbringe plejemodtageren over sengen. Træk ikke i sejlet. Brug håndbetjeningen til at sænke plejemodtageren.

9

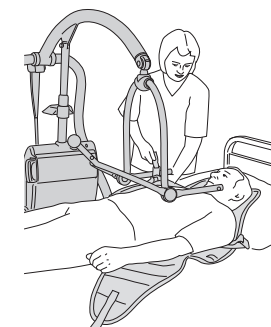

Frigør sejlet fra afstandsbøjlen. Flyt liften, og sørg for, at plejemodtagerens fødder og krop er fri af liften. Fjern sejlet fra plejemodtageren.

