


# Maxi Twin


## Transfert depuis le fauteuil

1

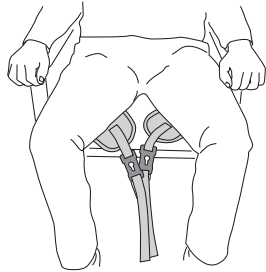

Placez le harnais autour du patient pour que la base de son dos repose sur le harnais et que le repose-tête soit derrière la tête. Tirez chaque jambière sous chaque cuisse du patient.


2

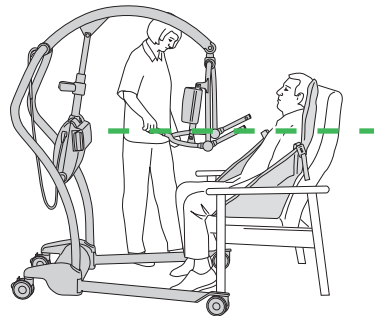


Positionnez le lève-personne devant le patient. Si nécessaire, ouvrez les pieds du châssis. Placez le berceau au niveau des épaules.

3

Harnais à boucles

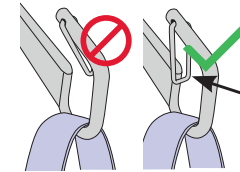


Harnais à clips

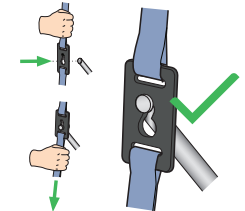

Loquet fermé

Attachez les clips ou boucles de fixation du harnais aux points appropriés du berceau mobile.

4

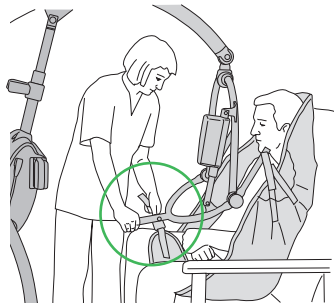

Pour les lève-personnes avec berceau mobile DPS : poussez la poignée de positionnement vers le bas et attachez les clips de fixation des sangles de jambières.

5



Risque de chute



Risque de coincement

Vérifiez que les freins sont serrés. Vérifiez que le harnais est bien fixé avant de soulever le patient.




À l'aide de la télécommande, soulevez le patient, réglez la poignée de positionnement jusqu'à ce que le patient soit couché dans le harnais.

*suite des étapes à la page suivante*


## Transfert depuis le fauteuil (suite)

6

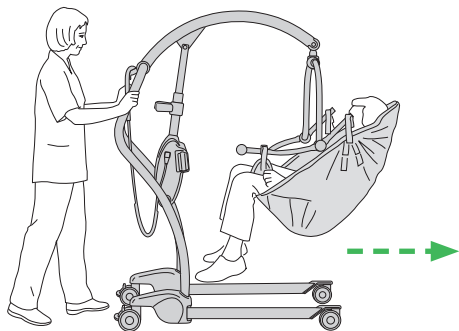


Fermez les pieds du châssis, puis effectuez le transfert du patient.

7

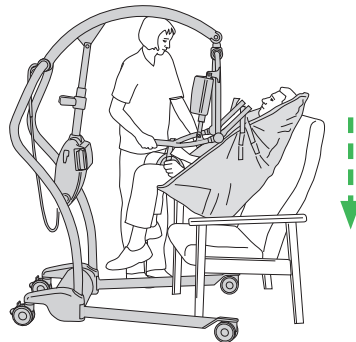

Abaissez le patient et réglez la poignée de positionnement afin de l'amener à une position appropriée.


8

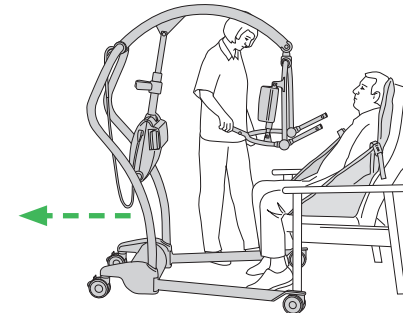

Détachez le harnais du berceau.  
Retirez le lève-personne en vérifiant que les pieds et le corps du patient sont à l'écart du lève-personne.  
Retirez le harnais du patient.


## Transfert depuis le lit

1

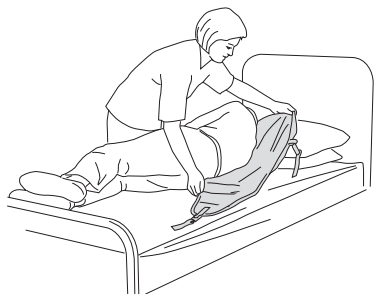


Faites rouler le patient vers vous. Pliez le harnais en deux puis placez-le dans le dos du patient.

2

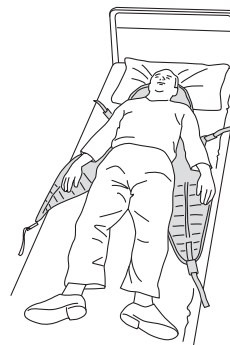

Placez le harnais de manière à ce qu'une fois déroulé, le patient se trouve en position centrale sur le harnais.

3

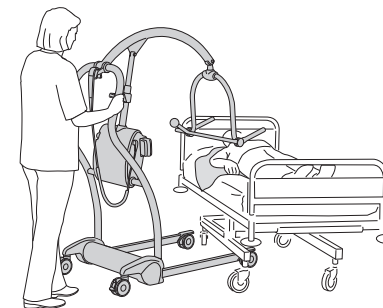


Approchez le lit avec le côté ouvert du berceau mobile vers la poitrine du patient.

*suite des étapes à la page suivante*

## Transfert depuis le lit (suite)



4

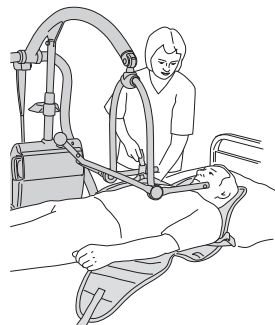


Positionnez le berceau mobile juste au-dessus du patient. Inclinez le berceau mobile jusqu'à ce que les pattes de fixation d'épaule soient fixées au harnais.

5

Harnais à boucles

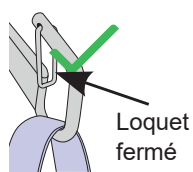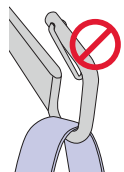

Harnais à clips

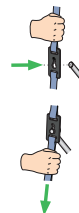

Attachez les clips ou boucles de fixation du harnais aux points appropriés du berceau mobile.

6



Pour les lève-personnes avec berceau mobile DPS : Les jambières doivent être placées sous la cuisse. poussez la poignée de positionnement vers le bas et attachez les clips de fixation des sangles de jambières.


7



Risque de chute




Risque de coincement

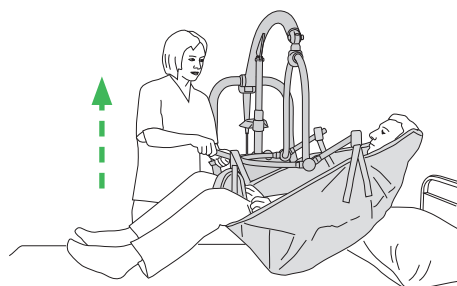

Vérifiez que les freins sont serrés. Vérifiez que le harnais est bien fixé avant de soulever le patient.


À l'aide de la télécommande, soulevez le patient et ajustez sa position pour qu'il soit à l'aise. Transférez le patient.

8

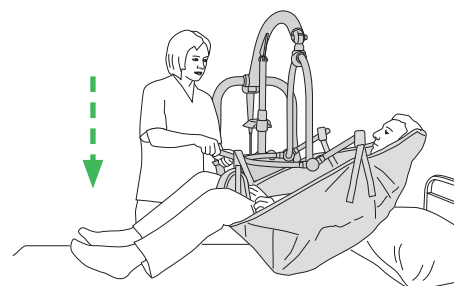

Lors du retour dans le lit : utilisez les poignées de levage du harnais pour positionner le patient sur le lit. Ne tirez pas sur le harnais. Utilisez la télécommande pour faire descendre le patient.

9

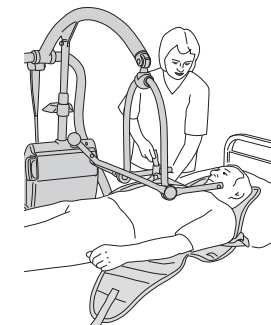

Détachez le harnais du berceau. Retirez le lève-personne en vérifiant que les pieds et le corps du patient sont à l'écart du lève-personne. Retirez le harnais du patient.

