壁掛け式バッテリー充電器





目次

一般情報	3
はじめに	3
サービスおよびサポート	3
製造元情報	3
本取扱説明書で使用する定義	3
使用目的	
想定製品寿命	3
製品の品番	
安全に関する注意事項	4
バッテリーと充電器の安全対策	4
設置説明	5
準備	5
設置	
充電器の使用方法	_
バッテリーの充電	5
トラブルシューティング	6
技術仕様	6
技術データ	6
寸法	7
電磁環境適合性	8
電磁環境適合性	8
電磁エミッション	8
電磁イミュニティ	9

意匠方針と著作権

- ® および ™ は Arjo グループ会社に属する商標です。
- © Arjo 2022 年。

当社の方針の一つは継続的改善を掲げているため、当社では事前の通知なしに設計・デザインを 変更する権利を留保しています。

本書の内容の全部あるいは一部を Arjo の同意なしに複写することはできません。

壁掛け式バッテリー充電器をお買い上げいただ きありがとうございます。

この充電器は、病院、介護施設およびその他の ヘルスケア用に設計された高品質な製品シリー ズの一つです。

私たちの目標は、お客様のニーズに応え、最高の製品を提供することです。また、お客様のスタッフ向けに、あらゆる Arjo 製品を最大限に活用できるようにするためのトレーニングを提供しています。

Arjo 製品の使用または保守に関するご質問に付きましては、当社にお問い合わせください。

はじめに

充電器を使用する前に、本取扱説明書を最後までお読みください。この取扱説明書の情報は、充電器を適切に使用・保守するために必要不可欠です。取扱説明書は、製品を保護し、満足のいくパフォーマンスを実現するのに役立ちます。取扱説明書には、怪我を防ぐのに役立つ安全関連のトピックが含まれているため、よく読んで理解しておく必要があります。

警告:性能低下や怪我を避けるために、本製品には、必ず Arjo の指定部品を使用してください。

医療機器もしくは福祉機器に関連して、お客様または患者様に影響する重大な事象が発生した場合、ユーザまたは患者様は、その事象を医療機器製造元あるいは販売元に必ず報告してください。欧州連合では、ユーザは、重大な事象を居住する加盟国の所轄官庁にも報告してください。

Arjo 製品を変更すると、その安全性に影響する場合があります。Arjo は、製品への不正な変更の結果として発生した事象について責任を負いません。

サービスおよびサポート

詳細については、製品の長期的な信頼性、安全性、価値を最大化するためのサポートを提供できる Arjo 代理店にお問い合わせください。製品の交換については、最寄りの代理店にお問い合わせください。本製品は保守が不要で、交換可能な部品はありません。

この取扱説明書の追加コピーは最寄の代理店から入手可能です。注文の際は、取扱説明書の部品番号(表紙を参照)および製品部品番号を記載してください。

製造元情報

この製品の製造元:

ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö,

SWEDEN (スウェーデン)

≅: +46 (0) 10-335 45 00
∃: +46 (0) 413-138 76
(♠: www.arjo.com

本取扱説明書で使用する定義

警告:

意味:これらの使用方法や注意事項をよく理解し、かつ従わなければ、使用者自身および利用者様の怪我の原因となることがあります。

注意:

意味:これらの注意事項に従わなければ、本製品の不具合を引き起こすことがあります。

注記:

意味:これは、本製品の正しい使用に関する重要な情報です。

使用目的

この充電器は、取扱説明書の指示に従って Arjo バッテリーを充電するためのものです。上記以 外を目的として使用することはできません。

この充電器は、通常の条件下 (0°C - 40°C [32°F - 104°F]、最大 90%RH) での屋内使用専用です。

想定製品寿命

この充電器は、1日2回の完全充電(8時間)の使用率に基づき、製品寿命を10年間として製造およびテストされています。製品寿命は、製品交換前の安全動作期間に対応しています。機器の老化と使用頻度は、製品寿命に影響を与える要因となります。

製品の品番

機器の識別番号 (仕様、モデル、シリアル番号) は、充電器に添付されたラベルに記載されています (図 4 を参照)。

記号

記号	記号の説明
***	この記号は、メーカーの名称と住 所を示します。また、製造日を示 すことがあります。
C€	欧州共同体統一法への適合を示す CE マーキング。
予	この記号は、製品をいつも乾燥させておく必要があることを意味します。
REF	この記号は、メーカーのカタログ 番号を示します。
LOT	この記号は、メーカーのロット番 号を示します。
(3)	この記号は、取扱説明書を参照す る必要があることを示します。
Ž	電気・電子機器廃棄物 (WEEE) – 一般的な家庭ゴミまたは商業ゴミ と一緒に本製品を廃棄しないでく ださい。
	本機器は、屋内使用専用です。

記号	記号の説明
	クラス II 電気機器。 これは、感電に対する保護が基本的 絶縁のみに頼らない電気機器を示し ます。
SI®	この記号は、充電モジュールがスロベニア品質計量研究所による認証を 受けていることを意味します。
	この記号は、充電モジュールが TUV Rheinland による認証を受けている ことを意味します。
PSE	この記号は、充電モジュールが製品 安全装置・材料規格 (Product Safety Appliance & Material Standards) に準 拠していることを意味します。
c us	この記号は、充電モジュールがカナ ダ規格協会 (Canadian Standards Association) の認証を受けていること をを意味します。
222	この記号は、充電モジュールが欧州 規格電気認証に準拠していることを 意味します。

安全に関する注意事項

バッテリーと充電器の安全対策

- 充電器は、衝突を防ぐため、交通量の少ない場所に配置する必要があります。
- 充電器の電源コードを接続するときは、プラグ 本体をつかみます。コードを引っ張らないでく ださい。
- 結んでいない電源コードを接続して、ケーブル の摩耗を防ぎ、絡まりを防ぎます。
- 充電器は、熱源または直射日光から離れた場所に設置してください。
- 充電器は乾燥した環境用に製造されています。 風呂場など、湿度の高い場所には設置しないで ください。
- 充電器は必ず換気の良い場所で使用してください。
- 充電器を覆ったり、埃や水にさらしたりしないでください。金属接点を清潔に保つことが必要です。
- 充電器は、リフトに付属の Arjo 24V 鉛蓄電池タイプでのみ使用します。

- バッテリーパックは、フル充電された状態でも 損傷させることなしに充電器に接続されたまま にしておくことができます。
- 本バッテリーを短絡させないでください。
- バッテリーへの衝撃、絶縁破壊、開蓋、分解、 機械的な妨害を行わないこと。
- 電源ソケットが容易にアクセス可能でなければ なりません。故障状態が発生した場合は電源を 切り、壁ソケットからコンセントを抜き取って ください。
- 本バッテリーパックを 40 °C (104 °F) よりも高い温度で保管しないでください。本バッテリーのケーシングに亀裂が入り、バッテリーの内容物が皮膚や服に接触した場合は、ただちに水で洗い流してください。バッテリーの内容物が目に入った場合はただちに多量の水で洗い流して、医師の治療を受けてください。
- バッテリーパックラベル上のリサイクル記号と ごみ箱記号の横に「Pb」記号が表示されます。 これは、本バッテリーに鉛が含まれており、廃 棄せずにリサイクルが必要であることを意味し ます。

準備

- コンセントに近い適切な壁に充電器を取り付けます。
- 壁にプラグまたはアンカーが必要かどうかを確認 します。キットにハードウェアは付属しません。
- バッテリーが入った充電器の重量に耐えられるアンカー、プラグ、ネジ (4) を使用します。各アンカーポイントは、110 N (25 lb) の引張力に耐えられる必要があります。取付プレートの穴の直径は5mm(3/16 インチ)です。

設置

 充電器の取付プレートを型板(テンプレート) として使用して、壁の4つのネジの位置をマークします。充電器がまっすぐに固定されていることを確認してください。

- 壁に (マーキングに従って) 穴をドリルで開けます。必要に応じて、壁用プラグを壁に差し込みます。
- 3) 充電器を壁に固定し、ネジを 取り付けて締めます。図 1 を 参照してください。
- 4) キット付属の電源コードを使用 して、充電器を接続します。
- 5) 結ばれていない電源コードを 接続します。

警告:特に在宅ケア環境では、 重なりを適切に回避してケー ブルを配線することにより、 絡まりのリスクを防ぐための 予防措置を講じる必要があり ます。

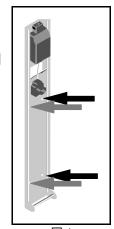


図 1

充電器の使用方法

バッテリーパック


バッテリーの寿命はさまざまで(2-3 年)、適切な 充電方法による影響を大きく受けます。

バッテリーを定期的に充電して製品寿命を延ばしてください。バッテリーが低充電状態にならないようにしてください。

バッテリーパックを長期間使用しない場合は、リフトから取り外しておきます。

注記:バッテリーは、最適な製品寿命を実現するために、初めて使用する前に少なくとも 8 時間充電する必要があります。

バッテリーの充電

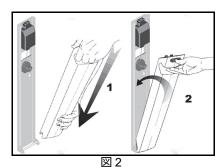

警告:バッテリーパックをしっかりと持ち、落下しないようにしてください。落とすと怪我の原因となります。

- 2) 適切な電源コードを使用して、充電器を AC コンセントに接続します。
- 3) 充電中は充電器の LED が黄色に変わります。 LED が緑色に変わったら、バッテリーパックの 使用準備ができています。消耗したバッテリー パックをフル充電状態にするまでには、最大 8 時間かかることがあります。
- 4) バッテリーがフル充電されたら、充電器からパックを取り出します。取り出すときは、赤いボタンを押してバッテリーパックを手前に引きます(図3を参照)。 LED は緑色のままで、充電器に電力が供給されていることを示しています。



図 3

注記:充電器を使用していないときは、充電器 のプラグを抜くことをお勧めします。

注意:バッテリーパックのリサイクルと廃棄に ついては、地域の規則を参照してください。

トラブルシューティング

充電器の LED が点灯しない。

- 電源コードが壁のコンセントと充電器に接続されているかどうかを確認します。
- 壁のコンセントに電力がきているかどうかを確 認します。

それでも LED が点灯しない場合は、Arjo 代理店に 連絡して充電器を交換してください。

技術仕様

技術データ

製品情報	壁掛け式バッテリー充電器	
チャージャー型番	NDA8200	
充電モジュールモデル	FW7318M/24 (FRIWO Geratebau GmbH)	
充電器の総重量	2 kg	
互換性のあるバッテリーの種類と部品番号	Arjo 24V 鉛蓄電池部品番号:NDA0100、 NDA0200	
公称入力電圧、周波数、消費電流	$100\sim240$ V AC、 $50\sim60$ Hz、 $500\sim700$ mA	
公称出力電圧、電流	24 V DC、1 A	
保護等級	IP40	
絶縁等級	等級Ⅱ	
動作温度 / 湿度範囲	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)、最大 90%RH	
保管温度 / 湿度範囲	$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}) \ , 10^{\circ}\text{RH} \sim 95^{\circ}\text{RH}$	
充電モジュールは、適用される規則や各国別の要求項目を含む IEC 60601-1 シリーズに適合しています。		

また、充電モジュールは、 EN 60335-1 および EN 60335-2-29 に適合しています。


警告:ポータブル RF 通信機器 (アンテナケーブルや外部アンテナなどの周辺機器を含む)は、 メーカー指定のケーブルを含む壁掛け式バッテリー充電器のすべての部品から 30 cm 以上離して使 用しなければなりません。守らない場合、この機器の性能が低下することがあります。 詳細は「電磁両立性」セクションを参照してください。

警告:本製品は、空気や酸素または亜酸化窒素との可燃性麻酔薬混合ガスがあるところで 使用しないでください。

使用終了後の安全な廃棄		
梱包	段ボール、リサイクル可能	
電気および電子コンポーネント	電気および電子部品または電気コードがある充電器システムは、電気・電子機器の廃棄 (WEEE) または地方自治体あるいは国の法令に従って分解し、リサイクルしてください。	

技術仕様

寸法

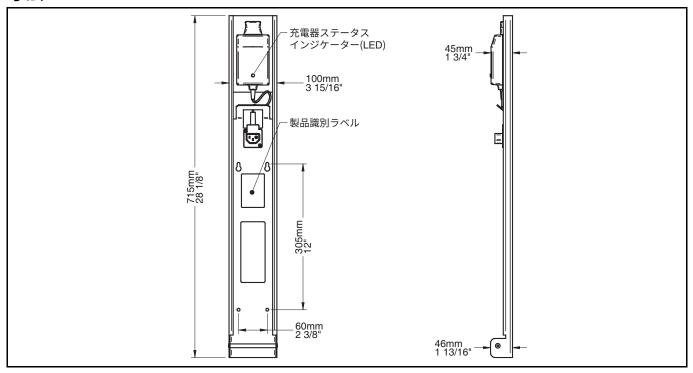

電磁環境適合性

電磁環境適合性

壁取付型バッテリー充電器は、外部ソースから EMI (電磁干渉)を遮断する能力に関して、現行の規制基準への準拠がテストされています。

しかしながら、一部の手順は電磁干渉の軽減に役立ちます。

- 患者のモニタリングおよび / または生命維持領域の他の装置が、認められた電磁気放射基準に準拠しています。
- 電子医療機器装置間の距離を最大にしてください。高周波・高出力デバイスは、充電器に影響を与え うる EMI を発生させることがあります。

本製品の RF (無線周波数)電磁環境をどのように管理するかについての詳しい情報は、 AMI TIR 18-1997 - Guidance on Electromagnetic Compatibility of Medical Devices for Clinical/ Biomedical Engineers (臨床技師 / 医用生体技師のための医療装置の電磁環境両立性に関する ガイダンス)を参照してください。

警告:本製品を他の機器に隣接して、または他の機器と積み重ねて使用すると、誤作動することがあります。このような使用法が必要な場合、本製品と他の機器を観察して、正常に作動しているか、まず確認してください。

警告:本製品は電波障害を起こしたり、近くの機器の動作を妨害することがあります。まわりの機器 の再配線、再配置あるいは場所を隔離するなどの措置が必要になることがあります。

警告:Arjo が指定または提供していないアクセサリー、コード、交換部品を使用すると、この機器における電磁エミッションの増加または電磁イミュニティの減少を引き起こし、不適切な動作につながる可能性があります。

雷磁エミッション

ガイダンスおよびメーカーの宣言 – 電磁エミッション – 全機器およびシステム用

壁取付型バッテリー充電器は、以下に示す電磁環境における使用を意図しています。壁取付型 バッテリー充電器のお客様もしくはユーザーは、そのような環境で使用されていることを確認 しなければなりません。

エミッション試験	コンプライアンス	電磁環境 – ガイダンス	
RF 放射 CISPR 11	グループ 1	壁取付型バッテリー充電器は、内部機能のために RF エネルギーを使用します。従って、その RF エミッションは非常に低いため、近隣の電子機器 に何らかの影響を及ぼし難くなっています。	
RF エミッション CISPR 11	クラス B		
高調波エミッション IEC 61000-3-2	クラス A	壁取付型バッテリー充電器は、一般住宅用設備 や、居住目的で使用される建物に供給される公	
電圧変動 / フリッカエミッション IEC 61000-3-3	準拠	 対低電圧電源へ直接接続される設備などを含む、あらゆる設備での使用に適しています。	

電磁イミュニティ

ガイダンスおよびメーカーの宣言 – 電磁イミュニティ – 全機器およびシステム用

壁取付型バッテリー充電器は、以下に示す電磁環境における使用を意図しています。壁取付型バッテリー充電器のお客様もしくはユーザーは、そのような環境で使用されていることを確認 しなければなりません。

イミュニティ試験	IEC 60601 試験レベル	コンプライアンス レベル	電磁環境 – ガイダンス
静電気放電 (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV 接触 ±15 kV 空中	±8 kV 接触 ±15 kV 空中	床はフローリング、 コンクリートあるいはセ ラミックタイルにしてく ださい。床が合成材に変 更された場合、相対湿度 は最低 30% にしなけれ ばなりません。
電気高速過渡 / 爆発 IEC 61000-4-4	±2 kV、 AC メイン用 100 kHz 繰返し 周波数	±2 kV、 AC メイン用 100 kHz 繰返し 周波数	電源品質は一般的な商用 あるいは病院環境のそれ と同等としてください。
サージ IEC 61000-4-5	±2 kV AC メイン用 アース端子への線 ±1 kV、AC メイン用、 線間	±2 kV AC メイン用 アース端子への線 ±1 kV、 AC メイン用、 線間	電源品質は一般的な商用 あるいは病院環境のそれ と同等としてください。
電源入力ライン上 の電圧降下、中断 および電圧変動 IEC 61000-4-11	0% Ur; 0.5 サイクル 0°、45°、90°、135°、 180°、225°、270° および315° にて 0% Ur; 1 サイクルおよび70% Ur; 25/30 サイクル単相:0° にて0% Ur; 250/300 サイクル		電源品質は一般的な商用あるいは病院環境のそれと同等としてください。
電源周波数 (50/60 Hz) 磁界 IEC 61000-4-8	30 A/m 50/60 Hz にて	30 A/m 50/60 Hz にて	電力周波数磁場は、一般 商用または病院環境での 典型的な場所と同じ特性 レベルにしてください。

注記: Ur は、テストレベルの適用前における AC 電源の電圧です。

電磁環境適合性

(続く)

ガイダンスおよびメーカーの宣言 – 電磁イミュニティ – 全機器およびシステム用			
イミュニティ 試験	IEC 60601 試験レベル	コンプライアンスレベル	電磁環境 – ガイダンス
伝導性 RF IEC 61000-4-6	0.15 ~ 80 MHz 間の ISM 周波数帯外 3V	0.15 ~ 80 MHz 間の ISM 周波数帯外 3V	
	0.15 ~ 80 MHz 間の ISM およびアマチュア無線周 波数帯内 6V	0.15 ~ 80 MHz 間の ISM およびアマチュア無線周 波数帯内 6V	該当なし
放射 RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz	該当なし
RF 無線通信機器 の近接フィールド IEC 61000-4-3	380~390 MHz 27 V/m; PM 50%; 18 Hz 430~470 MHz 28 V/m; (FM ±5 kHz, 1 kHz 正弦) PM; 18 Hz 800~960 MHz 28 V/m; PM 50%; 18 Hz 1700~1990 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 2400~2570 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 5100~5800 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz 704~787 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	380 ~ 390 MHz 27 V/m; PM 50%; 18 Hz 430 ~ 470 MHz 28 V/m; (FM ±5 kHz, 1 kHz 正弦) PM; 18 Hz 800 ~ 960 MHz 28 V/m; PM 50%; 18 Hz 1700 ~ 1990 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 2400 ~ 2570 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 5100 ~ 5800 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz 704 ~ 787 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	該当なし

AUSTRALIA Arjo Australia Building B, Level 3 11 Talavera Road

Macquarie Park, NSW, 2113,

Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË Arjo Belgium Evenbroekveld 16 9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80 Fax: +32 (0) 53 60 73 81 E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02

Galpão - Lapa

São Paulo – SP – Brasil CEP: 05040-000 Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West

Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3 Tel/Tél: +1 (905) 238-7880 Free: +1 (800) 665-4831

Fax: +1 (905) 238-7881 E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o. Na Strzi 1702/65 140 00 Praha Czech Republic

Phone No: +420225092307 E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE Tel: +45 49 13 84 86 Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH

Peter-Sander-Strasse 10 DE-55252 MAINZ-KASTEL Tel: +49 (0) 6134 186 0 Fax: +49 (0) 6134 186 160 E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34,900,921.8

Telefono 1: +34 900 921 850 Telefono 2: +34 931 315 999 FRANCE Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi

CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13 Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14 E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,

HONG KONG Tel: +852 2960 7600 Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV Biezenwei 21 4004 MB TIEL Postbus 6116 4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00 Fax: +31 (0) 344 64 08 85 E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384

E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS Olaf Helsets vei 5 N-0694 OSLO Tel: +47 22 08 00 50 Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.0G

A-1230 Wien Tel: +43 1 8 66 56 Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o. ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)

Tel: +48 61 662 15 50 Fax: +48 61 662 15 90 E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo) Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G PT-1600-233 Lisboa Tel: +351 214 189 815 Fax: +351 214 177 413 E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG Fabrikstrasse 8 Postfach CH-4614 HÄGENDORF Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77 Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUON

Arjo Scandinavia AB Riihitontuntie 7 C 02200 Espoo Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 MALMÖ Tel: +46 (0) 10 494 7760 Fax: +46 (0) 10 494 7761 E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland Houghton Hall Park Houghton Regis UK-DUNSTABLE LU5 5XF Tel: +44 (0) 1582 745 700 Fax: +44 (0) 1582 745 745

USA

Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

E-mail: sales.admin@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K. 東京都港区虎ノ門三丁目7 番8 号 ランディック第2 虎ノ門ビル9 階

Tel: +81 (0)3-6435-6401 Fax: +81 (0)3-6435-6402 E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden www.arjo.com



