


Indikátory alarmu na předním panelu

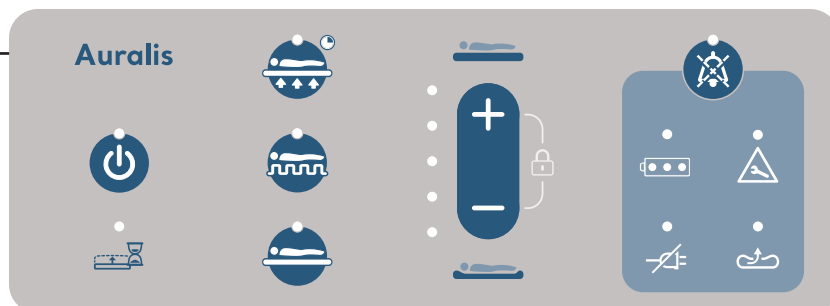

Tlačítko spuštění/pohotovostního režimu

Režim spuštění – jednou stisknete tlačítko. Indikátor přestane blikat a začne nepřetržitě svítit.

Pohotovostní režim – stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund. Indikátor přestane nepřetržitě svítit a začne blikat.



Indikátor čekání

Rozsvítí se při nafukování matrace nebo sedáku. Zůstane rozsvícený po dobu 15 minut, dokud matrace nebo sedák nebudou plně nafouknuté.



Tlačítko režimu AutoFirm

Stiskněte a podržte 2 sekundy pro režim AutoFirm. Matrace se nafoukne na dočasně pevný povrch. Standardní doba trvání režimu AutoFirm je 15 minut, může však být prodloužena po pětiminutových přírůstcích až na 30 minut. Indikátor se rozsvítí, když bude aktivní.

Neplatí pro sedák.



Tlačítko alternujícího režimu

Stiskněte pro alternující režim (výchozí). Alternující režim nafukuje nebo vyfukuje jednotlivé cely pro zajištění proměnlivého povrchu. Indikátor se rozsvítí, když bude aktivní.



Tlačítko reaktivního režimu CLP (konstantní nízký tlak)

Stiskněte pro reaktivní režim CLP. Udržuje konstantní nízký tlak ve všech celách. Indikátor se rozsvítí, když bude aktivní.

Neplatí pro sedák.



Nebezpečí úrazu nebo nepohodlí

Úroveň pohodlí VŽDY nastavte na maximální u klientů s hmotností překračující 360 kg (793 lb). (pouze Auralis Plus)

Tlačítka ovládání pohodlí

Stiskněte pro nastavení tlaku v podpůrném povrchu pro zajištění pohodlí. Indikátory udávají nastavení pohodlí.



Tlačítko ztišení alarmu

Stisknutím tlačítka ztišíte zvukový alarm na 15 minut, indikátor stále svítí.

Alarm se zruší, pokud bude odstraněn alarmový stav.



Indikátor téměř vybité baterie

Indikátor svítí žlutě a zní zvukový alarm – zbývá 1 hodina nabití baterie. Při alarmu je možno vypnout zvuk.

Pokud zbývá méně než 15 minut nabití baterie, pumpa se přepne do reaktivního režimu CLP. Zvukový alarm již není možno ztišit.



Indikátory nabití baterie

Modré indikátory udávají stav nabití baterie. Blikající indikátor – baterie se nabíjí.



Indikátor servisu

- Indikátor servisu svítí žlutě, indikátory alarmu na předním panelu zeleně – pumpa je připravena na servis. Pouze pro informaci, nejedná se o alarm.
- Indikátor servisu svítí žlutě, indikátory alarmu na předním panelu rovněž žlutě, zvukový alarm – u pumpy došlo k vnitřní poruše nebo chybě. Při alarmu je možno vypnout zvuk.



Indikátor výpadku napájení

Byl detekován výpadek napájení. Pouze pro informaci, pumpa nadále normálně pracuje a využívá napájení z baterie. Nezní žádný zvukový alarm.



Indikátor nízkého tlaku

- Indikátor se rozsvítí, zazní jeden výstražný tón – pumpa zjistila nízký tlak v matraci nebo sedáku.
- Indikátor se rozsvítí, zazní zvukový alarm – došlo k odpojení matrace nebo sedáku při používání. Při alarmu je možno vypnout zvuk.
- Indikátor se rozsvítí, zazní jeden výstražný tón – pumpa zjistila, že matrace není při spuštění připojena.

