



Auralis

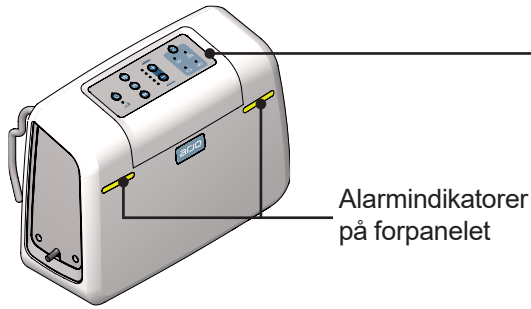

Alarmindikatorer på forpanelet

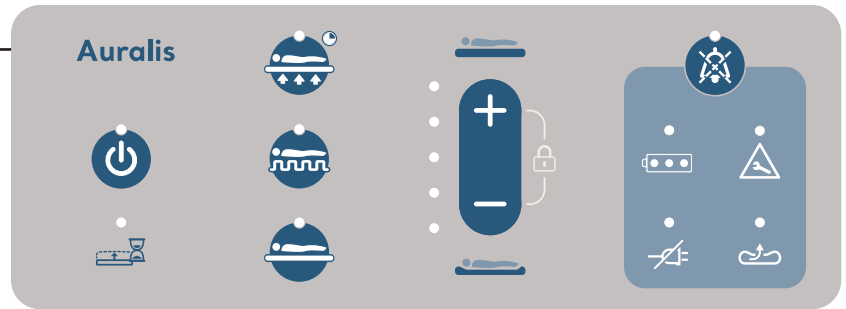

Tænd/Standby-knap

Driftstilstand – tryk én gang på knappen. Indikatoren skifter fra blink til konstant lys.

Standbytilstand – tryk på knappen i to sekunder. Indikatoren skifter fra konstant lys til blink.



Vent-indikator

Lyser, når madrassen eller siddepuden pumpes op. Forbliver tændt i 15 minutter, indtil madrassen eller siddepuden er pumpet helt op.



Knappen AutoFirm-tilstand

Tryk og hold den nede i to sekunder for at vælge tilstanden Autofirm. Madrassen pumpes op til en midlertidig fast overflade. AutoFirm-tilstanden varer 15 minutter, men den kan øges i trin på 5 minutter til maksimalt 30 minutter. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiv.

Ikke for siddepuden.



Knappen Skiftende tilstand

Tryk på knappen Skiftende tilstand (standard). Den skiftende tilstand blæser luft i/tømmer luft ud af forskellige celler for at give en varieret overflade. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiv.



Knappen Reaktiv tilstand (CLP; konstant lavt tryk)

Tryk på knappen for reaktiv tilstand (CLP). Opretholder et konstant lavere tryk i alle celler. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiv.

Ikke for siddepuden.



Risiko for personskade eller ubehag

Indstil **ALTID** komfortniveauet til maksimum for plejemodtagere, der vejer over 360 kg (793 lb) (kun Auralis Plus).

Knapper til komfortregulering

Tryk på knapperne for at indstille trykket i støtteunderlaget for at indstille komfortniveauet. Indikatorerne viser komfortindstillingerne.



Knappen Alarmedmpning

Tryk på knappen for at sætte lydalarmen på lydløs i 15 minutter; indikatoren er tændt.

Alarmen stoppes, når årsagen til alarmen er blevet afhjulpet.



Indikator for lavt batteriniveau

Indikator gul og lydalarm – 1 times batteritid tilbage. Alarmen kan sættes på lydløs.

Når der er mindre end 15 minutters batteritid tilbage, går pumpen i reaktiv tilstand (CLP). Lydalarmen kan ikke længere sættes på lydløs.



Indikatorer for batteriniveau

De blå indikatorer viser batteriniveauet. Blinkende indikator – batteriet oplader.



Serviceindikator

- Serviceindikator gul, alarmindikatorerne på forpanelet lyser grønt – pumpen er klar til eftersyn. Kun til information, ikke en alarm.
- Serviceindikator gul, alarmindikatorerne på forpanelet lyser grønt, lydalarm – internt svigt eller fejl i pumpen. Alarmen kan sættes på lydløs.



Indikator for strømsvigt

Der er registreret et strømsvigt. Kun til information, pumpen fortsætter med at fungere normalt ved brug af batteriet. Der er ingen lydalarm.



Indikator for lavt tryk

- Indikatoren lyser, der lyder en enkelt advarselstone – pumpen registrerer lavt tryk i madrassen eller siddepuden.
- Indikatoren lyser, der høres en lydalarm – madrassen eller siddepuden er frakoblet, når den er i brug. Alarmen kan sættes på lydløs.
- Indikatoren lyser, der lyder en enkelt advarselstone – pumpen registrerer, at en madras ikke er tilsluttet ved opstart.

