



Auralis

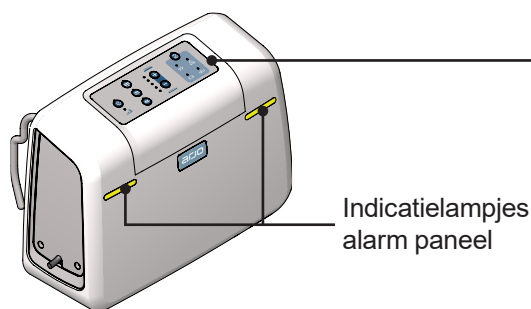

Indicatielampjes alarm paneel

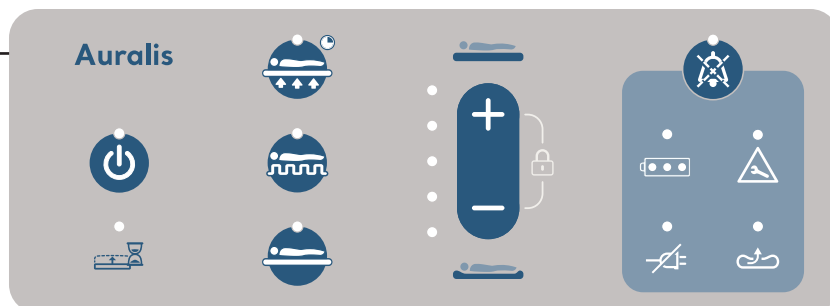

Knop Aan/Stand-by

Aan-modus – druk één keer op de knop. Het indicatielampje verandert van knipperend in constant.

Stand-bymodus – houd de knop twee seconden ingedrukt. Het indicatielampje verandert van constant in knipperend.



Wacht-indicatielampje

Brandt wanneer de matras of het zitkussen wordt opgeblazen. Blijft 15 minuten branden totdat de matras of het zitkussen volledig is opgeblazen.



Knop AutoFirm-modus

Houd 2 seconden ingedrukt voor de AutoFirm-modus. De matras wordt opgeblazen tot een tijdelijk stevig oppervlak. De AutoFirm-modus duurt 15 minuten, maar kan in stappen van 5 minuten worden verhoogd tot een maximum van 30 minuten. Indicatielampje brandt als de functie actief is.

Niet voor het zitkussen.



Knop Alternierende modus

Druk in voor Alternierende modus (standaard). De Alternierende modus dient om verschillende cellen op te blazen of leeg te laten lopen om een fluctuerend oppervlak te creëren. Indicatielampje brandt als de functie actief is.



Knop Reactieve modus (constant lage druk)

Druk in voor Reactieve modus. Handhaaft een constante lagere druk in alle cellen. Indicatielampje brandt als de functie actief is.

Niet voor het zitkussen.



Risico op letsel of ongemak

Stel het comfortniveau bij zorgvragers met een gewicht hoger dan 360 kg (793 lb) ALTIJD in op het maximum. (Alleen Auralis Plus)

Comfort-bedieningsknoppen

Druk in om de druk in het ligsysteem aan te passen om het comfortniveau in te stellen. De indicatielampjes geven de comfortinstelling aan.



Alarm-dempen-knop

Druk in om het akoestische alarm 15 minuten te dempen; het indicatielampje gaat dan branden.

Het alarm wordt geannuleerd wanneer de alarmsituatie is gecorrigeerd.



Accu-leeg-indicator

Geel indicatielampje en akoestisch alarm – accucapaciteit nog voldoende voor 1 uur. Het alarm kan worden gedempt.

Als de resterende accucapaciteit minder dan 15 minuten is, gaat de pomp naar de Reactieve modus. Het akoestische alarm kan niet meer worden gedempt.



Acculaadindicatoren

Blauwe indicatielampjes geven het laadniveau van de accu aan. Knipperend indicatielampje – accu wordt geladen.



Indicatielampje Onderhoud

- Onderhoud-indicatielampje geel, alarmindicatielampjes voorpaneel groen – de pomp is toe aan een onderhoudsbeurt. Alleen ter info, geen alarm.
- Onderhoud-indicatielampje geel, alarmindicatielampjes voorpaneel geel, akoestisch alarm – er is een interne storing of fout in de pomp opgetreden. Het alarm kan worden gedempt.



Indicatielampje voor stroomstoring

Er is een stroomstoring gedetecteerd. Alleen ter info, de pomp blijft normaal verder werken op de accu. Er is geen akoestisch alarm.



Lagedrukindicator

- Het indicatielampje brandt, er is één waarschuwingstoon – de pomp detecteert een lage druk in de matras of het zitkussen.
- Het indicatielampje brandt, er is een akoestisch alarm – de matras of het zitkussen is tijdens gebruik losgekoppeld. Het alarm kan worden gedempt.
- Het indicatielampje brandt, er is één waarschuwingstoon – de pomp detecteert bij het opstarten dat er geen matras is aangesloten.