



Auralis

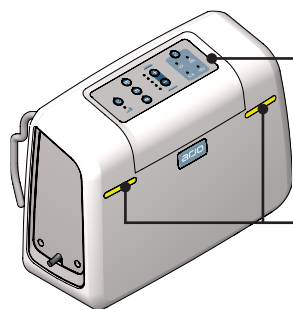

Wskaźniki alarmowe na panelu przednim

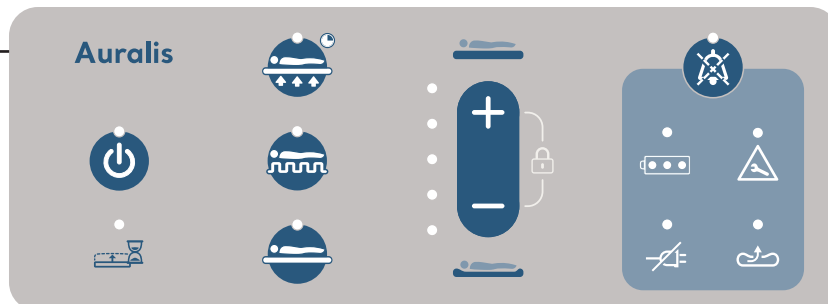

Przycisk Praca/Gotowość

Tryb pracy — wcisnąć przycisk jeden raz. Wskaźnik zmienia się z migającego na stały.

Tryb gotowości — wcisnąć przycisk na dwie sekundy. Wskaźnik zmienia się ze stałego na migający.



Wskaźnik oczekiwania

Świeci się podczas pompowania materaca/ siedziska. Pozostaje włączony przez 15 minut, aż materac lub siedzisko zostaną całkowicie napompowane.



Przycisk trybu Autofirm

Aby przejść do trybu Autofirm, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy. Materac pompuje się do uzyskania tymczasowej twardej powierzchni. Tryb Autofirm trwa 15 minut, jednak można go zwiększać w 5 minutowych skokach, maksymalnie do 30 minut. Wskaźnik świeci się, gdy tryb jest aktywny.

Niedostępne dla siedziska.



Przycisk trybu zmiennociśnieniowego

Nacisnąć, aby przejść do trybu zmiennociśnieniowego (domyślny). W trybie zmiennociśnieniowym w różnych komorach powietrze jest pompowane lub wypuszczane tak, by utworzyć zmienną powierzchnię. Wskaźnik świeci się, gdy tryb jest aktywny.



Przycisk trybu pasywnego CLP (stałego niskiego ciśnienia)

Nacisnąć, aby przejść do trybu pasywnego (CLP). Utrzymuje stałe niskie ciśnienie we wszystkich komorach. Wskaźnik świeci się, gdy tryb jest aktywny.

Niedostępne dla siedziska.



Ryzyko urazu lub dyskomfortu.

Dla pacjentów ważących ponad 360 kg (793 lb) należy ZAWSZE ustawiać maksymalny poziom komfortu. (tylko Auralis Plus)

Przyciski sterowania komfortem

Nacisnąć, aby wyregulować nacisk na powierzchnię podparcia i ustawić poziom komfortu. Wskaźniki pokazują ustawienie komfortu.



Przycisk wyciszenia alarmu

Nacisnąć, aby wyciszyć alarm dźwiękowy na 15 minut, wskaźnik zostanie włączony.

Alarm jest anulowany po naprawieniu sytuacji alarmowej.



Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Żółty wskaźnik i alarm dźwiękowy — pozostała 1 godzina pracy baterii. Alarm można wyciszyć.

Gdy pozostaje mniej niż 15 minut działania akumulatora, pompa przechodzi w Tryb pasywny CLP. Alarmu dźwiękowego nie można już wyciszyć.



Wskaźniki naładowania akumulatora

Niebieskie wskaźniki pokazują poziom naładowania akumulatora. Migający wskaźnik — trwa ładowanie akumulatora.



Wskaźnik serwisowy

- Żółty wskaźnik serwisowy, zielony alarm na panelu przednim zielony — pompa jest gotowa do pracy. Informacyjnie, nie jest to alarm.
- Żółty wskaźnik serwisowy, żółte wskaźniki na panelu przednim, alarm dźwiękowy — pompa ma wewnętrzną usterkę lub błąd. Alarm można wyciszyć.



Wskaźnik usterki zasilania

Wykryto awarię zasilania sieciowego. Tylko informacyjnie, pompa kontynuuje normalną pracę przy użyciu akumulatora. Nie występuje alarm dźwiękowy.



Wskaźnik niskiego ciśnienia

- Zostaje wyświetlony wskaźnik, rozlega się pojedynczy sygnał ostrzegawczy — pompa wykrywa niskie ciśnienie w materacu lub siedzisku.
- Zostaje wyświetlony wskaźnik, rozlega się alarm dźwiękowy — materac lub poduszka siedziska są odłączone podczas użytkowania. Alarm można wyciszyć.
- Zostaje wyświetlony wskaźnik, rozlega się pojedynczy sygnał ostrzegawczy — pompa wykrywa, że materac nie jest podłączony podczas uruchamiania.