


Indicadores de alarme do painel frontal

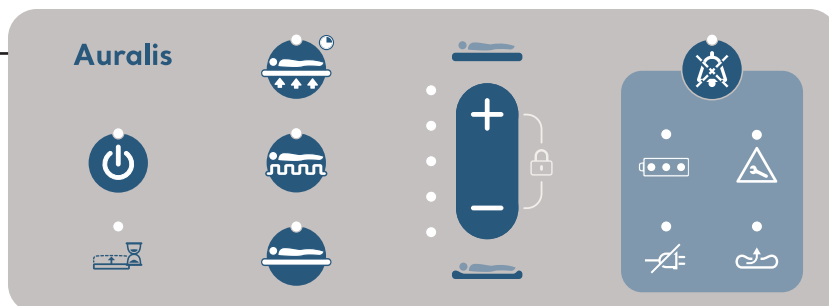

Botão Ligado/Em espera

Modo Ligado - prima o botão uma vez. O indicador muda de intermitente para constante.

Modo Em espera - prima o botão durante dois segundos. O indicador muda de constante para intermitente.



Indicador Aguardar

Apresentado quando o colchão ou a almofada de assento estão a ser insuflados. Fica aceso durante 15 minutos até o colchão ou a almofada de assento estarem totalmente insuflados.



Botão Modo AutoFirm

Prima continuamente durante 2 segundos para aceder ao Modo AutoFirm. O colchão insufla até ficar com uma superfície firme temporária. O Modo AutoFirm tem uma duração de 15 minutos, mas pode ser aumentado em incrementos de 5 minutos até um máximo de 30 minutos. Indicador aceso quando está ativo.

Não se destina à almofada de assento.



Botão Modo Alternado

Prima para o Modo Alternado (predefinição). O Modo Alternado insufla ou esvazia células diferentes para criar uma superfície flutuante. Indicador aceso quando está ativo.



Botão Modo CLP (Pressão baixa constante) reativo

Prima para o Modo CLP reativo. Mantém uma pressão baixa constante em todas as células. Indicador aceso quando está ativo.

Não se destina à almofada de assento.



Risco de ferimentos ou desconforto

Regule **SEMPRE** o nível de conforto máximo para pacientes que pesem mais de 360 kg (793 lb). (Apenas Auralis Plus)

Botões de controlo de conforto

Prima para regular a pressão na superfície de apoio para definir o nível de conforto. Os indicadores apresentam a definição de conforto.



Botão Silenciar alarme

Prima para silenciar o alarme sonoro durante 15 minutos. O indicador acende-se.

O alarme é cancelado quando a condição de alarme tiver sido corrigida.



Indicador Bateria fraca

Indicador amarelo e alarme sonoro - resta 1 hora de autonomia da bateria. O alarme pode ser silenciado.

Quando restarem menos de 15 minutos de autonomia da bateria, a bomba entra no Modo CLP reativo. Deixa de ser possível silenciar o alarme sonoro.



Indicadores Carga da bateria

Os indicadores azuis mostram o nível de carga da bateria. Indicador intermitente - a bateria está a carregar.



Indicador Assistência

- Indicador Assistência amarelo, indicadores de alarme no painel frontal verdes - a bomba está preparada para assistência. Apenas informativo. Não é um alarme.
- Indicador Assistência amarelo, indicadores de alarme no painel frontal amarelos, alarme sonoro - a bomba apresenta uma avaria ou erro interno. O alarme pode ser silenciado.



Indicador Falha de alimentação elétrica

Foi detetada uma avaria na fonte de alimentação elétrica. Apenas informativo. A bomba continua a funcionar normalmente, utilizando a bateria. Não é emitido um alarme sonoro.



Indicador Pressão baixa

- O indicador é apresentado e é emitido um único tom de aviso - a bomba deteta uma pressão baixa no colchão ou na almofada de assento.
- O indicador é apresentado, é emitido um alarme sonoro - colchão ou almofada de assento desligados durante a utilização. O alarme pode ser silenciado.
- O indicador é apresentado, é emitido um único tom de aviso - a bomba deteta que não existe um colchão ligado no arranque.