

System 2000

Llenado automático

Botón de encendido/apagado del llenado automático



P300


P220

El llenado se detiene automáticamente cuando se alcanza el nivel de agua predeterminado.

Para detener el llenado en cualquier momento, pulse el botón de llenado automático.

Botón y cabezal de la ducha

Botón de encendido/apagado de la ducha

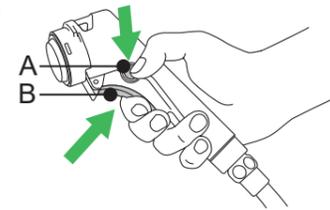

El botón de bloqueo (A) interrumpe el flujo de agua.

El gatillo (B) permite regular y desbloquear el flujo de agua.

Pantalla de P300



No hay agua en la bañera. No hay funciones activadas.



Temperatura del agua para: llenado activo, ducha o bañera llena.

El P300 tiene tres niveles de autollenado. El nivel predeterminado es el normal.



Nivel normal de autollenado Nivel inferior de autollenado Nivel superior de autollenado

Para modificar el nivel:

Pulse (-) o (+) durante los primeros 8 segundos tras el inicio del autollenado.

Protección contra quemaduras



Si la protección contra quemaduras está activada, retire al paciente de la bañera con seguridad.

Si se alcanza un nivel de temperatura peligroso de 45 °C (113 °F), la protección contra quemaduras cierra el agua en menos de 10 s.

P300



En la pantalla se muestran cuatro líneas y se emite un pitido. Durante este tiempo el mezclador se vuelve a calibrar automáticamente.

P220



Ambos ledes parpadean y se emite un pitido.

Pantalla de P220



Temperatura del agua para: llenado activo, ducha o bañera llena.

Hydromassage o Hydrosound (opcional)

Botón de encendido/apagado de Hydromassage o Hydrosound



P300

P220

Ajuste del nivel de intensidad

Hydromassage




Hydrosound

P300 - 20 +


P220



Sistema Sound & Vision (opcional)

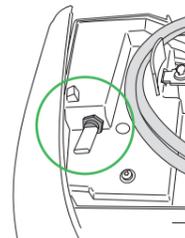

El conector USB se encuentra bajo la tapa del panel de control.

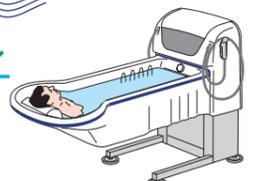


Utilice el mando de control para ajustar el sonido y la luz.

Unidad de desinfección (opcional)


Botón de encendido/apagado de la desinfección



El botón de encendido/apagado parpadea cuando la botella de desinfectante está vacía. (Solo P300)

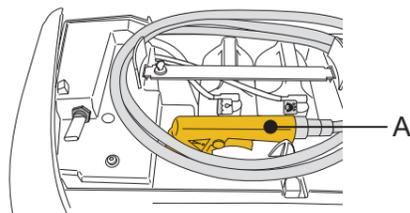

La unidad de desinfección se encuentra bajo la tapa del panel de control. Asa de rociado de desinfectante (A)

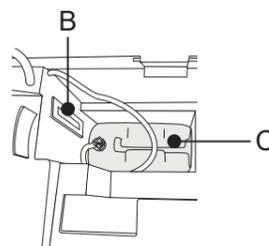

Caudalímetro (B). Botella de desinfectante (C) (bajo el champú/aceite de baño)



Determina la proporción de mezcla del desinfectante: Rocíe la bañera con desinfectante. Compruebe en el caudalímetro que la proporción de mezcla es correcta. Ajuste el mando de la manguera de succión si es necesario.