

# System 2000

## Riempimento automatico

Pulsante Riempimento automatico ON/OFF



P300


P220

Il riempimento si arresta automaticamente al livello d'acqua preimpostato.

Premere il pulsante di riempimento automatico per interromperlo in qualsiasi momento.

## Pulsante doccia e doccetta

Pulsante ON/OFF doccia

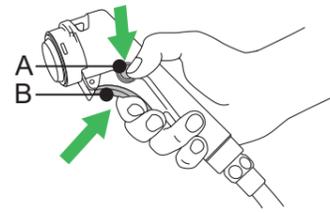

Il pulsante di blocco (A) blocca il flusso dell'acqua.

Il grilletto (B) regola e sblocca il flusso dell'acqua.

## Display P300



Non c'è acqua nella vasca. Nessuna funzione è attiva.



Temperatura dell'acqua per: riempimento attivo, doccia o vasca piena.

P300 ha tre livelli di Riempimento automatico. Il livello preimpostato è Normale.



Riempimento automatico livello normale



Riempimento automatico livello basso



Riempimento automatico livello alto

**Per cambiare livello:**

Premere (-) o (+) entro 8 secondi dall'avvio del riempimento automatico.

## Protezione antiscottature



**Se la protezione antiscottature viene attivata, spostare il paziente dalla vasca.**

Se viene raggiunto un livello di temperatura pericoloso di 45 °C (113 °F), la protezione antiscottature blocca l'acqua in meno di 10 secondi.

**P300**



Sul display appariranno quattro trattini e verrà emesso un bip.

Durante questo lasso di tempo il miscelatore si ricalibra automaticamente.

**P220**



Entrambi i LED lampeggiano e viene emesso un bip.


## Display P220



Temperatura dell'acqua per: riempimento attivo, doccia o vasca piena.

## Hydromassage o Hydrosound (opzionale)

Pulsante ON/OFF Hydromassage o Hydrosound

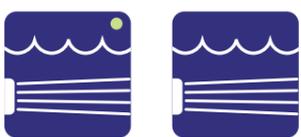

P300

P220

Regolazione livello intensità

Hydromassage




Hydrosound

P300 - 20

P220




## Sistema Sound & Vision (opzionale)

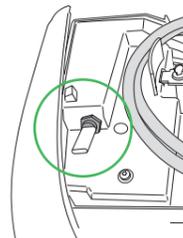

L'ingresso USB è ubicato sotto il coperchio del pannello di controllo.



Usare la pulsantiera di controllo per regolare il suono e la luce.

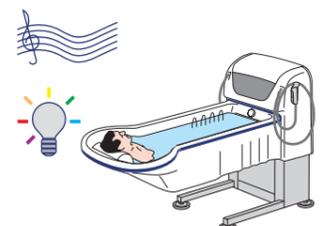


## Unità di disinfezione (opzionale)


Pulsante disinfezione ON/OFF



Il pulsante On/OFF lampeggia quando il flacone di disinfettante è vuoto. (Solo P300)

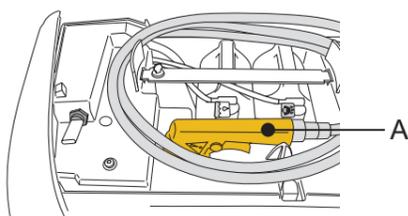

L'unità di disinfezione è ubicata sotto il coperchio del pannello di controllo. Doccetta di disinfezione (A)

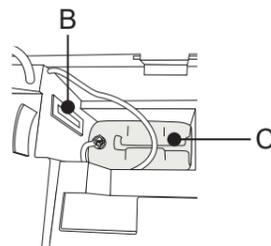

Flussometro (B)  
Flacone di disinfezione (C) (sotto lo shampoo/olio da bagno)



**Determinare il rapporto di miscelazione del disinfettante:**

Spruzzare il disinfettante nella vasca. Verificare che il rapporto di miscelazione sul flussometro sia corretto. Se necessario, regolare la manopola sul tubo di aspirazione.