

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

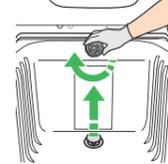
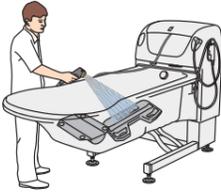


## Limpieza y desinfección:

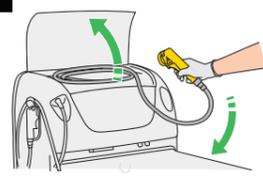
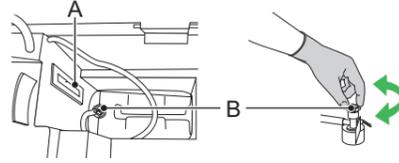
- con la unidad de desinfección (baño estático y sistema Hydrosound), página 1-2
- con un pulverizador (baño estático y sistema Hydrosound), página 3
- el sistema Hydromassage con desinfección automática, página 4
- el sistema Hydromassage sin desinfección automática, página 5

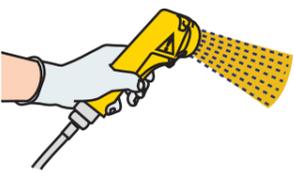
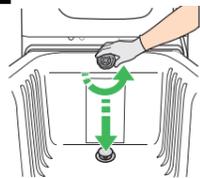
## Limpieza y desinfección con la unidad de desinfección (baño estático y sistema Hydrosound)

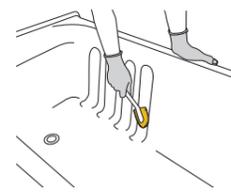
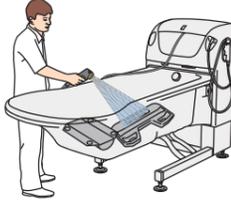
### Limpieza de los residuos visibles

<p><b>1</b></p>  <p>Compruebe el nivel de desinfectante.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Eleve la bañera hasta una posición de trabajo cómoda.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Abra el desagüe. Desacople y coloque todos los accesorios en la parte inferior de la bañera.</p>	<p><b>5</b></p>   <p>Enjuague la bañera y los accesorios con agua de la ducha para eliminar los residuos visibles. Dé la vuelta a los accesorios y vuelva a enjuagarlos.</p>
--	---	---	--	---

### Limpieza

<p><b>6</b></p>  <p>Lleve guantes y gafas protectoras.</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Extraiga el asa de rociado de desinfectante.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Pulse el botón de desinfección.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Rocíe desinfectante en la bañera hasta que el caudalímetro (A) muestre el valor de mezcla correcto de acuerdo con las instrucciones de uso. Ajuste si fuera necesario (B).</p>
---	---	---	---

<p><b>10</b></p> <p>°C (°F)</p> <p>Ajuste la temperatura del agua a aproximadamente 25 °C (77 °F) para eliminar los vapores del desinfectante.</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Rocíe el desagüe con desinfectante. Frote el desagüe con un cepillo.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Cierre el desagüe.</p>	<p><b>13</b></p>  <p>Rocíe el desinfectante en todas las superficies internas de la bañera y en todas las caras de los accesorios.</p>	<p><b>14</b></p>  <p>Rocíe la superficie del agujero de rebose.</p>
--	--	---	---	--

<p><b>15</b></p>  <p>Pulse el botón de desinfección para apagarlo.</p>	<p><b>16</b></p>  <p>Frote meticulosamente las superficies de la bañera, las piezas sueltas y los accesorios con un cepillo de cerdas blandas.</p>	<p><b>17</b></p>  <p>Abra el desagüe.</p>	<p><b>18</b></p>   <p>Aclare todos los elementos con abundante agua a una temperatura aproximada de 25 °C (77 °F).</p>
---	---	--	--

**19**



Empape un paño en desinfectante y páselo por las demás superficies de contacto: el exterior de la bañera, el mando de control y los mandos de los sensores metálicos.

**20**

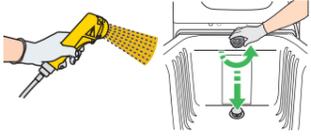


Moje otro paño limpio con agua y retire todo el desinfectante. Aclare el paño cada cierto tiempo con agua corriente.

Continúe con la sección «Desinfección del baño estático y sistema Hydrosound» en la página 2.

## Desinfección

21



Rocíe el desagüe con desinfectante. Cierre el desagüe.

22

Rocíe el desinfectante en todas las superficies internas de la bañera y en todas las caras de los accesorios.

Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario siguiendo las instrucciones del desinfectante.



23

Pulse el botón de desinfección para finalizar el ciclo de desinfección.



**Solo desinfección automática:**

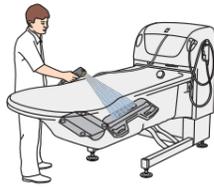
Si no ha transcurrido el tiempo de desinfección preajustado, se desactivan otras funciones durante 2-10 minutos, dependiendo del modelo.

24



Vuelva a colocar el asa de rociado de desinfectante en su sitio.

25



Abra el desagüe. Enjuague todas las piezas con agua a una temperatura de 25 °C (77 °C).

26

Empape un paño en desinfectante y páselo por las demás superficies de contacto: la parte exterior de la bañera, el mando de control y los mandos de los sensores metálicos.

Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del mismo.

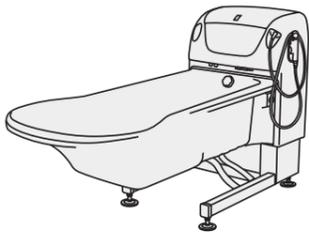


27

Moje otro paño limpio con agua y retire todo el desinfectante. Aclare el paño cada cierto tiempo con agua corriente.



28

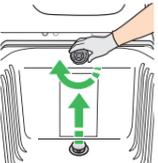


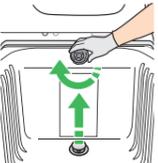
Deje secar al aire. Coloque los accesorios.

# Limpieza y desinfección con un pulverizador

## Limpieza de los residuos visibles

**1**  Eleve la bañera hasta una posición de trabajo cómoda.

**2**  Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.

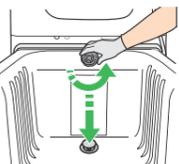
**3**  Abra el desagüe. Desacople y coloque todos los accesorios en la parte inferior de la bañera.

**4**   Enjuague la bañera y los accesorios con agua de la ducha para eliminar los residuos visibles. Dé la vuelta a los accesorios y vuelva a enjuagarlos.

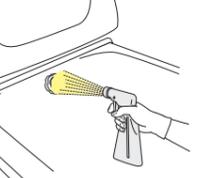
## Limpieza

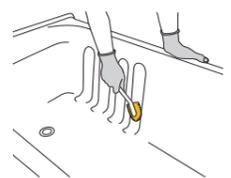
**5**  Lleve guantes y gafas protectoras.

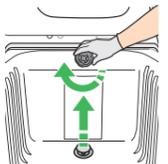
**6**  Rocíe el desagüe con desinfectante. Frote el desagüe con un cepillo.

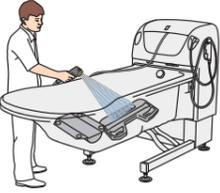
**7**  Cierre el desagüe.

**8**  Rocíe el desinfectante en todas las superficies internas de la bañera y en todas las caras de los accesorios.

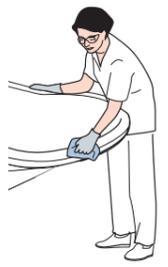
**9**  Rocíe la superficie del agujero de rebosé.

**10**  Frote meticulosamente las superficies de la bañera, las piezas sueltas y los accesorios con un cepillo de cerdas blandas.

**11**  Abra el desagüe.

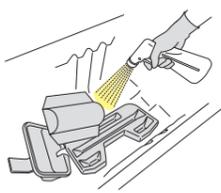
**12**   Enjuague todas las piezas con abundante agua a una temperatura de 25 °C (77 °C).

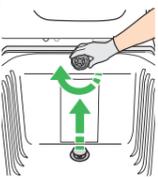
**13**  Empape un paño en desinfectante y páselo por las demás superficies de contacto: el exterior de la bañera, el mando de control y los mandos de los sensores metálicos.

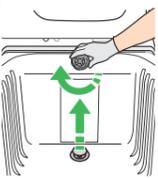
**14**  Moje otro paño limpio con agua y retire todo el desinfectante. Aclare el paño cada cierto tiempo con agua corriente.

## Desinfección

**15**  Rocíe el desagüe con desinfectante. Cierre el desagüe.

**16**  Rocíe el desinfectante en todas las superficies internas de la bañera y en todas las caras de los accesorios.

**17**  Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del mismo.

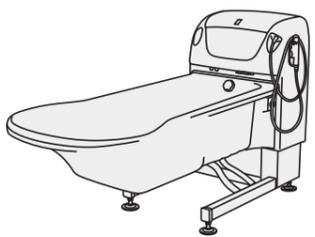
**18**  Abra el desagüe.

**19**   Enjuague todas las piezas con abundante agua a una temperatura de 25 °C (77 °C).

**20**  Empape un paño en desinfectante y páselo por las demás superficies de contacto: el exterior de la bañera, el mando de control y los mandos de los sensores metálicos.

**21**  Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del mismo.

**22**  Moje otro paño limpio con agua y retire todo el desinfectante. Aclare el paño cada cierto tiempo con agua corriente.

**23**  Deje secar al aire. Coloque los accesorios.

# Limpeza y desinfección del sistema Hydromassage con desinfección automática

**1**



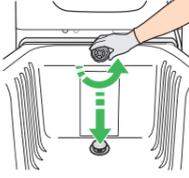
Compruebe el nivel de desinfectante.

**2**



Eleve la bañera hasta una posición de trabajo cómoda.

**3**



Cierre el desagüe.

**4**



Desatornille los tornillos y retire el filtro de la entrada de aspiración. Limpie el filtro de la entrada de aspiración por separado.

**5**



Pulse el botón de desinfección para iniciar el ciclo de desinfección.

**6**

El desinfectante saldrá por la boquilla del sistema Hydromassage.

El ciclo de desinfección terminará con un aclarado del sistema Hydromassage con agua.

**7**



Rocíe el interior del agujero de rebose de superficie con desinfectante.

**8**

Siga el resto de las instrucciones de desinfección indicadas en «*Limpeza y desinfección con la unidad de desinfección (baño estático y sistema Hydrosound)*», en las páginas 1 y 2 de esta QRG.

**9**

Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del mismo.

**10**



Pulse el botón de la ducha. Aclare también el agujero de rebose de superficie.

**11**

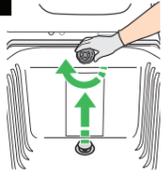
Cuando finalice la desinfección, coloque el filtro de la entrada de aspiración con los tornillos y apriételos con suavidad.



# Limpeza y desinfección del sistema Hydromassage sin desinfección automática

- 

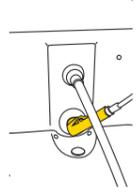
Compruebe el nivel de desinfectante.
- 

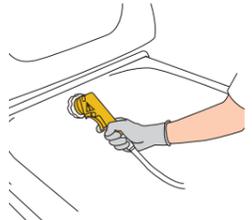
Eleve la bañera hasta una posición de trabajo cómoda.
- 

Abra el desagüe.
- 

Desatornille los tornillos y retire el filtro de la entrada de aspiración. Limpie el filtro de la entrada de aspiración por separado.
- 

Si va a conectar una manguera, extraiga la boquilla giratoria del sistema Hidromasaje..
- 

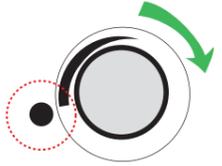
Inserte la manguera (en caso de haberla) en la salida del sistema Hidromasaje.
- 

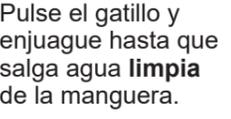
Pulverice desinfectante en el interior de la entrada de aspiración hasta que desborde por la manguera.
- 

Rocíe el interior del agujero de rebose de superficie con desinfectante.  
Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del mismo.
- 

Pulse el botón de desinfección para apagar la desinfección.
- 

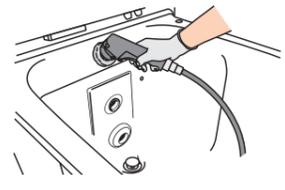
Pulse el botón de la ducha.
- 

Conecte el cabezal de ducha a la entrada de aspiración.
- 

Gire el mando del sistema Hydromassage hasta su máxima intensidad.
- 

Pulse el gatillo y enjuague hasta que salga agua **limpia** de la manguera.
- 

Retire la manguera (en caso de haberla).
- 

Vuelva a colocar la boquilla en la salida del sistema Hydromassage.
- 

Aclare también con agua el agujero de rebose de superficie.
- 

Quando finalice la desinfección, coloque el filtro de la entrada de aspiración con los tornillos y apriételos con suavidad.