

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

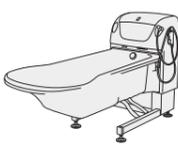
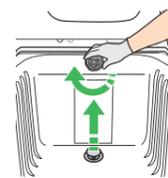


Pulizia e disinfezione:

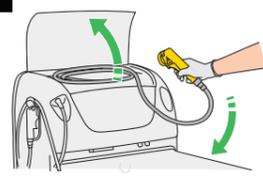
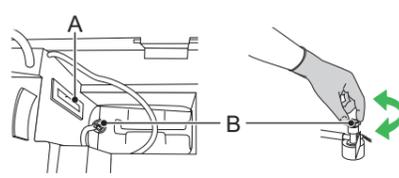
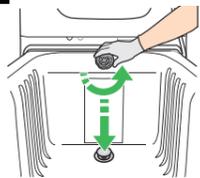
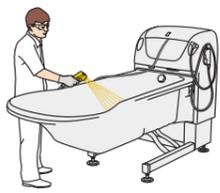
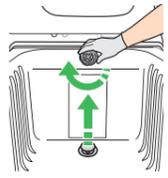
- con unità di disinfezione (versione base e sistema Hydrosound) pagina 1-2
- con un flacone spray (versione base e sistema Hydrosound), pagina 3
- sistema Hydromassage con disinfezione automatica, pagina 4
- sistema Hydromassage senza disinfezione automatica, pagina 5

Pulizia e disinfezione con unità di disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)

Rimuovere i residui visibili

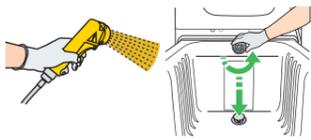
<p>1</p>  <p>Verificare il livello del disinfettante.</p>	<p>2</p>  <p>Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro adeguata.</p>	<p>3</p> <p>Accertarsi che tutte le funzioni siano spente.</p>	<p>4</p>  <p>Aprire lo scarico. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.</p>	<p>5</p>   <p>Risciacquare con acqua la vasca e gli accessori per rimuovere i residui visibili. Girare gli accessori e risciacquare nuovamente.</p>
--	---	---	---	---

Pulizia

<p>6</p>  <p>Indossare guanti e occhiali protettivi</p>	<p>7</p>  <p>Estrarre la doccetta di disinfezione.</p>	<p>8</p>  <p>Premere il pulsante di disinfezione.</p>	<p>9</p>  <p>Spruzzare il disinfettante nella vasca finché il flussometro (A) non mostra il corretto rapporto di miscelazione indicato dalle Istruzioni per l'uso. Regolare se necessario (B).</p>	
<p>10</p> <p>°C (°F)</p> <p>Regolare la temperatura dell'acqua a circa 25 °C (77 °F) per eliminare i vapori del disinfettante.</p>	<p>11</p>  <p>Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.</p>	<p>12</p>  <p>Chiudere lo scarico.</p>	<p>13</p>  <p>Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.</p>	<p>14</p>  <p>Pulire anche lo scarico di troppo pieno.</p>
<p>15</p>  <p>Premere il pulsante di disinfezione per spegnerlo.</p>	<p>16</p>  <p>Strofinare con cura le superfici della vasca, le parti non fissate e gli accessori con una spazzola a setole morbide.</p>	<p>17</p>  <p>Aprire lo scarico.</p>	<p>18</p>   <p>Sciogliere tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di circa 25 °C (77 °F).</p>	
<p>19</p> <p>Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le altre superfici di contatto: l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e le manopole con sensore metallico.</p> 	<p>20</p> <p>Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.</p> 	<p>Continuare con la disinfezione per <i>la versione base e il sistema Hydrosound a pagina 2.</i></p>		

Disinfezione

21



Spruzzare il disinfettante nello scarico. Chiudere lo scarico.

22

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.

Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.



23

Premere il pulsante di disinfezione per interrompere il ciclo di disinfezione.



Solo disinfezione automatica:

Se il tempo di disinfezione preimpostato non è trascorso, le altre funzioni vengono disattivate per 2-10 minuti a seconda del modello.

24



Rimettere a posto la doccetta di disinfezione.

25



Aprire lo scarico. Sciacquare tutte le parti con acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

26

Immergere un panno nel disinfettante e pulire tutte le altre superfici di contatto: l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e le manopole con sensore metallico.

Attendere un tempo di contatto adeguato, attenendosi alle istruzioni d'uso del disinfettante.

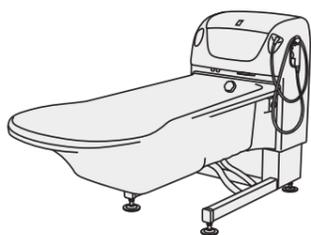


27

Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.



28



Lasciare asciugare all'aria. Fissare eventuali accessori rimossi.

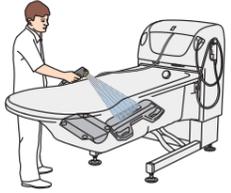
Pulire e disinfettare con un flacone spray

Rimuovere i residui visibili

1  Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro adeguata. 

2 Accertarsi che tutte le funzioni siano spente.

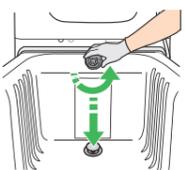
3  Aprire lo scarico. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.

4   Risciacquare con acqua la vasca e gli accessori per rimuovere i residui visibili. Girare gli accessori e risciacquare nuovamente.

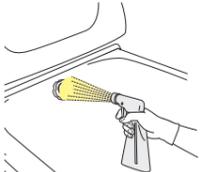
Pulizia

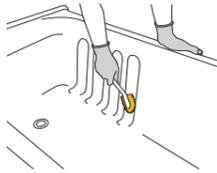
5  Indossare guanti e occhiali protettivi.

6  Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.

7  Chiudere lo scarico.

8  Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.

9  Pulire anche lo scarico di troppo pieno.

10  Strofinare con cura le superfici della vasca, le parti non fissate e gli accessori con una spazzola a setole morbide.

11  Aprire lo scarico.

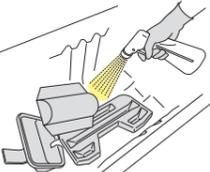
12   Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

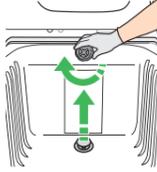
13  Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le altre superfici di contatto: l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e le manopole con sensore metallico.

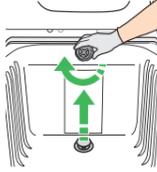
14  Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

Disinfezione

15  Spruzzare il disinfettante nello scarico. Chiudere lo scarico.

16  Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.

17  Attendere un tempo di contatto adeguato, attenendosi alle istruzioni d'uso del disinfettante.

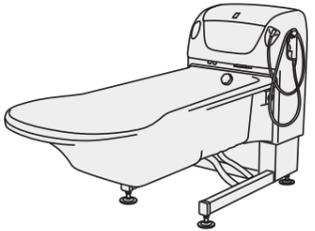
18  Aprire lo scarico.

19   Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

20  Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le altre superfici di contatto: l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e le manopole con sensore metallico.

21  Attendere un tempo di contatto adeguato, attenendosi alle istruzioni d'uso del disinfettante.

22  Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

23  Lasciare asciugare all'aria. Fissare eventuali accessori rimossi.

Pulizia e disinfezione del sistema Hydromassage con disinfezione automatica

1



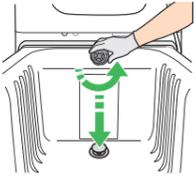
Verificare il livello del disinfettante.

2



Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro adeguata.

3



Chiudere lo scarico.

4



Svitare le viti e rimuovere il filtro della presa di aspirazione. Pulire il filtro della presa separatamente.

5



Premere il pulsante di disinfezione per avviare il ciclo di disinfezione.

6

Il disinfettante fuoriuscirà dalla bocchetta del sistema Hydromassage.

Il ciclo di disinfezione terminerà dopo il risciacquo con acqua del sistema Hydromassage.

7



Spruzzare il disinfettante anche sullo scarico di troppo pieno.

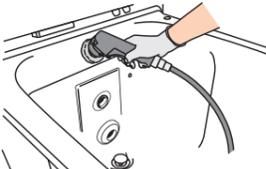
8

Proseguire con le restanti istruzioni di disinfezione specificate in *Pulizia e disinfezione, delle unità con disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)* a pagina 1 e 2 della presente Guida rapida (QRG).

9

Attendere un tempo di contatto adeguato, attenendosi alle istruzioni d'uso del disinfettante.

10



Premere il pulsante per doccia. Risciacquare lo scarico di troppo pieno.

11

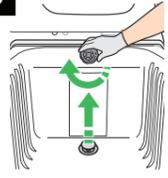
Quando la disinfezione è terminata, montare il filtro della presa di aspirazione avvitando le viti e stringendole delicatamente.



Pulizia e disinfezione del sistema Hydromassage senza disinfezione automatica

- 

Verificare il livello del disinfettante.
- 

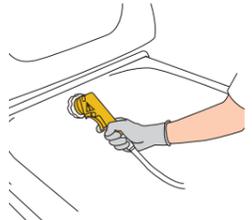
Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro adeguata.
- 

Aprire lo scarico.
- 

Svitare le viti e rimuovere il filtro della presa di aspirazione. Pulire il filtro della presa separatamente.
- 

Se si intende collegare un tubo, estrarre l'ugello del sistema Hydromassage.
- 

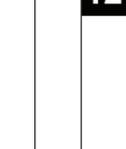
Inserire il tubo, se presente, nella bocchetta del sistema Hydromassage.
- 

Spruzzare il disinfettante nella presa di aspirazione, finché non fuoriesce dal tubo.
- 

Spruzzare il disinfettante anche sullo scarico di troppo pieno.

Attendere un tempo di contatto adeguato, attenendosi alle istruzioni d'uso del disinfettante.
- 

Premere il pulsante di disinfezione per spegnere la disinfezione.
- 

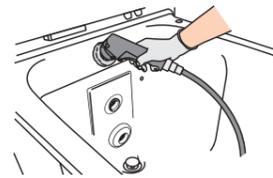
Premere il pulsante per doccia.
- 

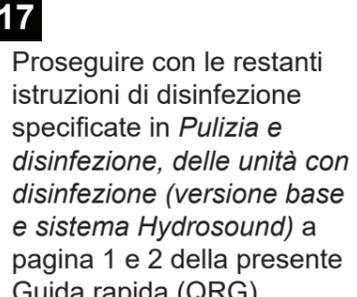
Collegare la doccia all'ingresso di aspirazione.
- 

Ruotare la manopola del sistema Hydromassage alla massima intensità.
- 

Premere il grilletto e risciacquare, finché l'acqua non esce **limpida** dal tubo.
- 

Rimuovere il tubo, se presente.
- 

Reinserire l'ugello nella bocchetta del sistema Hydromassage.
- 

Risciacquare lo scarico di troppo pieno con acqua.
- 

Proseguire con le restanti istruzioni di disinfezione specificate in *Pulizia e disinfezione, delle unità con disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)* a pagina 1 e 2 della presente Guida rapida (QRG).
- 

Quando la disinfezione è terminata, montare il filtro della presa di aspirazione avvitando le viti e stringendole delicatamente.