

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



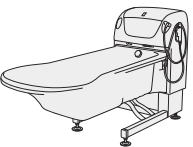
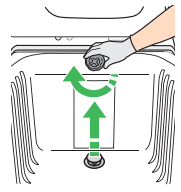

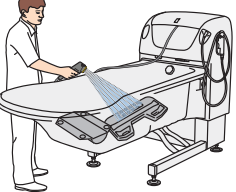


Rengjør/desinfiser:

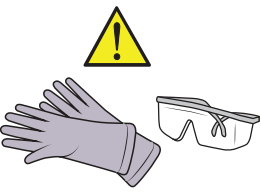
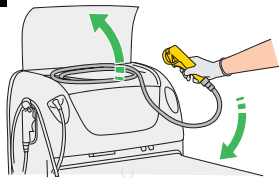

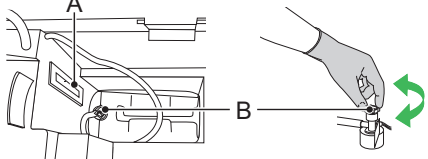
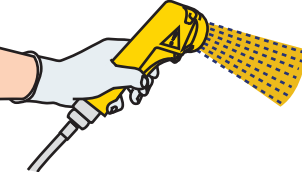
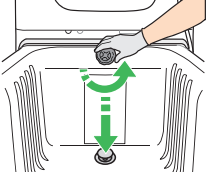

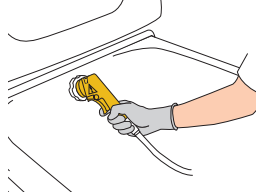

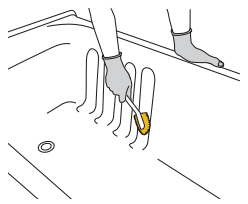
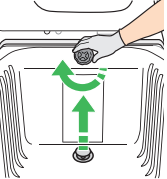

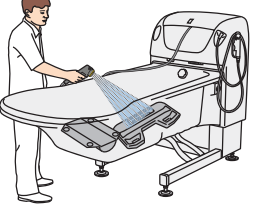

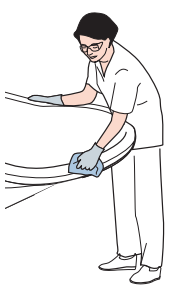
- med desinfeksjonsenhet (vanlig bad og Hydrosound-system) side 1-2
- med en sprayflaske (vanlig bad og Hydrosound-system), side 3
- Hydromassasje-systemet med automatisk desinfisering, side 4
- Hydromassasje-systemet uten automatisk desinfisering, side 5

Rengjøre og desinfisere med desinfeksjonsenhet (vanlig bad og Hydrosound-system)

Fjern synlige rester


<p>1</p>  <p>Kontroller nivået av desinfeksjonsmiddel.</p>	<p>2</p>   <p>Hev badekaret til en praktisk arbeidsstilling.</p>	<p>3</p> <p>Påse at alle funksjoner er slått av.</p>	<p>4</p>  <p>Åpne avløpet. Løsne alt tilbehøret og legg det i bunnen av badekaret.</p>	<p>5</p>   <p>Dusj og skyll badekaret og tilbehøret med vann for å fjerne synlige rester. Snu tilbehøret, og skyll på nytt.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rengjør

<p>6</p>  <p>Ta på hansker og vernebriller.</p>	<p>7</p>  <p>Løft ut sprayhåndtaket for desinfisering.</p>	<p>8</p>  <p>Trykk på desinfeksjonsknappen.</p>	<p>9</p>  <p>Spray desinfeksjonsmiddel inn i badekaret til strømningsmåleren (A) viser riktig blande verdi i henhold til bruksanvisningen. Juster etter behov (B).</p>	
<p>10</p> <p>°C (°F)</p> <p>Juster vanntemperaturen til ca. 25 °C (77 °F) for å fjerne desinfeksjonsgasser.</p>	<p>11</p>  <p>Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Skrubb sluket med en børste.</p>	<p>12</p>  <p>Lukk avløpet.</p>	<p>13</p>  <p>Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater i badekaret og på alle sider av tilbehøret.</p>	<p>14</p>  <p>Spray inn i overflaten på overløpsåpningen.</p>
<p>15</p>  <p>Trykk på desinfeksjonsknappen for å slå den av.</p>	<p>16</p>  <p>Skrubb overflatene i badekaret, løse deler og tilbehøret grundig med en børste med myk bust.</p>	<p>17</p>  <p>Åpne avløpet.</p>	<p>18</p>   <p>Skyll alle delene med rikelig mengde vann med en temperatur på 25 °C (77 °F).</p>	
<p>19</p> <p>Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle andre kontaktområder: utsiden av badekaret, håndkontrollen og metallsensorbryterne.</p> 	<p>20</p> <p>Fukt en ny klut med vann og fjern desinfeksjonsmiddelet. Skyll kluten med rennende vann av og til.</p> 	<p>Fortsett med desinfisering for vanlig bad og Hydrosound-system på side 2.</p>		

Desinfisering

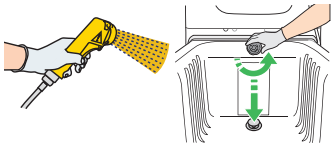21




Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Lukk avløpet.

22

Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater i badekaret og på alle sider av tilbehøret.

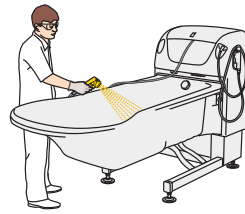La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.



23

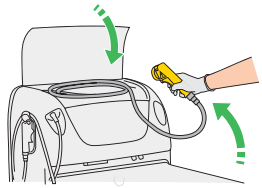
Trykk på desinfeksjonsknappen for å avslutte desinfiseringen.



Bare automatisk desinfisering:


Hvis den forhåndsinnstilte tiden for desinfisering ikke er utløpt, er andre funksjoner deaktivert i 2-10 minutter, avhengig av modellen.

24



Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon på plass igjen.

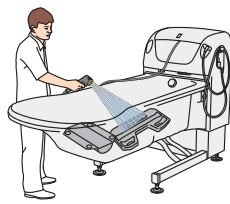
25



Åpne avløpet. Skyll alle delene med vann med en temperatur på 25 °C (77 °F).

26

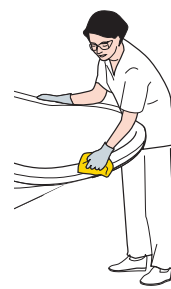Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle andre kontaktområder: utsiden av badekaret, håndkontrollen og metallsensorbryterne. La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.




27

Fukt en ny klut med vann og fjern desinfeksjonsmiddelet. Skyll kluten med rennende vann av og til.



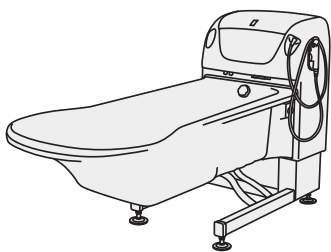28



La lufttørke. Fest eventuelt tilbehør.

Rengjøre og desinfisere med sprayflaske

Fjern synlige rester

1



Hev badekaret til en praktisk arbeidsstilling.

2

Påse at alle funksjoner er slått av.

3



Åpne avløpet.
Løsne alt tilbehøret og legg det i bunnen av badekaret.

4



Dusj og skyll badekaret og tilbehøret med vann for å fjerne synlige rester. Snu tilbehøret, og skyll på nytt.

Rengjør

5



Ta på hansker og vernebriller.

6



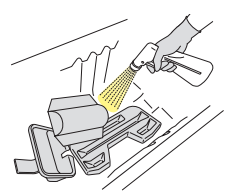
Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Skrubb sluket med en børste.

7



Lukk avløpet.

8



Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater i badekaret og på alle sider av tilbehøret.

9



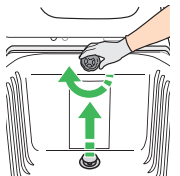
Spray inn i overflaten på overløpsåpningen.

10





Skrubb overflatene i badekaret, løse deler og tilbehøret grundig med en børste med myk bust.

11



Åpne avløpet.

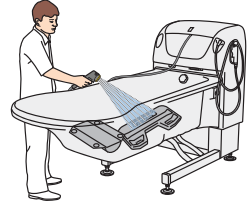
12



Skyll alle delene med rikelig vann med en temperatur på 25 °C (77 °F).

13

Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle andre kontaktområder: utsiden av badekaret, håndkontrollen og metallsensorbryterne.



14

Fukt en ny klut med vann og fjern desinfeksjonsmiddelet. Skyll kluten med rennende vann av og til.



Desinfisering

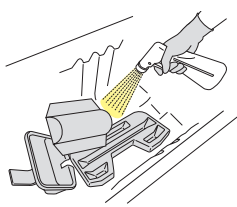
15



Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Lukk avløpet.

16

Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater i badekaret og på alle sider av tilbehøret.



17

La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.

18



Åpne avløpet.


19



Skyll alle delene med rikelig vann med en temperatur på 25 °C (77 °F).

20

Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle andre kontaktområder: utsiden av badekaret, håndkontrollen og metallsensorbryterne.

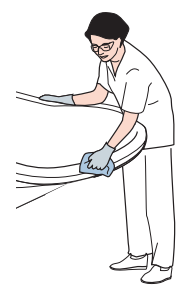


21


La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.

22

Fukt en ny klut med vann og fjern desinfeksjonsmiddelet. Skyll kluten med rennende vann av og til.



23

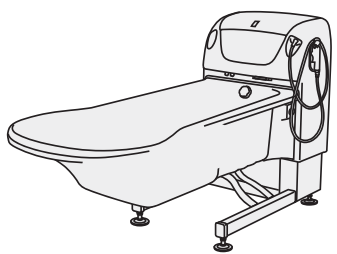

La lufttørke. Fest eventuelt tilbehør.

Rengjør og desinfiser Hydromassasje-systemet med automatisk desinfeksjon

1



Kontroller nivået av desinfeksjonsmiddel.

2



Hev badekaret til en praktisk arbeidsstilling.

3



Lukk avløpet.

4



Løsne skruene og fjern innsugingssilen. Rengjør innsugingssilen separat.

5



Trykk på desinfiseringsknappen for å starte desinfiseringscyklusen.

6

Desinfeksjonsmiddel kommer ut av dysen i Hydromassasje-systemet.

Desinfeksjonssyklusen avsluttes med at Hydromassage-systemet skylles med vann.

7



Spray desinfeksjonsmiddel inn i overløpsåpningen.

8

Fortsett å følge resten av desinfiseringsinstruksene i henhold til *Rengjøre og desinfisere med desinfiseringsenheten (vanlig bad og Hydrosound-system)*, på side 1 og 2 i denne hurtigveiledningen.

9

La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.

10



Trykk på dusjknappen. Skyll overløpsåpningen med vann.

11

Når desinfiseringen er fullført, fester du innsugingssilen med skruene og strammer dem forsiktig.



Rengjør og desinfiser Hydromassasje-systemet uten automatisk desinfisering

1



Kontroller nivået av desinfeksjonsmiddel.

2



Hev badekaret til en praktisk arbeidsstilling.

3



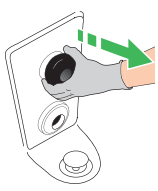
Åpne avløpet.

4



Løsne skruene og fjern innsugingssilen. Rengjør innsugingssilen separat.

5




Trekk ut dysen i Hydromassage-systemet hvis en slange skal kobles til.

6



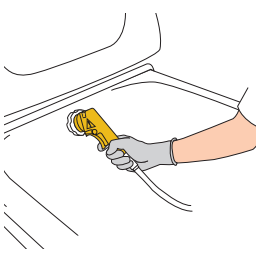
Sett en eventuell slange i uttaket på Hydromassage-systemet.

7



Spray desinfeksjonsmiddel inn i innsugingsinntaket til det kommer desinfeksjonsmiddel ut av slangen.

8



Spray desinfeksjonsmiddel inn i overløpsåpningen. La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.

9



Trykk på desinfeksjonsknappen for å slå av desinfiseringen.

10



Trykk på dusjknappen.

11

Koble dusjhåndtaket til innsugingsinntaket.

12



Drei Hydromassasje-systemknotten til høyeste intensitet.

13

Trykk på utløseren og skyll til vannet er **klart** når det kommer ut av slangen.

14



Fjern eventuelt slangen.

15



Sett dysen tilbake i Hydromassage-systemuttaket.

16

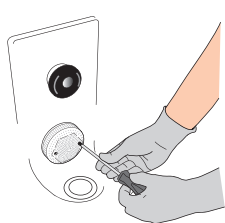


Skyll overløpsåpningen med vann.

17

Fortsett å følge resten av desinfiseringsinstruksene i henhold til *Rengjøre og desinfisere med desinfiseringsenheten (vanlig bad og Hydrosound-system)*, på side 1 og 2 i denne hurtigveiledningen.

18



Når desinfiseringen er fullført, fester du innsugingssilen med skruene og strammer dem forsiktig.