

Flowtron ACS900


Controle therapiegebruik

Controle therapiegebruik: registreert en toont zowel de daadwerkelijke therapietijd als de tijd dat de therapie niet werd gevolgd. Waarschuwt bij verwijdering van de manchet om het volgen en documenteren van IPC-therapie te vereenvoudigen.

Controle therapiegebruik in-/uitschakelen


1. Controle therapiegebruik configureren:

- Verzekert u ervan dat er geen manchetten op de pomp zijn aangesloten.
- Houd de middelste bedieningsknop ingedrukt om naar het instelscherm te gaan.

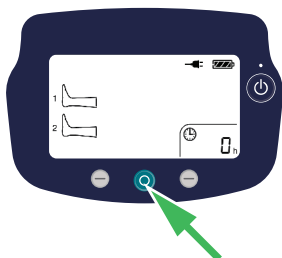


2. Druk op de linker bedieningsknop om door de opties te bladeren:

- AAN met akoestisch alarm ingeschakeld
- AAN met akoestisch alarm uitgeschakeld
- UIT (de gebruiksuren van de pomp worden weergegeven in plaats van de totale therapietijd)

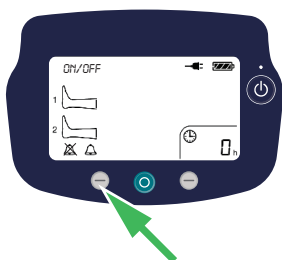

3. Druk op de middelste bedieningsknop om de weergegeven optie te selecteren.

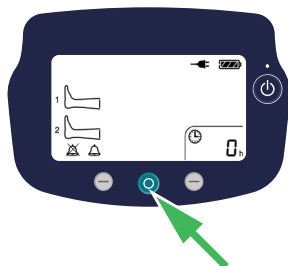


Controle therapiegebruik resetten (totale therapietijd)


1. Als de pomp in de stand-bystand staat, houdt u de rechter bedieningsknop 2 seconden ingedrukt. De tijd knippert gedurende 2 minuten. Houd de middelste bedieningsknop 3 seconden ingedrukt om de timer weer op nul te zetten.
2. Druk opnieuw op de rechter bedieningsknop om te bevestigen. Als er binnen twee minuten niet op deze knop wordt gedrukt, wordt de timer NIET gereset en keert u terug naar de weergave van de oorspronkelijke gegevens.

Therapie starten


1. Breng de manchet aan bij de zorgvrager.

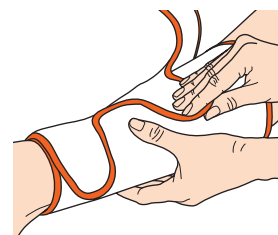

2. Sluit de manchet aan op de pomp.

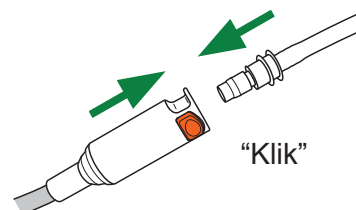


3. Druk op de middelste bedieningsknop om de therapie te starten.

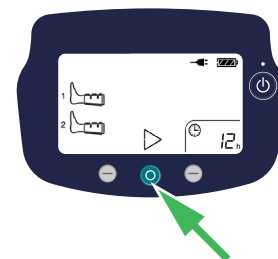


Het display aflezen

1. Tijdens gebruik bewaakt de ACS900 elke opblaasactie om er zeker van te zijn dat er profylaxe aan de patiënt wordt toegediend. De totale therapietijd wordt rechtsonder weergegeven.

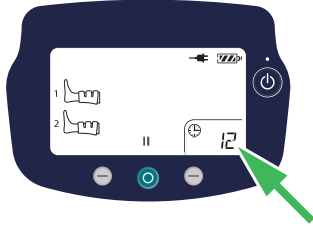

2. Als de pomp detecteert dat een manchet van de ledemaat is verwijderd, terwijl de pomp in de aanstand staat, knippert het bijbehorende beenpictogram.

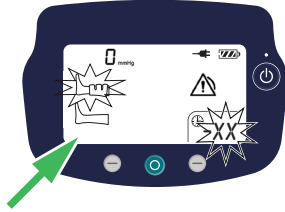


Zorgverleners worden gewaarschuwd dat er geen profylaxe wordt toegediend.

De volgorde van meldingen:

- Het beenpictogram begint te knipperen en het scherm toont de tijd dat de therapie niet werd gevolgd.
- Na 3 cycli verschijnt de waarschuwingsdriehoek op het scherm en begint de groene led te knipperen.
- Na 10 minuten wordt de knipperende groene led constant geel met (optioneel) een akoestisch alarm.


Bovendien zal de pomp tellen en weergeven hoelang de therapie niet werd gevolgd. Dat wordt in eerste instantie weergegeven in de vorm van knipperende minuten.

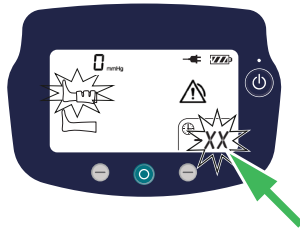

3. Wanneer de therapie 1 uur lang niet werd gevolgd, toont het display de tijd in de vorm van knipperende uren.




4. Druk op de rechter bedieningsknop om te zien hoeveel minuten er na het aangegeven aantal uren zijn verstreken; er wordt een “-” weergegeven vóór de minuten op het display.

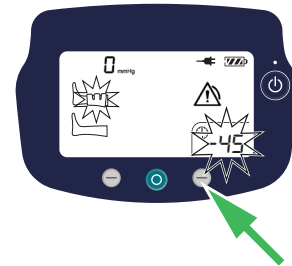


Waarschuwing/alarm opheffen

1. Om de waarschuwing voor de controle therapiegebruik op te heffen, brengt u alle verwijderde manchetten weer aan op de ledemaat.

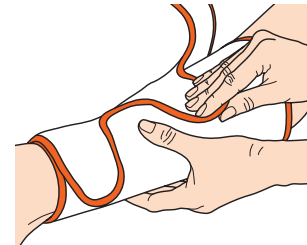

2. De tijd dat de therapie niet werd gevolgd, wordt automatisch gewist wanneer de pomp detecteert dat de manchet opnieuw op de ledemaat is aangebracht. De pomp keert terug naar de weergave van de totale therapietijd en blijft tellen vanaf het punt waar hij was gestopt.

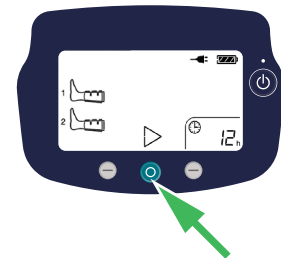

3. U kunt de pomp ook pauzeren en vervolgens weer starten.