

Flowtron ACS900




Monitoramento de conformidade


Monitoramento de conformidade; registra e exibe a terapia real, bem como o tempo não conforme. Alertas sobre a remoção da perneira para facilitar o rastreamento e a documentação da terapia IPC.

Habilitar/Desabilitar o Monitoramento de Conformidade

1. Configurar o monitoramento de conformidade:
 - Certifique-se de que nenhuma perneira esteja conectada à bomba.
 - Aperte e mantenha pressionado o botão de controle do meio para acessar a tela de configuração.

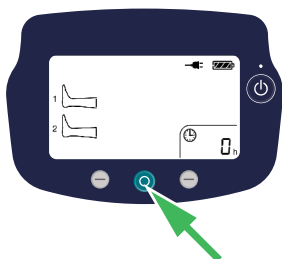

2. Pressione o botão de controle esquerdo para alternar entre as opções:
 - LIGADO com alerta sonoro ativado
 - LIGADO com alerta sonoro desativado
 - DESLIGADO (O tempo de operação da bomba é exibido em vez do tempo acumulado da terapia)

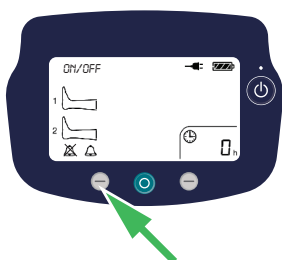

3. Pressione o botão de controle do meio para selecionar a opção exibida.




Redefinir o monitoramento de conformidade (tempo de terapia acumulado)


1. Quando a bomba estiver no modo Em espera, aperte e mantenha pressionado o botão de controle direito durante 2 segundos. O tempo pisca durante 2 minutos. Aperte e mantenha pressionado o botão de controle do meio durante 3 segundos para redefinir a hora para zero.
2. Pressione novamente o botão de controle direito para confirmar. Se este botão não for pressionado dentro de dois minutos, o temporizador NÃO será redefinido e voltará a mostrar os dados originais.

Iniciar terapia


1. Aplique a perneira ao paciente.

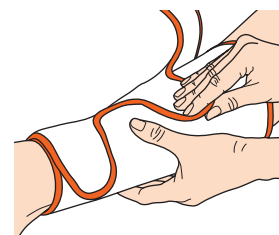

2. Conecte a perneira à bomba.

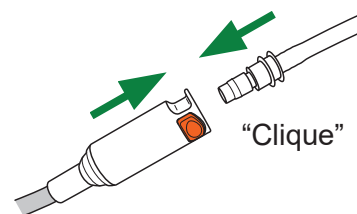


3. Pressione o botão de controle do meio para iniciar a terapia.

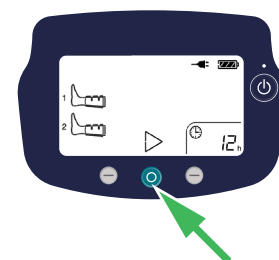


Ler o display

1. Durante o uso, o ACS900 monitora cada inflação para garantir que está fornecendo profilaxia ao paciente. O tempo acumulado da terapia é exibido no canto inferior direito.

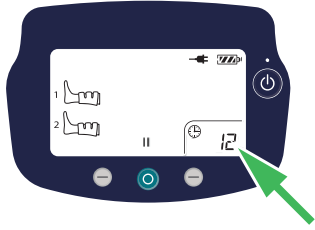

2. Se a bomba detectar que uma perneira foi removida do membro, enquanto a bomba estiver em modo de execução, o gráfico de membro correspondente piscará.

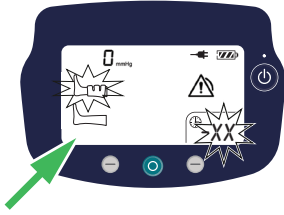


Os cuidadores são alertados de que nenhuma profilaxia está sendo fornecida.

A sequência de notificações:

- O ícone de perna começa a piscar e o tempo de não conformidade aparece na tela.
- Após 3 ciclos, o triângulo de advertência aparece na tela e o LED verde começa a piscar.
- Após 10 minutos, o LED verde piscando muda para amarelo contínuo com um alarme sonoro opcional.


Além disso, a bomba contará e exibirá há quanto tempo a terapia não ocorre (tempo não conforme). Isso é exibido inicialmente em minutos piscando.

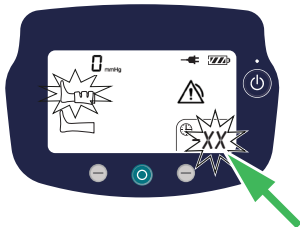

3. Após 1 hora de não conformidade monitorada, a tela muda para mostrar o tempo em horas piscando.




4. Pressione o botão de controle direito para ver os minutos adicionais da hora; um "-" é exibido antes dos minutos no visor.

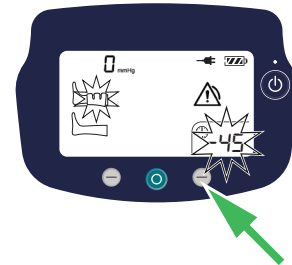


Retificar aviso/alerta

1. Para apagar o aviso/alerta de Monitoramento de Conformidade, recoloque qualquer perneira removida no membro.

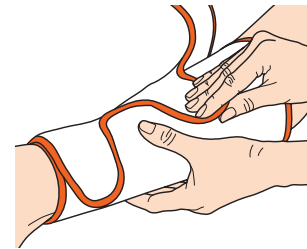

2. O tempo de não conformidade é automaticamente removido quando a bomba detecta que a perneira foi reaplicada no membro. A bomba volta a mostrar o tempo acumulado da terapia e continua contando de onde parou.

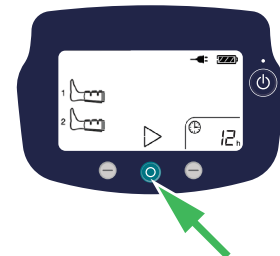

3. Como alternativa, faça uma pausa e, em seguida, reinicie a bomba.