


# Flowtron ACS900

## Контроль соблюдения условий терапии


Контроль соблюдения условий терапии: регистрирует и отображает фактическое время сеанса терапии, а также время, когда условия терапии не соблюдены. При снятии манжеты подается сигнал, облегчающий отслеживание и документирование терапии ППК.

### Включение/выключение контроля соблюдения условий терапии


1. Настройка контроля соблюдения условий терапии:
  - Убедитесь в том, что к насосу не подсоединены манжеты.
  - Нажмите и удерживайте центральную кнопку управления для доступа к экрану настройки.

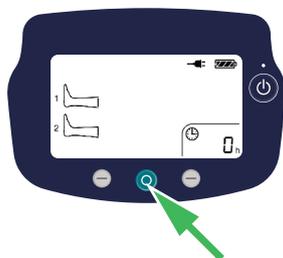

2. Нажимайте левую кнопку, чтобы выбрать вариант настройки:
  - ВКЛ с звуковым сигналом
  - ВКЛ без звукового сигнала
  - ВЫКЛ (отображается время работы насоса в часах вместо суммарного времени лечения)

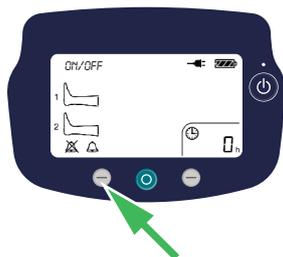

3. Нажмите центральную кнопку управления, чтобы выбрать показанный вариант настройки.

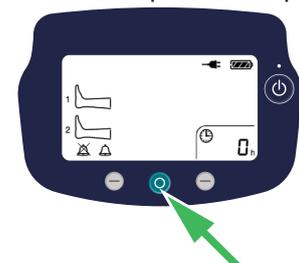


### Сбросьте контроль соблюдения условий терапии (суммарное время лечения)


1. При нахождении насоса в режиме ожидания нажмите и удерживайте правую кнопку управления в течение 2 с. Время мигает в течение 2 минут. Нажмите и удерживайте центральную кнопку управления в течение 3 с для сброса значения времени к нулю.
2. Для подтверждения снова нажмите правую кнопку управления. Если эта кнопка не будет нажата в течение двух минут, счетчик НЕ сбросится и вернется к отображению исходных данных.

### Запуск терапии


1. Наденьте манжету на пациента.

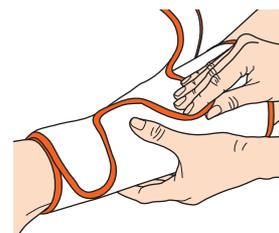

2. Присоедините манжету к насосу.

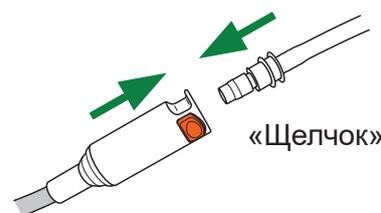


3. Нажмите центральную кнопку для запуска сеанса терапии.

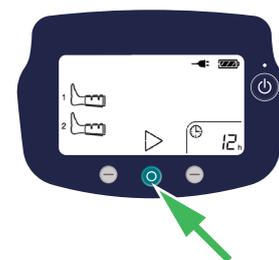


## Считывание показаний на экране

1. Во время работы ACS900 контролирует надувание манжеты, проверяя осуществление профилактической процедуры для пациента. Суммарное время лечения отображается в правом нижнем углу.

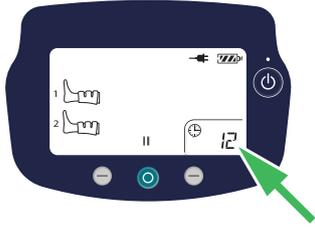

2. Если насос обнаруживает, что манжета снята с конечности во время работы насоса, изображение соответствующей конечности начнет мигать.

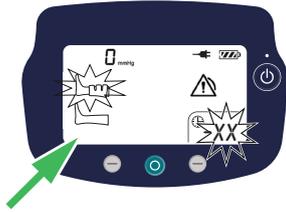


Лица, осуществляющие уход, получают предупреждение о том, что профилактическая процедура не выполняется.

Последовательность уведомлений:

- Значок с изображением ноги начнет мигать, и на экране начнется отсчет времени, если условия терапии не соблюдены.
- Через 3 цикла на экране появится предупреждающий треугольник, и начнет мигать зеленый светодиод.
- Через 10 минут мигающий зеленый светодиод начнет постоянно гореть желтым светом, и будет слышен звуковой сигнал, если он активирован.


Кроме того, насос будет подсчитывать и отображать время, в течение которого терапия не проводилась (время, когда условия терапии не соблюдены). Сначала оно отображается мигающими минутами.

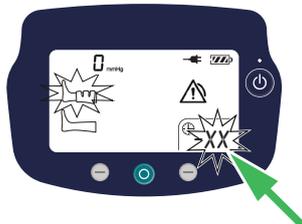

3. Через 1 час отслеживания экран переключается на отображение времени в мигающих часах.




4. Нажмите правую кнопку управления, чтобы дополнительно отобразить минуты до часа; перед минутами на экране появится «-».

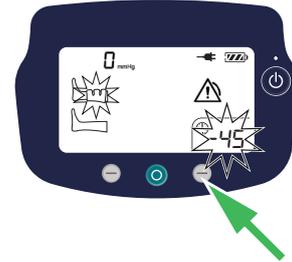


## Сбросить предупреждение/оповещение

1. Чтобы сбросить предупреждение/оповещение контроля соблюдения требований, наденьте на конечность снятые манжеты.

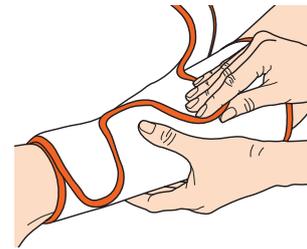

2. Время несоблюдения автоматически сбрасывается, когда насос обнаруживает, что манжета повторно надета на конечность. Насос возвращается к отображению суммарного времени лечения и продолжает отсчет с момента остановки.

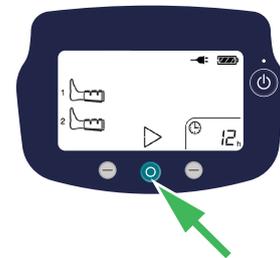

3. В качестве альтернативы можно остановить и перезапустить насос.