



FD1800, FD1805

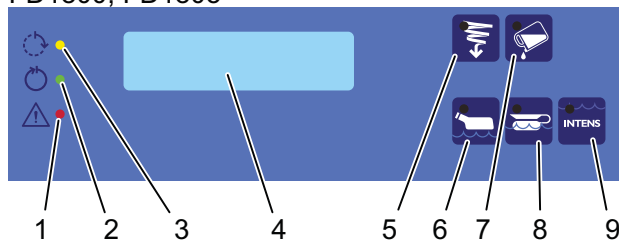

FD1810

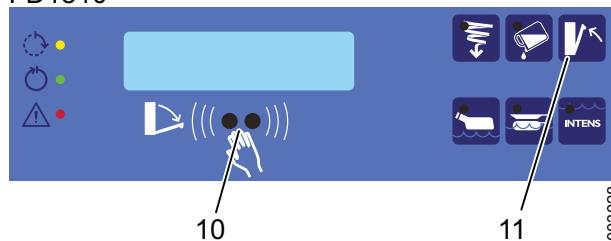

	Fonction
1	Rouge : indication d'erreurs. Un message d'erreur s'affiche.
2	Vert : Le programme est terminé. Le témoin s'éteint lorsque la porte est ouverte et, pendant un bref instant, un résumé de programme s'affiche à l'écran, indiquant par exemple, la température maximale.
3	Témoin jaune clignotant : il est possible de mettre fin au programme. Jaune : un programme est en cours. L'écran affiche l'état en cours, indiquant par exemple, la phase de nettoyage et la température.
4	Écran. Un technicien peut modifier les informations à afficher à l'écran.
5	Bouton permettant de sélectionner le pré-lavage.
6	Bouton permettant de sélectionner le programme économique pour les objets légèrement souillés.
7	Bouton permettant de sélectionner le détergent (option).
8	Bouton permettant de sélectionner le programme normal pour les objets normalement souillés.
9	Bouton permettant de sélectionner le programme intensif pour des objets très sales.
10	Capteur infrarouge pour ouvrir/fermer la porte et pour démarrer le programme présélectionné (option).
11	Bouton pour l'ouverture/la fermeture de la porte (option).

Brésilien	Description	Mesure
U1	Anticalcaire, niveau faible	Ajoutez de l'anticalcaire.
U2	Produit de traitement, niveau faible	Ajoutez du produit de procédé (option).
U3	Produit de rinçage, niveau faible	Ajoutez du produit de rinçage (option).
U6	Demande d'inspection	Contactez un technicien agréé.
U7	Avertissement : température élevée des objets	Laissez-les refroidir.
U8	Communication externe	Connexion externe interrompue.
U9	Avertissement d'inactivité	L'appareil a été inactif pendant 72 heures. Lancez un programme avec la cuve à vide avant d'utiliser l'appareil pour laver des objets.
H1	Détartrant, épuisé	Ajoutez de l'anticalcaire.
H3	Absence d'agent de rinçage	Ajoutez de l'agent de rinçage.
H6	Tentative de démarrage avec la porte ouverte	Fermez la porte (l'appareil tente de redémarrer). Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien agréé.
H7	Niveau de batterie bas	Contactez un technicien agréé.

Pour les codes d'erreur de type F, reportez-vous au mode d'emploi.