



FD1800, FD1805

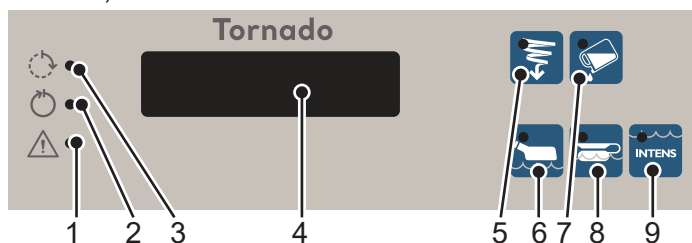

FD1810

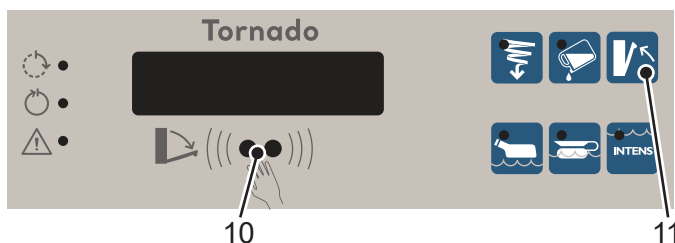

FUNKCE

1	Červená: Signalizace poruchy. Na displeji se zobrazí chybové hlášení.
2	Zelená: Program je dokončen. Po otevření dvířek kontrolka zhasne a na displeji se krátce zobrazí stručné informace o programu, jako např. údaje o maximální teplotě.
3	Žlutá blikající kontrolka: Program může být ukončen. Žlutá: Program probíhá. Displej zobrazuje aktuální stav, jako např. fázi čištění a teplotu.
4	Displej. Servisní technik může zadat informace, které se zobrazí na displeji.
5	Tlačítko pro volbu splachování.
6	Tlačítko pro volbu ekonomického programu pro lehce znečištěné předměty.
7	Tlačítko pro volbu čistícího prostředku (volitelné).
8	Tlačítko pro volbu základního programu pro běžně znečištěné předměty.
9	Tlačítko pro volbu intenzivního programu pro silně znečištěné předměty.
10	IR senzor sloužící k otevření nebo zavření dvířek a ke spuštění vybraného programu (volitelné).
11	Tlačítko pro otevírání/zavírání dvířek (volitelné).

KÓD	POPIS	OPATŘENÍ
U1	Málo odstraňovače vodního kamene	Doplňte odstraňovač vodního kamene.
U2	Málo čistícího prostředku	Doplňte aktivní prostředek (volitelné).
U3	Málo oplachovacího prostředku	Doplňte oplachovací prostředek (volitelné).
U6	Požadavek na kontrolu	Kontaktujte autorizovaný servisní personál.
U7	Varování upozorňující na vysokou teplotu předmětů	Nechte předměty ochladit.
U8	Vnější komunikace	Vnější komunikace byla přerušena.
U9	Varování upozorňující na nečinnost	Přístroj nebyl v provozu po dobu 72 hodin. Než budou v přístroji dezinfikovány předměty, je nutné spustit program s prázdnou komorou.
H1	Chybí odstraňovač vodního kamene	Doplňte odstraňovač vodního kamene.
H3	Chybí oplachovací prostředek	Doplňte oplachovací prostředek.
H6	Pokus o spuštění s otevřenými dvířky	Zavřete dvířka (přístroj se znovu spustí). Pokud se chyba vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servisní personál.
H7	Baterie je vybitá	Kontaktujte autorizovaný servisní personál.

Pro chybové kódy typu F viz Návod k použití.