



FD1800, FD1805

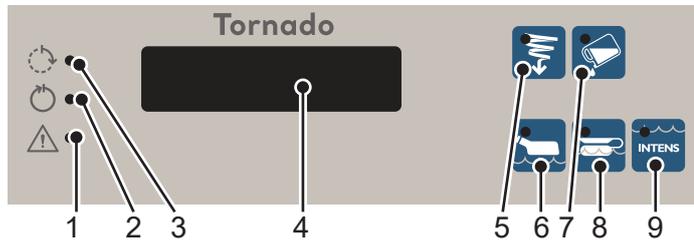

FD1810

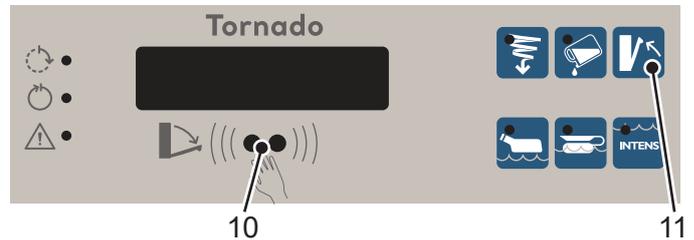

FUNKTIONSWEISE

1	Rot: Fehleranzeige. Auf dem Display erscheint eine Fehlermeldung.
2	Grün: Das Programm ist abgeschlossen. Die Leuchte erlischt wenn die Tür geöffnet wird und für einen kurzen Augenblick zeigt das Display eine Programmübersicht im Fenster an, z. B. max. Temperatur.
3	Gelbes Blinken: Das Programm kann beendet werden. Gelb: Ein Programm läuft. Das Display zeigt den aktuellen Status, z. B. Reinigungsphase und Temperatur.
4	Display. Ein Servicetechniker kann die Informationen, die im Display erscheinen sollen, eingeben.
5	Auswahltaste Randspülung.
6	Taste zur Auswahl des Sparprogramms für leicht verunreinigte Güter.
7	Auswahltaste Reinigungsmittel (Option).
8	Taste zur Auswahl des Normalprogramms für normal verunreinigte Güter.
9	Taste zur Auswahl des Intensivprogramms für stark verunreinigte Güter.
10	IR-Sensor zum Öffnen/Schließen der Tür und zum Starten des vorausgewählten Programms (Option).
11	Taste zum Öffnen/Schließen der Tür (Option).

CODE	BESCHREIBUNG	MASSNAHME
U1	Niedriger Füllstand Entkalker	Entkalker nachfüllen.
U2	Niedriger Füllstand Prozessmittel	Prozessmittel nachfüllen (Option).
U3	Niedriger Füllstand Spülmittel	Spülmittel nachfüllen (Option).
U6	Wartungsmeldung	Kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.
U7	Warnung vor heißen Gegenständen	Lassen Sie die Güter abkühlen.
U8	Externe Kommunikation	Externe Verbindung unterbrochen.
U9	Inaktivitätswarnung	Die Anlage war 72 Stunden inaktiv. Bevor die Anlage zum Reinigen von Gütern benutzt wird, muss ein Reinigungsprogramm mit leerer Kammer durchgeführt werden.
H1	Entkalker leer	Entkalker nachfüllen.
H3	Spülmittel leer	Spülmittel nachfüllen.
H6	Startversuch mit offener Tür	Schließen Sie die Tür (die Anlage versucht es erneut). Tritt der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.
H7	Batterie schwach	Kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.

Für Fehlercode Typ F, siehe „Bedienungsanleitung“.