



FD1800, FD1805

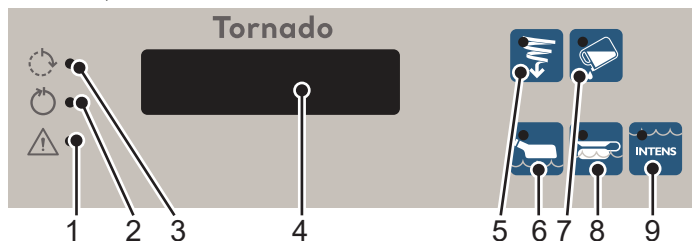

FD1810

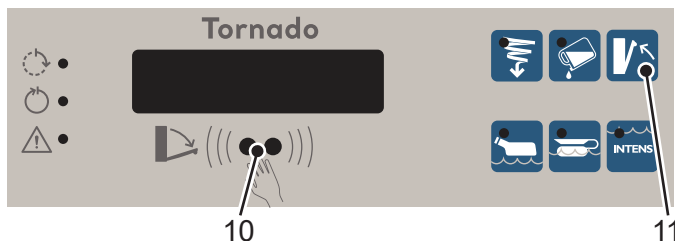

FUNZIONAMENTO

1	Rosso: indicazione di errore. Il display mostra un messaggio di errore.
2	Verde: il programma è stato completato. La spia verde si spegne quando viene aperto il portellone e per un periodo limitato compare una sintesi del programma sul display, ad es. la temperatura massima.
3	Giallo lampeggiante: il programma può essere arrestato. Giallo: programma in corso. Il display indica lo stato corrente, ad es. la fase e la temperatura di pulizia.
4	Display. Un tecnico di assistenza può inserire le informazioni che saranno visualizzate sul display.
5	Pulsante per la selezione del risciacquo.
6	Pulsante per la scelta del programma economico per presidi poco sporchi.
7	Pulsante per la selezione dell'agente di pulizia (opzionale).
8	Pulsante per selezionare il programma normale per presidi sporchi.
9	Pulsante per selezionare il programma intensivo per presidi molto sporchi.
10	Sensore ad infrarossi (IR) per l'apertura/chiusura del portellone e per l'avvio del programma preselezionato (opzionale).
11	Pulsante di apertura/chiusura del portellone (opzionale).

COD.	DESCRIZIONE	AZIONE
U1	Anticalcare in esaurimento	Riempire il contenitore dell'anticalcare.
U2	Mezzo di processo in esaurimento	Riempire il contenitore del mezzo di processo (opzionale).
U3	Ausilio di risciacquo in esaurimento	Riempire il contenitore del detergente (opzionale).
U6	Ispezione richiesta	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
U7	Allarme alta temperatura	Lasciare raffreddare i presidi.
U8	Comunicazione esterna	Connessione esterna interrotta.
U9	Allarme di inattività	La macchina è stata inattiva per 72 ore. Eseguire un ciclo di lavaggio a camera vuota prima di utilizzare la macchina per la pulizia dei presidi.
H1	Anticalcare vuoto	Riempire il contenitore dell'anticalcare.
H3	Agente per risciacquo vuoto	Riempire il contenitore dell'agente per risciacquo.
H6	Tentativo di avvio con portellone aperto	Chiudere il portellone (la macchina esegue un nuovo tentativo di avvio). Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
H7	Batteria scarica	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.

Per codici di errore di tipo F, vedere le Istruzioni per l'uso.