



FD1800, FD1805

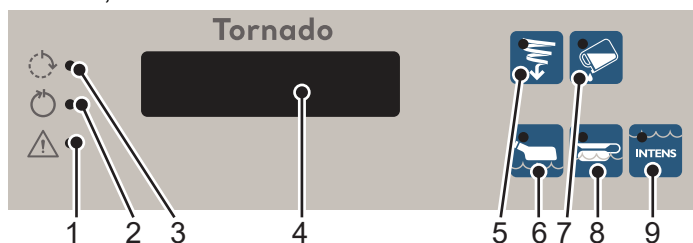

FD1810

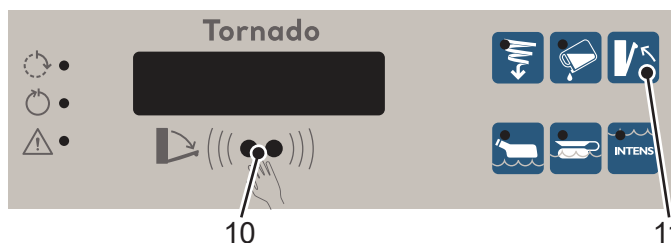

機能

1	赤色: エラー表示 ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。
2	緑色: プログラムは完了しています。ドアが開くとライトが消えて、例として最高温度等のプログラムサマリーが短時間ウィンドウに表示されます。
3	黄色に点滅 プログラムを中止できます。黄色: プログラムが作動中です。ディスプレイは、例として洗浄フェーズなどの現在の状態を示しています。
4	ディスプレイ サービス担当者は、ディスプレイに表示される情報を設定することができます。
5	リムフラッシングを選択するためのボタンです。
6	汚れが軽いアイテム向けのエコノミープログラムを選択するためのボタンです。
7	洗浄剤 (オプション) を選択するためのボタンです。
8	標準的な汚れのアイテム向けの標準プログラムを選択するためのボタンです。
9	汚れがひどいアイテム向けの集中プログラムを選択するためのボタンです。
10	IRセンサーは、ドアの開/閉、および事前選択されたプログラム (オプション) を開始するためのものです。
11	ドアの開/閉用のボタン (オプション)

コード	説明	項目
U1	スケール防止剤が少なくなりました	スケール防止剤を補充してください。
U2	洗浄剤が少なくなりました	洗浄剤を補充してください (オプション)。
U3	リンス剤が少なくなりました	リンス剤を補充してください。
U6	点検依頼	認定サービス担当者に連絡してください。
U7	アイテムが高温のため注意	アイテムを冷却してください。
U8	外部通信	外部接続を確認してください。
U9	長時間不使用警告	機器が72時間使用されていません。機器を使用してアイテムを洗浄する前に、一度空のチャンバーで運転を実行する必要があります。
H1	スケール防止剤が空です	スケール防止剤を補充してください。
H3	リンス剤が空です	リンス剤を補充してください。
H6	ドアが開いた状態で起動	ドアを閉じます (機器が新たに運転を試みます)。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
H7	低バッテリー	認定サービス担当者に連絡してください。

Fタイプのエラーコードについては取扱説明書をご参照ください。