



FD1800, FD1805

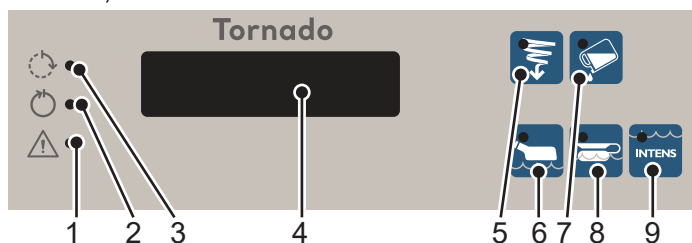

FD1810

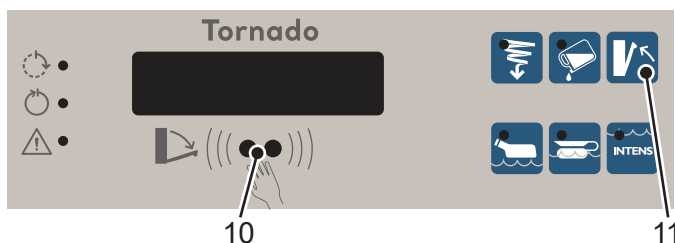

## FUNCTIE

1	Rood: foutmelding. De display toont een foutmelding.
2	Groen: het programma is voltooid. Het lampje gaat uit als de deur wordt geopend en op het display wordt korte tijd een overzicht van het programma in het venster weergegeven, bijvoorbeeld de maximumtemperatuur.
3	Geel knipperen: het programma kan worden beëindigd. Geel: programma in uitvoering. De display geeft de huidige status aan, bijvoorbeeld de reinigingsfase en de temperatuur.
4	Display. Een onderhoudstechnicus kan invoeren welke informatie er op het display moet worden getoond.
5	Knop voor het selecteren van randspoeling.
6	Knop voor het selecteren van het spaarprogramma, voor licht vervuilde goederen.
7	Knop voor het selecteren van het reinigingsmiddel (optie).
8	Knop voor het selecteren van het normale programma, voor normaal vervuilde goederen.
9	Knop voor het intensieve programma, voor zwaar vervuilde goederen.
10	IR-sensor om de deur te openen/sluiten en om het vooraf geselecteerde programma (optie) te starten.
11	Knop voor openen/sluiten van de deur (optie).

CODE	BESCHRIJVING	MAATREGEL
U1	Te weinig ontkalkingsmiddel	Vul ontkalkingsmiddel bij.
U2	Te weinig procesmiddel	Vul procesmiddel bij (optie).
U3	Te weinig spoelmiddel	Vul spoelmiddel bij (optie).
U6	Controle vereist	Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
U7	Waarschuwing: goederen met hoge temperatuur	Laat de goederen afkoelen.
U8	Externe communicatie	Externe verbinding verbroken.
U9	Waarschuwing voor niet-gebruik	De machine is 72 uur niet gebruikt. Voordat de machine wordt gebruikt om goederen te reinigen moet een programma worden uitgevoerd met een lege kamer.
H1	Ontkalkingsmiddel leeg	Vul ontkalkingsmiddel bij.
H3	Spoelmiddel op	Vul spoelmiddel bij.
H6	Startpoging met open deur	Sluit de deur: de machine onderneemt dan een nieuwe startpoging. Als de fout niet verdwijnt, neem dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
H7	Batterij bijna leeg	Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor foutcodes van het type F.