



FD1800, FD1805

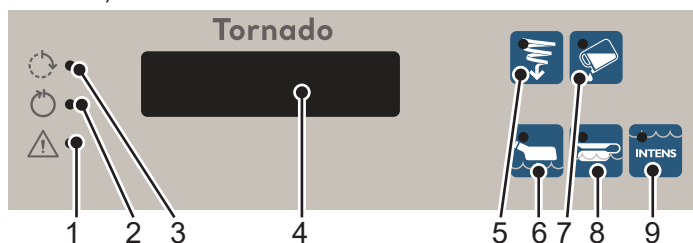

FD1810

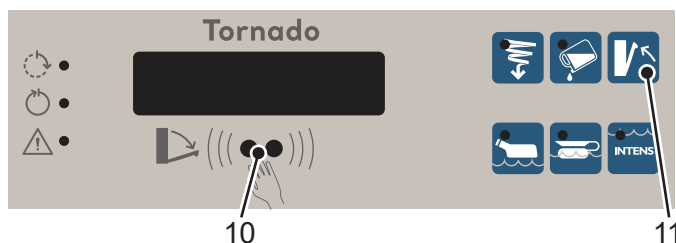

FUNKSJON

1	Rød: Feilkodeindikator. Displayet viser en feilmelding.
2	Grønn: Programmet er ferdig. Lampen slukkes når døren åpnes, og i en kort tidsperiode viser displayet et programsammendrag i vinduet, f.eks. høyeste temperatur.
3	Blinker gult: Programmet kan avsluttes. Gul: Et program kjører. Displayet viser gjeldende status, for eksempel rengjøringsfasen og temperaturen.
4	Display. En servicetekniker kan angi informasjonen som skal vises på displayet.
5	Knapp for valg av kantspyling.
6	Knapp for valg av økonomiprogram for lett tilsmusset gods.
7	Knapp for valg av vaskemiddel (alternativ).
8	Knapp for valg av normalt program for normalt tilsmusset gods.
9	Knapp for valg av intensivt program for svært tilsmusset gods.
10	IR-sensor for åpning/lukking av døren og start av det forhåndsvalgte programmet (alternativ).
11	Knapp for åpning/lukking av dør (alternativ).

KODE	BESKRIVELSE	TILTAK
U1	Avkalkingsmiddel, lavt nivå	Fyll på avkalkingsmiddel.
U2	Prosessmiddel, lavt nivå	Fyll på prosessmiddel (alternativ).
U3	Skyllemiddel, lavt nivå	Fyll på skyllemiddel (alternativ).
U6	Forespørsel om inspeksjon	Kontakt autorisert servicepersonell.
U7	Advarsel om høy godstemperatur	La godset avkjøles.
U8	Ekstern kommunikasjon	Ekstern tilkobling avbrutt.
U9	Advarsel ved inaktivitet	Maskinen har vært inaktiv i 72 timer. Kjør et program med tomt kammer før maskinen brukes til å vaske gods.
H1	Avkalkningsmiddel, tomt	Fyll på avkalkingsmiddel.
H3	Skyllemiddel, tomt	Fyll på skyllemiddel.
H6	Startforsøk med åpen dør	Lukk døren (maskinen gjør et nytt startforsøk). Kontakt autorisert servicepersonell hvis feilen vedvarer.
H7	Lavt batterinivå	Kontakt autorisert servicepersonell.

Se type F-feilkoder i bruksanvisningen.