



FD1800, FD1805

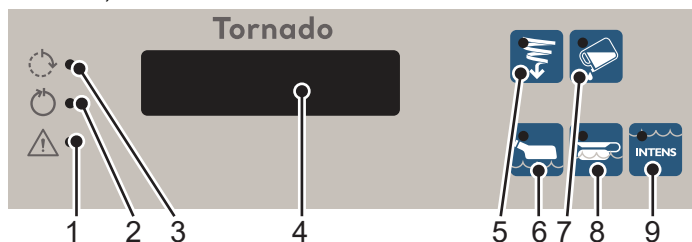

FD1810

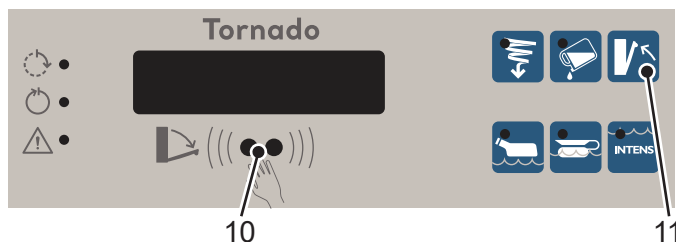

FUNKCJA

1	Czerwona: Sygnalizacja błędu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.
2	Zielona: Program został ukończony. Po otwarciu drzwi zielona kontrolka gaśnie, a w oknie wyświetlacza pojawia się przez chwilę podsumowanie programu, np. maksymalna temperatura procesu.
3	Żółta migająca kontrolka: Program można przerwać. Żółta: Program jest w trakcie działania. Na wyświetlaczu widoczny jest aktualny status, np. faza czyszczenia oraz temperatura.
4	Wyświetlacz. Serwisant może wprowadzić informacje, które mają się pojawiać na wyświetlaczu.
5	Przycisk wyboru płukania brzegów.
6	Przycisk uruchamiający program ekonomiczny do przedmiotów lekko zanieczyszczonych.
7	Przycisk wyboru detergentu (opcjonalnie).
8	Przycisk uruchamiający program zwykły do przedmiotów o typowym stopniu zanieczyszczenia.
9	Przycisk wyboru programu intensywnego do przedmiotów silnie zanieczyszczonych.
10	Czujnik podczerwieni do otwierania/zamykania drzwi oraz uruchamiania wybranego programu (opcjonalnie).
11	Przycisk do otwierania/zamykania drzwi (opcjonalnie).

KOD	OPIS	CZYNNOŚĆ
U1	Niski poziom odkamieniacza	Uzupełnić odkamieniacz.
U2	Niski poziom środka czyszczącego	Uzupełnić środek czyszczący (opcjonalnie).
U3	Niski poziom środka płuczącego	Uzupełnić środek płuczący (opcjonalnie).
U6	Żądanie przeglądu	Skontaktować się z serwisem.
U7	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze przedmiotów	Poczekać, aż przedmioty ostygną.
U8	Komunikacja zewnętrzna	Połączenie zewnętrzne zostało przerwane.
U9	Ostrzeżenie o braku aktywności	Urządzenie było nieaktywne przez 72 godziny. Przed przystąpieniem do mycia przedmiotów przeprowadzić cykl przy pustej komorze.
H1	Brak odkamieniacza	Uzupełnić odkamieniacz.
H3	Brak środka spłukującego	Uzupełnić środek płuczący.
H6	Próba uruchomienia przy otwartych drzwiach	Zamknąć drzwi (urządzenie podejmie próbę ponownego uruchomienia). W razie wystąpienia błędu skontaktować się z serwisem.
H7	Niski poziom akumulatora	Skontaktować się z serwisem.

Dla kodów błędu typu F patrz Instrukcje obsługi.