



FD1800, FD1805

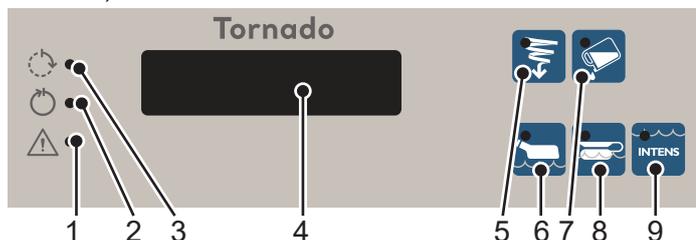

FD1810

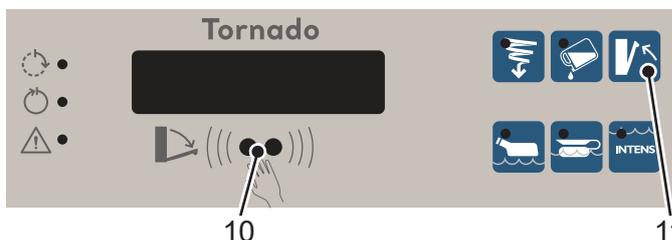

FUNCIONALIDADE

1	Vermelho: Indicação de erro. O ecrã apresenta uma mensagem de erro.
2	Verde: o programa está concluído. A luz apaga-se quando a porta é aberta e, durante um curto espaço de tempo, o ecrã apresenta um resumo do programa no visor, por exemplo, a temperatura máxima.
3	Amarela intermitente: O programa pode ser terminado. Amarelo: Um programa está em execução. O ecrã mostra o estado atual, por exemplo, a fase de limpeza e a temperatura.
4	Ecrã. A informação a ser apresentada no ecrã pode ser definida por um técnico de assistência.
5	Botão para selecionar a lavagem do rebordo.
6	Botão para escolher o programa económico, para artigos pouco sujos.
7	Botão para selecionar o agente de limpeza (opção).
8	Botão para escolher o programa normal, para artigos normalmente sujos.
9	Botão para escolher o programa intensivo, para artigos muito sujos.
10	Sensor IV para abrir/fechar a porta e iniciar o programa pré-selecionado (opção).
11	Botão para abrir/fechar a porta (opção).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA
U1	Nível baixo do agente de descalcificação	Encha o depósito com descalcificador.
U2	Nível baixo de agente de processo	Encha o depósito com agente de processo (opção).
U3	Nível baixo de brilhantador	Encha o depósito com brilhantador (opção).
U6	Solicitação de inspeção	Contacte o pessoal de assistência autorizado.
U7	Aviso de temperatura elevada dos artigos	Deixe os artigos arrefecer.
U8	Comunicação externa	Ligação externa interrompida.
U9	Aviso de inatividade	A máquina esteve inativa durante 72 horas. É necessário executar um programa com uma câmara vazia antes de utilizar a máquina para limpar artigos.
H1	Recipiente do descalcificador vazio	Encha o depósito com descalcificador.
H3	Agente de lavagem esgotado	Encha o depósito com agente de lavagem.
H6	Tentativa de arranque com porta aberta	Feche a porta (a máquina faz uma nova tentativa de arranque). Se o erro ocorrer novamente, contacte o pessoal de assistência autorizado.
H7	Bateria fraca	Contacte o pessoal de assistência autorizado.

Para códigos de erro F, consulte as Instruções de Utilização.