



FD1800, FD1805

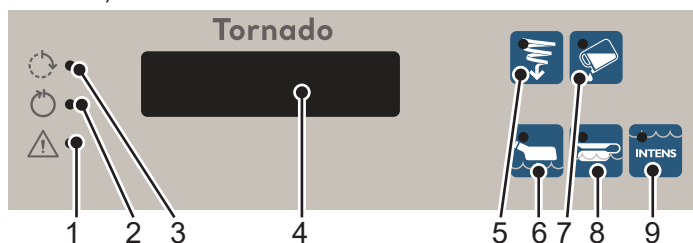

FD1810

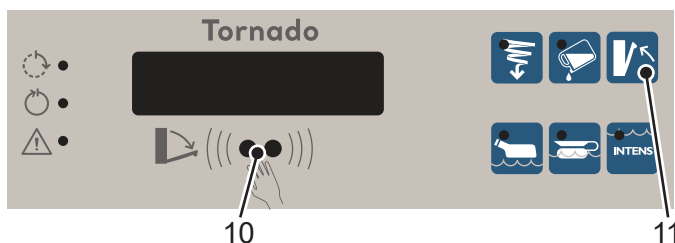

FUNKTION

1	Röd: Felindikering. I teckenfönstret visas ett felmeddelande.
2	Grön: Programmet är klart. Lampan släcks när dörren öppnas och under en kort tid visas en programsummering i teckenfönstret, t ex maxtemperatur.
3	Blinkande gul: Det går att avbryta programmet. Gul: Ett program körs. I teckenfönstret visas statusinformation, t ex rengöringsfas och temperatur.
4	Teckenfönster. En servicetekniker kan ställa in vilken information som ska visas i teckenfönstret.
5	Knapp för att välja randspolning.
6	Knapp för att välja ekonomiprogram för lätt smutsat gods.
7	Knapp för att välja rengöringsmedel (option).
8	Knapp för att välja normalprogram för normalt smutsat gods.
9	Knapp för att välja intensivprogram för hårt smutsat gods.
10	IR-sensor för öppning/stängning av luckan, samt start av program (option).
11	Knapp för att öppna/stänga luckan (option).

KOD	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
U1	Kalkbindande medel låg nivå	Fyll på kalkbindande medel.
U2	Processmedel låg nivå	Fyll på processmedel (tillval).
U3	Klarmedel låg nivå	Fyll på klarmedel (option).
U6	Inspektionsanfordran	Kontakta behörig servicepersonal.
U7	Varning hög godstemperatur	Låt godset svalna.
U8	Extern kommunikation	Förbindelsen med extern anslutning avbruten.
U9	Inaktivitetsvarning	Maskinen har varit inaktiv i 72 timmar. Ett program med tom kammarre måste köras innan maskinen används för rengöring av gods.
H1	Kalkbindande medel slut	Fyll på kalkbindande medel.
H3	Sköljmedel slut	Fyll på med sköljmedel.
H6	Startförsök med öppen lucka	Stäng luckan (maskinen gör ett nytt startförsök.) Kontakta behörig servicepersonal om felet kvarstår.
H7	Låg spänning i batteriet	Kontakta behörig servicepersonal.

För felkoder av typen F, se Bruksanvisning.