

Nimbus 4 & Nimbus Professional

Einrichten von Matratze und Pumpe

1

Legen Sie die Matratze auf das Bettgestell (Schlauchleitungen und CPR-Griff am Fußende). Befestigen Sie die Matratze mit den Befestigungsbändern an den beweglichen Teilen des Bettrahmens.

2

Ziehen Sie den Schonbezug über die Matratze. Dabei sollte das Arjo-Logo sichtbar sein und sich am Fußende befinden.

3

Geschlossen Open (Offen)

Vergewissern Sie sich, dass alle Entlüftungsventile geschlossen sind.

4

Sorgen Sie dafür, dass der Transportknopf auf „Normal“ eingestellt und der CPR-Griff in geschlossener Position fest eingerastet ist.

5

Befestigen Sie die Betthalterung am Bettrahmen oder stellen Sie die Pumpe unter das Bett.

6

Schließen Sie die Schlauchleitungen an die Pumpe und die Matratze an.

7

Schließen Sie das Netzkabel an die Pumpe und die Steckdose an.

8

WARNUNG
Netzkabel und Schlauchleitungen müssen so angeordnet werden, dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Sie sollten außerdem von beweglichen Teilen des Betts und sonstigen möglichen Einklembereichen ferngehalten werden.

Legen Sie das Netzkabel entlang der Matratzenseite ein und befestigen Sie die Leiste mit Hilfe der Druckknöpfe um das Kabel.

Befüllen der Matratze

1

WARNUNG
Der CPR-Griff muss jederzeit sichtbar und zugänglich sein.

- CPR-Griff in geschlossener Position fest eingerastet.
- Transportfunktion auf „Normal“ eingestellt.
- Alle Entlüftungsventile geschlossen.

2

Drücken Sie die Betrieb/Standby-Taste. Warten Sie, bis die Matratze vollständig befüllt ist.

3

Sobald die Anzeigen „Warten“ und „Niedriger Druck“ ausgehen, positionieren Sie den Patienten in Rückenlage (Gesicht nach oben) auf der Matratze. Standardmäßig ist der Dynamik-Modus (Wechseldruck) ausgewählt.

Aktivieren der CPR-Funktion

1




Heben Sie den roten Griff am Bedienfeld am Fußende der Matratze an.

2



Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

3



Ziehen Sie den Griff vom Bedienfeld weg.
Der graue dreieckige Verschluss dreht sich und die Luft wird aus der Matratze abgelassen.

Zurücksetzen der CPR-Funktion

1

Drehen Sie den grauen, dreieckigen Verschluss im Uhrzeigersinn und drücken Sie auf die Verbindungen.

2



Drehen Sie den roten Griff im Uhrzeigersinn.

3



Klappen Sie den Griff um, so dass er einrastet.


Einstellen des Transportmodus

1




Drehen Sie den Transportknopf auf „Transport“.

2



Schalten Sie die Pumpe aus.


3

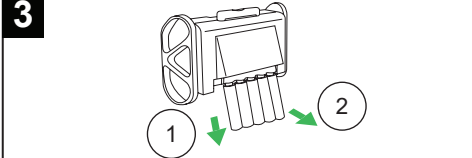

Trennen Sie die Schlauchleitungen. Die Matratze stützt den Patienten bis zu 12 Stunden.


Wiederaufnahme des Normalbetriebs

1

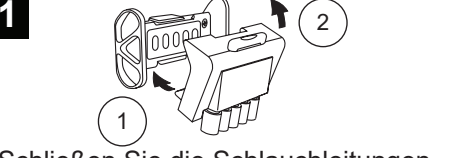

Schließen Sie die Schlauchleitungen wieder an.

2

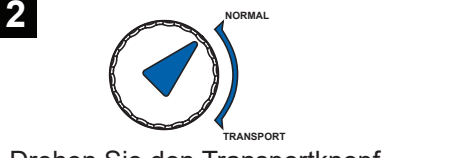

Drehen Sie den Transportknopf auf Normal.

3



Schalten Sie die Pumpe ein.

Reinigung und Desinfektion

Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor jedem Patientenwechsel und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs.



WARNUNG

Trennen Sie die Pumpe vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Bei der Dekontaminierung muss stets Schutzkleidung getragen werden.

Reinigung

1. Reinigen Sie alle freiliegenden Oberflächen und entfernen Sie Ablagerungen, indem Sie mit einem mit neutralen Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch darüber wischen.
2. Gründlich abtrocknen. Lassen Sie kein Wasser oder Reinigungslösung auf der Oberfläche der Pumpe ansammeln.

Chemische Desinfektion

Verwenden Sie einen Chlorabspalter, wie beispielsweise Natriumhypochlorid, bei einer Konzentration von 1000 ppm verfügbarem Chlor (zwischen 250 ppm und 10.000 ppm je nach den örtlichen Vorschriften und dem Kontaminationsgrad).

Alternativ können Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (70 %) verwendet werden.

Falls ein anderes Desinfektionsmittel gewählt wird, informieren Sie sich vor dessen Einsatz bei dem Chemikalienlieferanten über seine Tauglichkeit.

1. Wischen Sie alle gereinigten Oberflächen mit der Lösung ab.
2. Wischen Sie mit einem mit Wasser befeuchteten Lappen nach.
3. Gründlich abtrocknen.

Thermische Desinfektion

Angaben zum Waschen des oberen Matratzenbezugs sind dem Etikett zu entnehmen.