

Instalación del colchón y el compresor

1

Coloque el colchón sobre la cama, con el juego de tubos y la unidad RCP en el extremo de los pies. Abroche el colchón a las partes móviles de la estructura de la cama con las correas de sujeción.

2

Cierre la cubierta protectora sobre el colchón con el logotipo Arjo visible en el extremo de los pies.

3

Cerrada Abierta

Cierre todas las válvulas de ventilación.

4

Compruebe que el mando de transporte está en posición «Normal» y que el de RCP está cerrado y bloqueado en esa posición.

5

Monte el soporte de cama en la estructura de la cama, o instale el compresor bajo la cama.

6

Conecte el juego de tubos al compresor y a la cama.

7

Conecte el cable de alimentación al compresor y a la toma de corriente.

8

ADVERTENCIA El cable de alimentación y el juego de tubos deben colocarse de manera que no exista riesgo de tropezar con ellos y permanezcan separados de los mecanismos móviles de la cama y otros puntos de atrapamiento.

Haga discurrir el cable de alimentación a lo largo del lateral del colchón y asegure la solapa en torno al cable por medio de los botones de presión.

Inflado del colchón

1

ADVERTENCIA El control RCP debe permanecer visible y accesible en todo momento.

- Control RCP bloqueado en posición cerrada.
- Control de transporte en posición «Normal».
- Válvulas de ventilación cerradas.

2


Pulse el botón de encendido/modo de espera. Espere hasta que el colchón se haya inflado totalmente.

3

Una vez que los indicadores de espera y de baja presión se hayan apagado, ponga al paciente sobre el colchón en posición de decúbito supino (boca arriba). El colchón está ajustado por defecto en modo dinámico (presión alterna).


Activación de la función RCP

1

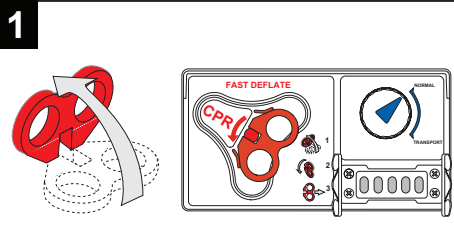


Levante la manilla roja del panel de control que se encuentra en el extremo de los pies del colchón.

2

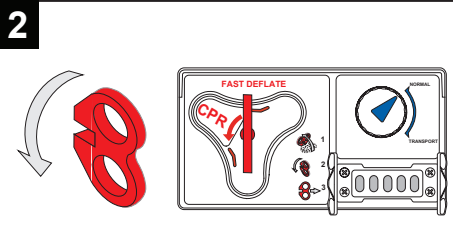

Gire la manilla en sentido antihorario.

3

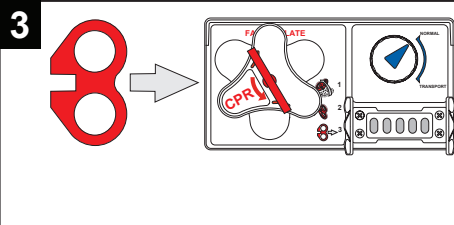

Tire de la manilla hacia fuera del panel. El sello gris triangular girará y el aire saldrá del colchón.

Restablecimiento del control RCP

1

Gire el sello triangular de color gris en sentido horario y empujelo contra los conectores.

2



Gire la manilla roja en sentido horario.


3



Doble la manilla para bloquearla plana en su posición cerrada.

Selección del modo de transporte

1

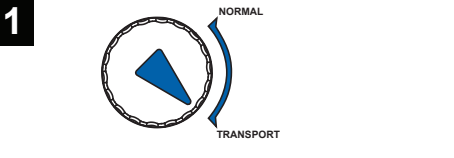


Gire el mando de transporte a la posición «Transport».

2



Apague el compresor.


3

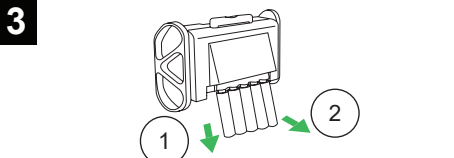

Desconecte el sistema de tubos. El colchón mantiene al paciente durante un máximo de 12 horas.

Para volver al modo de operación normal

1

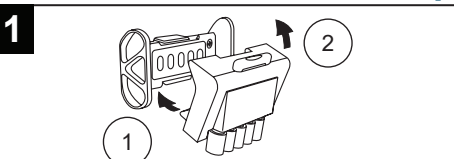

Vuelva a conectar el juego de tubos.

2



Gire el control para transporte a la posición Normal.

3



Encienda el compresor.

Limpieza y desinfección

Limpie y desinfecte cuando cambie de paciente y a intervalos regulares durante su utilización.



ADVERTENCIA

Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el cable del compresor de la toma de corriente para cortar la alimentación eléctrica.

Cuando lleve a cabo la descontaminación, utilice siempre prendas protectoras.

Limpieza

1. Limpie todas las superficies expuestas y retire cualquier residuo pasando un paño humedecido con un detergente neutro y agua.
2. Séquelo adecuadamente. Evite que el agua o las soluciones de limpieza se acumulen en la superficie del compresor.

Desinfección química

Utilice un agente que libere cloro, como el hipoclorito de sodio, con una concentración de 1000 ppm de cloro disponible (de 250 ppm a 10 000 ppm dependiendo de la normativa local y el grado de contaminación).

Como alternativa, podrán utilizarse desinfectantes basados en alcohol (con una concentración del 70%).

Si emplea otro desinfectante, confirme con el proveedor del producto que su uso es adecuado antes de utilizarlo.

1. Limpie todas las superficies con la solución.
2. Pase un paño humedecido con agua.
3. Séquelo adecuadamente.

Desinfección térmica

Para lavar la cubierta superior del colchón, consulte la etiqueta.