


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Instalacja materaca i pompy

1

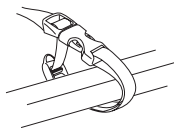


Położ materac na podstawie łóżka z przewodem powietrznym i panelem CPR w nogach łóżka. Paskami przypnij materac do ruchomych części ramy łóżka.

2

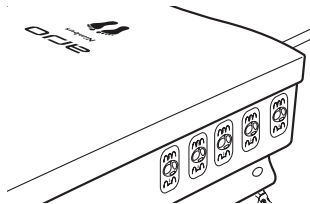


Zapnij pokrowiec ochronny na materacu z widocznym znakiem logo Arjo umieszczonym w nogach łóżka.

3

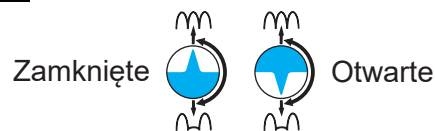


Sprawdź, czy wszystkie wentyle są zamknięte.

4

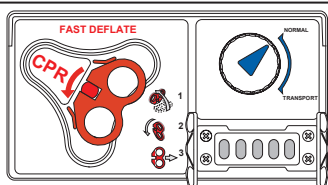


Sprawdź, czy regulacja do transportu jest ustawiona w pozycji Normalnie, a zawór CPR jest zamknięty i zablokowany.

5

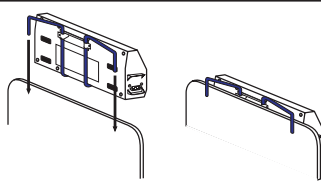


Przymocuj do ramy łóżka specjalnych uchwyt lub ustaw pompę pod łóżkiem.

6

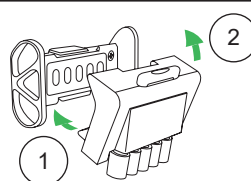

Podłącz przewód powietrzny do pompy i materaca.

7

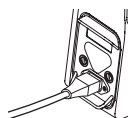


Podłącz przewód zasilający do pompy oraz do gniazda sieciowego.

8



UWAGA

Przewód zasilający i przewód powietrzny powinny być ułożone w taki sposób, aby nie można się było o nie potknąć, z dala od ruchomych mechanizmów i innych miejsc grożących przyszczypnięciem przewodów.

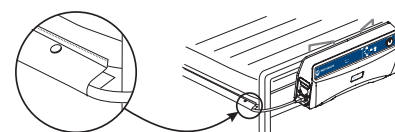

Poprowadź przewód zasilający wzdłuż boku materaca, mocując go wewnątrz klapki przy użyciu zatrzasków.

Pompowanie materaca

1




UWAGA

Zawór CPR powinien być zawsze dostępny i widoczny.


- Zawór CPR jest zamknięty i zablokowany.
- Regulacja do transportu ustawiona w pozycji Normalnie.
- Wszystkie wentyle zamknięte.

2

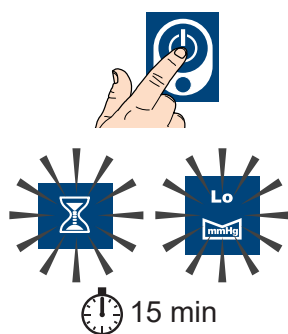

Wciśnij przycisk Praca/Gotowość. Zaczekaj na całkowite napompowanie materaca.


3

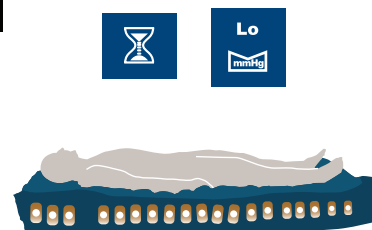

Kiedy wskaźniki czekania i niskiego ciśnienia zgasną, ułóż pacjenta na materacu w pozycji na wznak (twarzą do góry). Domyślnie ustawiony jest tryb Dynamiczny (ciśnienie zmienne).

Aktywacja funkcji CPR

1

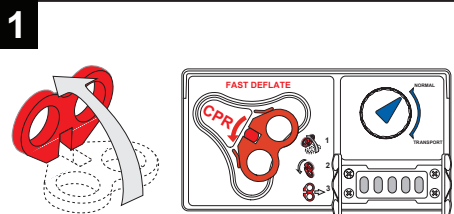


Podnieś czerwony uchwyt na panelu sterowania umieszczonym w nogach łóżka.

2



Obróć go w lewo.

3

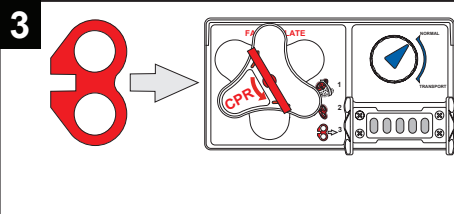

Odciągnij uchwyt od panelu. Szara trójkątna uszczelka obróci się, a powietrze ujdzie z materaca.

Kasowanie funkcji CPR

1

Obróć szarą trójkątną uszczelkę w prawo i wciśnij ją na złącza.

2



Obrócić czerwony uchwyt w prawo.


3



Zegnij uchwyt na płasko, aby go zablokować.


Ustawienie trybu transportowego

1

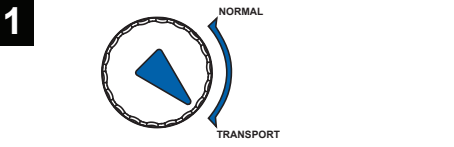


Ustaw regulację do transportu w pozycji Transport.

2



Wyłącz pompę.


3

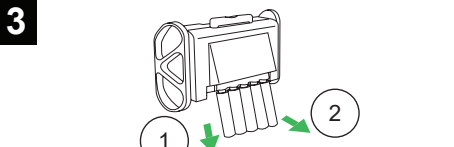

Odłącz przewód powietrzny. Materac zapewni pacjentowi podparcie do 12 godzin.


Wznowienie normalnego działania

1

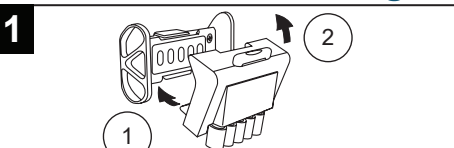

Ponownie podłącz przewód powietrzny.

2

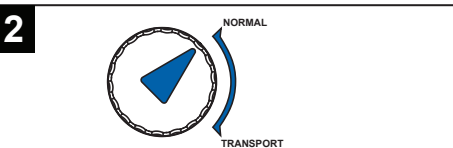

Ustaw regulację do transportu w pozycji Normalnie.

3



Włącz pompę.

Czyszczenie i dezynfekcja

Czyść i dezynfekuj przed zmianą pacjenta oraz z regularną częstotliwością w czasie użycia.



UWAGA

Przed czyszczeniem odciąć dopływ prądu do pompy poprzez odłączenie kabla zasilającego od gniazda zasilania.

W trakcie odkażania personel powinien mieć na sobie odzież ochronną.

Czyszczenie

1. Wyczyść wszystkie odkryte powierzchnie i usuń wszelkie pozostałości, przemywając urządzenie szmatką zanurzoną w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu i wody.
2. Dokładnie osusz. Nie dopuścić do gromadzenia się wody ani środków czyszczących na powierzchni pompy.

Dezynfekcja chemiczna

Zaleca się stosowanie środka z aktywnym chlorem, np. podchlorynem sodu, o stężeniu 1000 ppm dostępnego chloru (od 250 do 10 000 ppm w zależności od miejscowych przepisów i stanu zanieczyszczenia).

Ewentualnie można również stosować środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (moc do 70%).

W razie wyboru innego środka dezynfekcyjnego przed użyciem sprawdź możliwość jego użycia u dostawcy.

1. Wszystkie czyszczone powierzchnie przetrzyj roztworem.
2. Wytrzyj ściereczką nasączoną wodą.
3. Dokładnie osusz.

Dezynfekcja termiczna

Informacje dotyczące prania górnego pokrowca materaca znajdują się na metce.