


IN HOOGTE VERSTELBARE BADLIFTSTOEL

Alenti®



De Alenti is zo ontworpen dat één zorgverlener de gehele badcyclus in een goede werkhouding kan uitvoeren. De Alenti kan worden gebruikt met ons assortiment ligbaden.

Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara en Carl

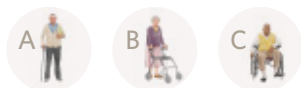

Vergemakelijkt efficiënte badroutines

Eén zorgverlener kan de zorgvrager vanuit de rand van bed of de rolstoel op de Alenti plaatsen en rechtstreeks in het bad plaatsen. De Alenti kan ook worden gebruikt voor douchen, toiletbezoek en andere hygiënische zorgtaken, waardoor het aantal benodigde transfers voor dagelijkse verzorgingstaken wordt verminderd.

Ontworpen voor eenvoudige reiniging en desinfectie

De zitting is ontworpen voor eenvoudige reiniging en desinfectie, door de gegoten constructie uit één stuk en de gladde oppervlakken die gecoat zijn met porschuim met gesloten celstructuur. De veiligheidsriem is ook reinigbaar om het risico op kruisbesmetting te verminderen.

Tijdens de hele transfer ondersteund zitten

De zorgvrager kan veilig in de Alenti blijven zitten tijdens de transfer in en uit het bad, waardoor het risico op vallen wordt beperkt.

Belangrijkste kenmerken

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Groot tilbereik dat kan worden ingesteld op zorgvragers van verschillende lengtes. Met ingebouwde soft-startfunctie.

RUGSTEUN

Biedt extra ondersteuning en kan aan beide zijden van de Alenti-zitting worden gemonteerd.

ANATOMISCH ONTWERPEN ZITTING

Ontworpen voor meer comfort en als hulp voor een betere positionering als de zorgvrager zelf gaat zitten.

SOEPEL LOPENDE ZWENKWIELEN

CENTRAAL REMSYSTEEM

Wordt geactiveerd met één druk op de knop.



DUBBELE BEDIENING

Dankzij de twee sets bedienings-elementen (op de Alenti zelf en een afstandsbediening) kan de zorgverlener tijdens het bedienen van het apparaat dicht bij de zorgvrager blijven.

INKLAPBARE HANDGREPEN

Bieden ondersteuning tijdens de hele transfer en hygiënische routine.

OPLAADBARE ACCU


Er worden twee accu's en een lader meegeleverd, zodat er altijd een accu beschikbaar is terwijl de andere oplaadt.

WEEGUNIT (OPTIONEEL)

De uiterst nauwkeurige, ingebouwde weegunit kan worden gebruikt als handig alternatief om een zorgvrager te wegen.

OMHOOG- EN OMLAAGBRENGEN IN NOODGEVALLEN

BENODIGDE RUIMTE

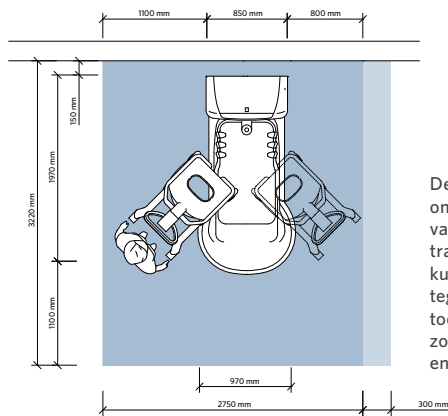

De vereiste werkruimte om aan beide zijden van het bed de bad- en transferactiviteiten te kunnen verrichten en tegelijkertijd voldoende toegang te bieden voor de zorgvrager, de hulpmiddelen en de zorgverlener.

PRODUCTINFORMATIE

Veilige tilbelasting	182 kg
Totaal gewicht (lift en weegunit)	72 kg
Totale breedte	640 mm
Totale lengte	1010 mm
Hoogte zitting, laagste stand	470 mm
Hoogte zitting, hoogste stand	1070
Tilbereik (zitting)	590 mm
Max. breedte onderstel	640 mm
Min. breedte onderstel tussen de poten	478 mm
Vrije ruimte onder onderstel	35 mm
Lengte onderstel, max. (incl. remmen)	1010 mm
Draaicirkel	ø 1.110
Voeding	24 V DC
Max. vermogen	200 VA
Beschermingsklasse	IP X4
Beschermingsklasse	IP X7 (afstandsbediening)

STANDAARDFUNCTIES EN -ACCESSOIRES

In hoogte verstelbaar

Verwijderbare rugsteun

Centraal remsysteem

Dubbele bediening

Twee oplaadbare accu's

Batterijlader

Omhoog- en omlaagbrengen in noodgevallen

Reinigbare veiligheidsriem

Inklapbare handgrepen

OPTIONELE FUNCTIES EN ACCESSOIRES

Geïntegreerde weegunit

Bedpanhouder

Bedpan met deksel

Beensteun

Voor meer informatie bezoek www.arjo.nl