

HÖJ- OCH SÄNKBAR LYFTSTOL FÖR BAD

Alenti®



Alenti är utformad för att en ensam vårdpersonal ska kunna utföra en komplett badrutin och arbeta i ergonomiskt hållbara positioner under alla moment. Alenti är fullt kompatibel med vårt sortiment av liggande badkar.

Utformad med tanke på Albert, Barbara och Carl



Underlättar effektiva badrutiner

Alenti gör det enkelt för en ensam vårdpersonal att förflytta patienten direkt från sängen eller rullstolen till badet. Alenti kan också användas vid duschning, toalettbesök och andra hygienrutiner, vilket minskar antalet förflyttningar som behövs under de dagliga rutinerna.

Utformad för enkel rengöring och desinficering

Sätet är formgjutet i ett stycke med slät yta i PUR-skumplast för enkel rengöring och desinficering. Det går också att torka av säkerhetsbältet för att minska risken för korskontamination.

Säkert stöd under förflyttning

Patienten kan sitta kvar säkert och bekvämt i Alenti under förflyttning till och från badkaret, vilket också minskar risken för fallolyckor.

Viktiga funktioner

STÄLLBAR I HÖJD

Ställbar lyfthöjd som kan anpassas efter patientens längd. Inbyggd mjukstartsfunktion.

RYGGSTÖD

Ett extra stöd som kan monteras på båda sidor om sätet.

ANATOMISKT UTFORMAD SITS

Utformad för god komfort och för att patienten enkelt ska kunna ändra ställning.

HJUL SOM RULLAR LÄTT

CENTRALBROMSAR

Aktiveras med en knapptryckning.



DUBBLA MANÖVERREGLAGE

De två styrenheterna – en handkontroll och en styrpanel på chassit – gör att vårdpersonalen kan styra stolen och samtidigt arbeta nära patienten.

FÄLLBARA GREPP

Ger stöd under förflyttningar och hygienrutiner.

UPPLADDNINGSBART BATTERI


Två batterier och en laddare medföljer, så att ett batteri alltid är tillgängligt när det andra laddas.

VÅG (TILLVAL)

Mycket exakt elektronisk våg för smidig vägning av patienten.

NÖDLYFTNING OCH NÖDSÄNKNING

UTRYMMESKRAV

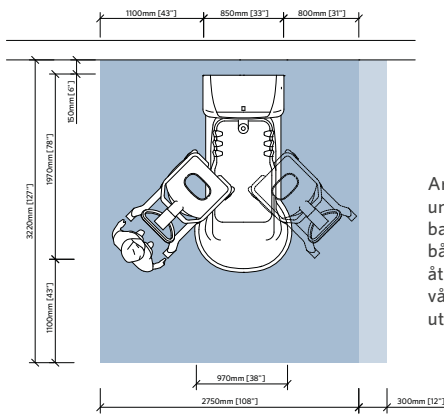

Arbetsyta som krävs för att underlätta förflyttningar och badrutiner från badkarets båda sidor och underlätta åtkomligheten för patienten, vårdpersonalen och utrustningen.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Säker arbetslast | 182 kg |
| Total vikt (lyft och våg) | 72 kg |
| Totalbredd | 640 mm |
| Totallängd | 1 010 mm |
| Säteshöjd, lägsta position | 470 mm |
| Säteshöjd, högsta position | 1 070 |
| Lyfthöjd (sits) | 590 mm |
| Max. bredd chassit | 640 mm |
| Min. bredd chassi mellan benen | 478 mm |
| Fri höjd under chassit | 35 mm |
| Chassi, maximal längd (inkl. bromsar) | 1 010 mm |
| Matningsspänning | 24 V DC |
| Maxeffekt | 200 VA |
| Kapslingsklass | IP X4 |
| Kapslingsklass | IP X7 (handkontroll) |

STANDARDFUNKTIONER OCH TILLBEHÖR

- Ställbar i höjd
- Borttagbart ryggstöd
- Centralbromsar
- Dubbla manöverreglage
- Uppladdningsbara batterier x 2
- Batteriladdare
- Nödsänkning och nödhöjning
- Avtorkningsbart säkerhetsbälte
- Fällbara handtag

TILLVALSFUNKTIONER OCH TILLBEHÖR

- Inbyggd våg
- Hållare för bäcken
- Bäcken med lock
- Benstöd

Mer detaljerad information hittar du på www.arjo.com