

PREVENTION AV TRYCKSKADOR

Alpha Trancell® Deluxe

Tryckfördelningssystem



Dygnetruntlösning

Alpha Trancell Deluxe tillhandahåller aktiv växlande tryckfördelning för underlättad användning.

Alpha Trancell Deluxe tillämpar en kliniskt beprövad 10-minuter lång, 1 i 2-cellcykel, för prevention och behandling av trycksår.

Funktioner

Toppmadrass

- 20 helt alternerande modulära celler
- Slitstarkt polyuretanmaterial (PU)
- Snabbtömningsfunktion
- Transportfunktion
- Fästband

Madrass (ersättning)

- Som ovan med extra inbyggt skumunderlägg, för att fungera som en fullständig ersättningsmadrass.

Sittdyna

- 9 helt alternerande PU-celler
- Modulär konstruktion
- Fästband
- PU-belagt överdrag av trikåtyg

Pump

- Manuell tryckstyrning med lättanvända numrerade inställningar
- Lätt och kompakt
- Minimala ljud- och vibrationsnivåer
- Starkt och slitstarkt hölje
- Till/Från-brytare
- Strömindikator
- Vänta på uppblåsning-indikator
- Ljud- och ljuslarm för strömbrott
- Ljud- och ljuslarm för lågt tryck
- Inbyggt reservbatteri för larm
- Färre inbuktande områden där smuts kan samlas
- Hängkrokar
- Slanganslutningar med snäppfäste för säker anslutning
- Lättanvänd styrskena på pumpen




Lättanvända inställningar



Sittdyna



Helt alternerande modulära celler

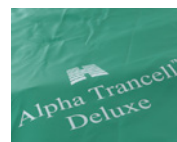

Tåligt PU-belagt överdrag

Produktinformation

	TOPPMADRASS	ERSÄTTNINGSMADRASS	SITTDYNA	PUMP
Artikelnummer	▪ ATD002DAR ▪ ATD002DARW (svetsade sömmar)	▪ ATD001DAR ▪ ATD001DARW (svetsade sömmar)	ATD003DAR	ALTO4SV
Mått	2040 x 860 x 114mm (80¾ x 34¾ x 4½")	2040 x 860 x 210mm (80¾ x 34¾ x 8¾")	455 x 470 x 50mm (18 x 18½ x 2")	248 x 160 x 116mm (9¾ x 6¼ x 4½")
Vikt				2,7kg (6lbs)
Cykel				10 minuter
Ström				220-224V, 50Hz, 14V A
Elsäkerhet				IEC60601-1-UK/Euro, IEC60601-1 - ROW
Max brukarvikt	120kg (265lbs)	120kg (265lbs)	90kg (198lbs)	-
Cellmaterial	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	-
Överdragsmaterial	Polyuretanbelagd polyester	Polyuretanbelagd polyester	Polyuretanbelagd polyester	-

Januari 2020 Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.

© Arjo, 2020

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.se