

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ KOUPELOVÝ VOZÍK

# Bolero



Bolero je výškově nastavitelný koupelový vozík, který lze použít pro přepravu, přesuny do vany a zpět a pro koupání závislých klientů v zakloněné poloze anebo vleže.

## GALERIE MOBILITY ARJO



D



E

### Navrženo pro podporu pracovních postupů během koupání

Výškově nastavitelné lehátko je opatřeno polstrovaným povrchem zajišťujícím pohodlí při ležení. Jediné pečující osobě umožňuje bezpečně a efektivně přesunout klienta přímo z lůžka nebo koupelny do vany a zpět bez nutnosti ručního zvedání a dodatečných přesunů. Tím nabízí efektivní a ergonomičtější alternativu ke koupání na lůžku.

### Symetrický design a skládací matrace poskytují flexibilitu

Vozík Bolero má symetrický design, který umožňuje použít oba konce jako opěrku zad podle orientace klientova lůžka. Spolu se skládací matrací pro snazší skladování nabízí vozík Bolero flexibilitu a také možnost přizpůsobení různým potřebám klientů, pečujících osob i zařízení.

### Podporuje celou řadu potřeb různě vysokých klientů

Nastavitelná opěrka zad dovoluje nastavení od plně vzpřímené polohy až po plně zakloněnou. Délku lehátka lze také zkrátit nastavením opěrky hlavy a nohou pro optimálnější použití u klientů s menší výškou.

# Klíčové funkce

Vozík Bolero je nabízen ve dvou verzích: hydraulické nebo elektrické.

## RUKOJETI ŘÍZENÍ

Pro řízení koupelového vozíku během jízdy

## KRČNÍ POLŠTÁŘ

Pro pohodlí a oporu hlavy

## MĚKKÁ MATRACE

Pro větší pohodlí klienta

## SKLOPNÁ POSTRANICE (VOLITELNÁ)

Pro zvýšení bezpečnosti klienta, snížení rizika pádu a zvýšení jeho pohodlí

## NOŽNÍ BRZDA

Manuálně aktivovaná na všech kolečkách

## VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ

Pro ergonomickou pracovní polohu

## POLOHOVACÍ RUKOJETI

Pro manévrování u lůžka/vany a polohování koupelového vozíku

## RUČNÍ OVLADAČ

Pro nastavení výšky vybavení

## MADLA

Pro bezpečnost a oporu rukou klienta

## OPĚRKA HLAVY A NOHOU

Nastavitelná pro zkrácení délky lehátka

## NOŽNÍ VÁHA (VOLITELNÁ)

Pro snadné vážení klientů




INFORMACE O VÝROBKU	BOLERO ELEKTRICKÝ	BOLERO HYDRAULICKÝ
Max. hmotnost pacienta/klienta, SWL	136 kg	136 kg
Celková hmotnost zvedáku (zvedák + váha)	78 kg	69 kg
Celková šířka	860 mm	860 mm
Celková šířka lehátka	446 mm	446 mm
Celková délka při rozložení naplocho	1 970 mm	1 970 mm
Celková délka při složení (skladování)	1 000 mm	1 000 mm
Min. výška lehátka	515 mm	515 mm
Max. výška lehátka	1 080 mm	1 015 mm
Min. výška vybavení	1 165 mm	1 150 mm
Max. výška vybavení	1 730 mm	1 650 mm
Max. šířka podvozku	1 000 mm	1 000 mm
Min. šířka podvozku, šířka rozvoru	499 mm	499 mm
Max. délka podvozku	823 mm	823 mm
Poloměr otáčení (naplocho)	2 030 mm	2 030 mm
Rozsah zdvihu	565 mm	500 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Bezpečnostní pásy	Pro zajištění bezpečnosti klienta. Vozík Bolero je vybaven dvěma bezpečnostními pásy – jedním pásem přes hrud a druhým přes boky. Používejte podle potřeby klienta.
Baterie a nabíječka 24 V	Systém rychle vyměnitelných baterií se dvěma bateriemi, který zajišťuje, že vozík je vždy připravený k použití.
Postranice (volitelná)	Pro snížení rizika pádu klienta z lehátka a zvýšení jeho pohodlí.
Váha (volitelná)	Nohou ovládaná váha pro vážení klienta.

## PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modrá plocha znázorňuje minimální pracovní prostor, který je nezbytný pro personál, aby mohl používat mechanické pomůcky ergonomickým způsobem z jedné strany.
- Světle modrá oblast znázorňuje požadované rozšíření pracovního prostoru, které zajistí odpovídající přístup pro práci z obou stran.

Další informace o požadavcích na instalaci naleznete na portálu Architect na webu [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

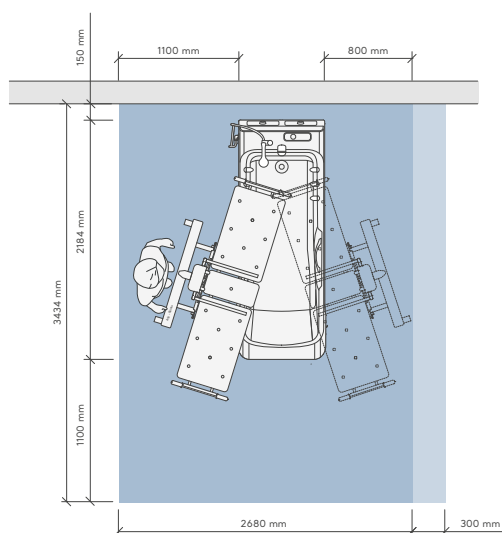

Březen 2023. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhraujeme si právo provádět změny designu a specifikací bez předchozího upozornění.

© a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo Czech Republic s.r.o. • Na Strži 65/1702 • 140 00 Praha 4 • Czech Republic • +420 225 092 388

Arjo.A00651.1.0.CZ.CS

**arjo**