

HYGIEJNESTOL TIL UNIVERSALBRUG

Carendo®



DSDC-produktakkreditering
vurderingsklasse 1B

Carendo®-universalhygiejnestolen fremmer effektive hygiejne- og badrutiner inden for en enkelt forflytning, samtidig med at den gør det muligt for plejepersonalet at opretholde en behagelig arbejdsstilling hele processen igennem.

Designet til Carl og Doris



Værdig pleje

Care Raiser™-funktionen løfter plejemodtagerens underkrop for at give adgang til at udføre intime hygiejneopgaver, samtidig med at plejemodtagerens værdighed opretholdes.

Strømlinet hygiejnerutine

Den er udviklet til at gøre det muligt for en enkelt person fra plejepersonalet at udføre hele hygiejnerutinen, herunder påklædning og afklædning, toiletbesøg, brusebad og andre hygiejneopgaver, med en enkelt forflytning.

Muliggør bedre arbejdsstillinger

Det er blevet påvist, at med Carendo indtager plejepersonalet 77 % neutral rygstilling under hygiejneopgaver sammenlignet med blot 48 %, når de vasker en plejemodtager i sengen.*

*Kilde: Knibbe JJ, Knibbe NE & Heitink DEBL (2016).

Du kan læse mere på www.arjo.dk

arjo
with people in mind

Vigtigste funktioner

HØJDE-JUSTERBAR

Gør det muligt for plejepersonalet at opnå den foretrukne arbejds højde i hele hygiejnerutinen.

RYGLÆN I FULD LÆNGDE

HÅNDHOLDT STYREENHED

NØDSTOP

NØDSÆNKNING




SOLIDE ARMLÆN

CARE RAISER™

Giver mulighed for at løfte plejemodtagerens underkrop forsigtigt ved tryk på en knap, så der er let adgang til at udføre intime hygiejneopgaver.

PLADSKRAV

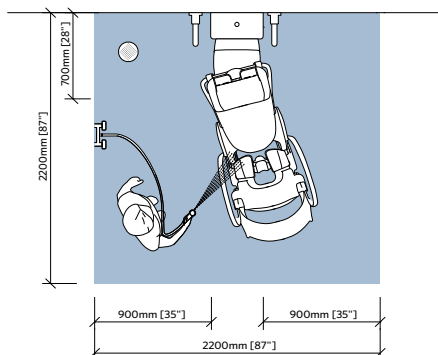

Påkrævet arbejdsområde, der er nødvendigt for at lette hygiejne- og forflytningsaktiviteter, samtidig med at det giver tilstrækkelig adgang til plejemodtager, udstyr og assisterende plejepersonale.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sikker arbejdsbelastning (SWL) | 136 kg (300 lb) |
| Vægt | 64 kg (141 lb) |
| Min. længde, laveste opretstående position | 875 mm (34 ½ in) |
| Maks. længde, højeste tilbagelænet position | 1.510 mm (59 ½ in) |
| Samlet bredde | 640 mm (25 ¼ in) |
| Stel, bredde | 640 mm (25 ¼ in) |
| Stel, bredde mellem ben | 508 mm (20 in) |
| Stel, længde | 865 mm (34 in) |
| Min. ryglæns højde, laveste tilbagelænet position | 1.020 mm (40 ⅞ in) |
| Maks. ryglæns højde, øverste opretstående position | 1.550 mm (61 in) |
| Min. armlæns højde, laveste tilbagelænet position | 775 mm (30 ½ in) |
| Maks. armlæns højde, øverste opretstående position | 1.320 mm (52 in) |
| Sædehøjde, laveste/højeste position | 510 mm (20 ⅞ in) / 1.050 mm (41 ⅞ in) |
| Løfteslag (sæde) | 550 mm (21 ⅞ in) |



Dementia Services Development Centre på University of Stirling har påtaget sig at evaluere dette produkt og har vurderet udformningen i forhold til demensdesign-principper samt produktets anvendelighed i et demensinkluderende miljø. For at gøre identifikationen nemmere er produktets anvendelighed klassificeret ved hjælp af et nummer med tilhørende forklaring inden for de angivne vurderinger. Logoet med teksten DSDC Accredited Product tildeles ud fra det enkelte produkts egenskaber og farvepalet. Denne akkreditering omhandler ikke fremstillingen af eller den endelige anvendelse af produktet. Der er gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at vurderingerne afspejler produktets anvendelighed og tilsigtede anvendelse på tidspunktet for trykning, og DSDC kan derfor ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af det endelige produkt, dets ydeevne eller grænsefladen til andre produkter eller overflader. For at et miljø kan anses som værende 'demensinkluderende' eller 'demensvenligt', skal der omhyggeligt tages hensyn til specifikationerne for tilgrænsende overflader, deres ydeevnespecifikation (eksempelvis lysrefleksionsværdi), slipmodstand og mønsteranvendelse) samt deres anvendelighed i forhold til tilsigtet anvendelse.

TILBEHØR

- Rygpudd
- Nakkepudd
- Siddepudd
- Bækken og bækkenholder
- Sikkerhedssele
- Overfladedesinfektionsmiddel
- Batteri og batterioplader

Du kan læse mere på www.arjo.dk