

## CAMILLA DE DUCHA

# Carevo®



Con los sistemas patentados Flexi Zone y Ergo-Access Area

La camilla de ducha Carevo® está diseñada para proporcionar una experiencia de ducha cómoda a los pacientes y residentes que necesitan permanecer en posición acostada, al mismo tiempo que permite al cuidador trabajar de forma eficiente y ergonómica.

Diseñada para pacientes como Emma



### **Diseñada para la comodidad del paciente**

La superficie blanda y el sistema patentado Flexi Zone están diseñados para aumentar la comodidad del paciente o residente durante la aplicación de los cuidados higiénicos.

### **Panel de control universal**

Hay paneles de control marcados de forma clara en los dos laterales y en el cabecero de la camilla, de modo que el cuidador pueda acceder a ellos fácilmente.

### **Fomento de la seguridad del paciente**

Las asas de confort proporcionan apoyo al residente o paciente y aumentan su sensación de seguridad a la vez que fomentan su participación.

### **Facilita una mejor postura de trabajo**


La altura regulable y el sistema patentado de zonas Ergo-Access permiten al cuidador acercarse al residente manteniendo una postura de trabajo cómoda, de manera que se reduce la sobrecarga física estática.\*

\*Fuente: Knibbe NE, Knibbe JJ & Waaijer E (2013)

# Principales características



## REQUISITOS DE ESPACIO

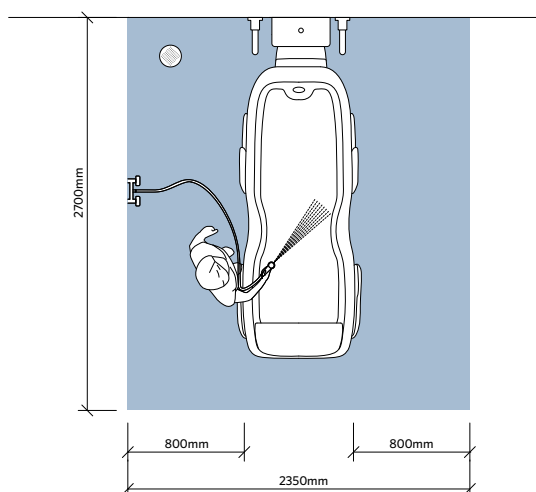

El área azul indica la extensión de la superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas de higiene y traslado, proporcionando un acceso adecuado para el residente, el equipo y el cuidador.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Carga de trabajo segura (CTS) = paciente + agua	200 kg
Peso máx. del paciente	182 kg
Peso (incluido el colchón)	82 kg
Largo total	2005 mm
Anchura (camilla)	586 mm
Anchura total (incl. soportes laterales)	759 mm-888 mm
Longitud del chasis	1211 mm
Anchura del chasis	700 mm
Altura, posición más alta desde camilla hasta el suelo	955 mm
Altura, posición más baja desde camilla hasta el suelo	605 mm
Rango de elevación	350 mm

## ACCESORIOS

- Cojín para cabeza
- Almohada en cuña
- Colchón
- Manguera de drenaje
- Cargador y batería
- Desinfectante de superficies

Para obtener más información, visite el sitio web [www.arjo.es](http://www.arjo.es)