

DOUCHEWAGEN

Carevo®



Met  
gepatenteerde  
Flexi Zone en  
Ergo-Access  
Areas

De Carevo® douchewagen is speciaal ontworpen om een comfortabele douche-ervaring te bieden aan zorgvragers die liggend verzorgd moeten worden, terwijl de zorgverlener efficiënt en ergonomisch kan werken.

Speciaal ontworpen voor Emma



#### **Ontworpen voor comfort**

Het zachte materiaal van de matras en de gepatenteerde Flexi Zone verbeteren het comfort van de zorgvrager tijdens de doucheroutines.

#### **Universeel bedieningspaneel**

De duidelijk gemarkeerde bedieningspanelen bevinden zich aan beide zijden en aan het hoofdeinde van de wagen. Zo zijn ze altijd binnen handbereik van de zorgverlener.

#### **Bevordert de veiligheid**

De comforthandgrepen bieden de zorgvrager steun en een groter gevoel van veiligheid. De handgrepen stimuleren de zorgvrager ook om actief mee te helpen tijdens de doucheroutines.

#### **Bevordert een betere werkhouding**

Dankzij de hoog-laag verstelling en de versmalling van het liggoppervlak bij de lenden van de zorgvrager, kan de zorgverlener altijd dichtbij en op een verantwoorde hoogte de cliënt begeleiden of ondersteunen. Hierdoor wordt de statische overbelasting voor de zorgverlener beperkt.\*

\*Bron: Knibbe NE, Knibbe JJ & Waaijer E (2013)

# Belangrijkste kenmerken

## GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

## GEÏNTEGREERDE HOUDERS VOOR DOUCHEKOP

## ZIJSTEUNEN

Neerklapbaar en in bredere stand te plaatsen.

## ZACHT MATRAS

Eenvoudig te verwijderen.

## FLEXI ZONE

Verhoogt het comfort en biedt drukverdeling van de stuit en heupen dankzij de flexibele profilering in de bodemplaat.

## ZACHT HOOFDKUSSEN

## VERSTELBARE RUGSTEUN

## ERGO-ACCESS AREA

Verbeterd de werkhouding doordat de zorgverlener dichtbij de zorgvrager kan staan.


## GEÏNTEGREERDE BEDIENINGSPANELEN

## ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

## REMMEN OP ALLE VIER DE ZWENKWIELEN



## BENODIGDE RUIMTE

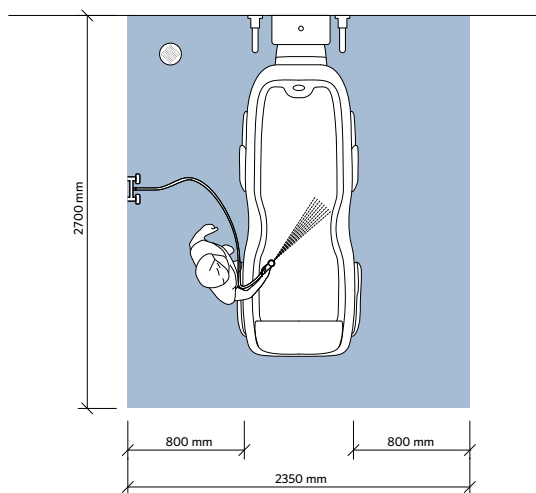

Het blauwe gebied geeft de werkruimte aan die nodig is voor het uitvoeren van hygiëne- en transferactiviteiten, waarmee een goede toegankelijkheid wordt geboden voor de zorgvrager, hulpmiddelen en zorgverlener.

## PRODUCTINFORMATIE

Veilige tilbelasting (SWL) zorgvrager + water	200 kg
Max. gewicht zorgvrager	182 kg
Gewicht (incl. matras)	82 kg
Totale lengte	2005 mm
Breedte (platform)	586 mm
Totale breedte (incl. zijsteunen)	759 mm - 888 mm
Lengte van onderstel	1211 mm
Breedte van het onderstel	700 mm
Max. hoogte douchewagen	955 mm
Min. hoogte douchewagen	605 mm
Tilbereik	350 mm

## ACCESSOIRES

Hoofdkussen

Wigkussen

Matras

Afvoerslang

Accu en acculader

Desinfectiemiddel

Ga voor meer informatie naar [www.arjo.nl](http://www.arjo.nl)