

FAUTEUIL DE DOUCHE ET D'HYGIÈNE

Carino®



Équipé d'un châssis incurvé et de repose-jambes escamotables brevetés

Conçu pour réduire le nombre de transferts nécessaires pour doucher et/ou effectuer des soins d'hygiène, Carino® permet à un seul soignant d'effectuer les tâches d'hygiène quotidiennes, telles que la toilette, la mise aux toilettes et les soins des pieds.

Conçu pour Barbara et Carl



Hauteur ajustable

Le réglage en hauteur combiné à un châssis incurvé breveté assure un positionnement et un soutien confortables pour le patient ou le résident, tout en permettant au soignant d'atteindre sa hauteur de travail préférée à tout moment.

Facilite efficacement les routines de douche

Le patient ou le résident peut rester assis dans le Carino pendant qu'il est transféré de/vers la chambre. Il peut rester assis également lors de la douche, la toilette et d'autres tâches d'hygiène. Ceci réduit ainsi le nombre de transferts nécessaires au quotidien lors des routines d'hygiène.

Soins individualisés

Avec Carino, la douche et autres soins d'hygiène peuvent être effectués par un seul soignant, facilitant ainsi les interactions personnelles individuelles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

arjo
with people in mind

Principales caractéristiques

CHASSIS INCURVÉ

Le châssis incurvé breveté apporte soutien et confort en position assise à n'importe quelle hauteur.

ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES

REPOSE-JAMBES ESCAMOTABLES

Les repose-jambes brevetés s'ouvrent afin de laisser toute la place nécessaire pour les soins d'hygiène intime.

REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLES PIVOTANTS

Se rabattent sous le fauteuil d'hygiène lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

REPOSE-TÊTE

DOSSIER PLEIN


ARRÊT D'URGENCE



ACCESSOIRES

- Coussin de dos
- Oreiller
- Coussin d'assise
- Bassin avec couvercle
- Adaptateur pour cuvette WC
- Sangle de sécurité
- Chargeur de batterie et batterie
- Désinfectant de surface

ESPACE REQUIS

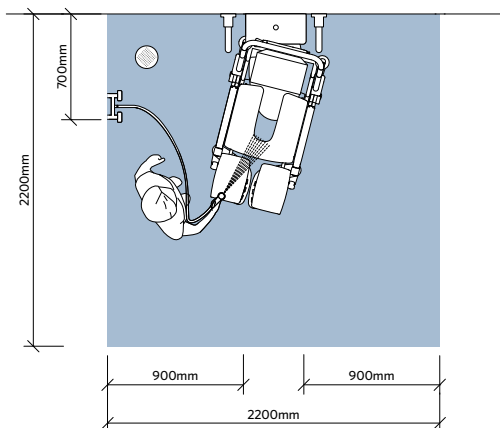

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible (CMA)	140 kg
Poids	42 kg
Longueur min., position la plus basse	881 mm
Longueur max., position la plus haute	1 310 mm
Largeur totale	630 mm
Largeur du châssis	624 mm
Châssis, entre les pieds	424 mm
Longueur du châssis	857 mm
Hauteur min. du dossier, position la plus basse	1 240 mm
Hauteur max. du dossier, position la plus haute	1 555 mm
Hauteur du siège, position la plus basse/haute	450 mm/1 050 mm
Course de levage (siège)	600 mm

Superficie de travail nécessaire pour faciliter les activités de soins d'hygiène et de transfert tout en offrant un accès suffisant pour le résident, l'équipement et le personnel soignant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr

©Arjo, octobre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Arjo.A00013.1.FR

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
 Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

arjo