




INTEGRERAT SYSTEM FÖR PATIENTER MED OMFATTANDE VÅRDBEHOV

Citadel®

Citadel patientvårdssystem

Patientvårdssystem

Citadel patientvårdssystem*, som är byggt på en gemensam plattform och utformat för övergång från ett ej integrerat system till ett integrerat, ger flexibel patientvård för sjukhus som kräver att sängramar och terapeutiska madrasser inom intensivvård, intermediärvård och medicin/kirurgi är säkra, trygga och effektiva.

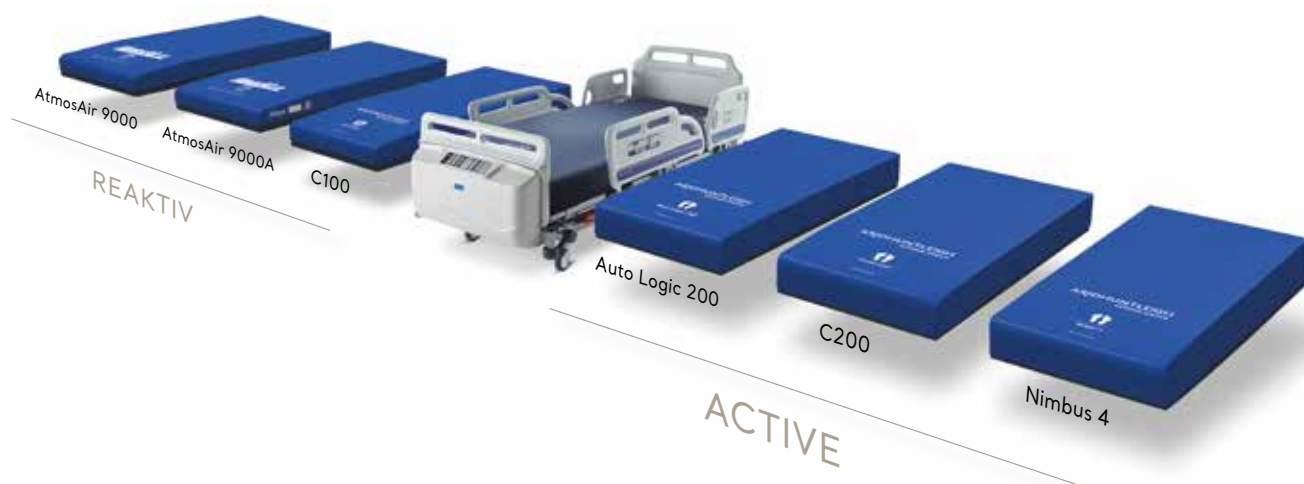

Ett system. Flera typer av akutvård.

Sängramen är centrum för vården av patienten vid sjukhusvistelsen. Det är ett mycket viktigt hjälpmedel som kan hjälpa till att främja rehabilitering och samtidigt medverka till färre patient- och personalskador. Både sängramen och madrassen behöver fungera i harmoni överallt på ett sjukhus och vid olika sjukdomstillstånd för att tillhandahålla stöd för patienter och vårdpersonal som använder dem.

Citadel har konstruerats och tillverkats för detta syfte.



Mobilitetslösningar för IVA

Avancerad madrassfunktion och mångsidig sängrams Anpassning ger en flexibel miljö för att främja rehabilitering i sängen och sittande på sängkanten om patienten klarar det.



**INTERMEDIÄRVÅRDS-
OCH MEDICIN-/
KIRURGIIVDELNINGAR**



INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR

Val av madrasser

Aktiva terapeutiska madrasser erbjuder adaptiv vård för högriskpatienter.

C100 Patientbehandlingssystem

- Konstant lågt tryck
- Justerbara tryckinställningar för var och en av de fyra sektionerna
- Vända och hålla patienten
- Röntgenhylsa

C200 Patientbehandlingssystem

Fördelarna med C100 med ytterligare funktioner för patienter med begränsad till noll rörlighet:

- Pulsationsterapi och växlande tryckterapi
- Kontinuerlig 20° vändning för att hjälpa vårdpersonalen vid ändring av patientens läge

Statiska terapeutiska madrasser tillhandahåller vård för medel- till högriskpatienter med större rörlighet.

AtmosAir® 9000

- Ersättningsmadrass
- Förebygger eller behandlar hudskador
- Self Adjusting Technology™

Skin IQ®

- Skin IQ-familjen med aktiva madrassöverdrag med toppmodern luftflödesteknik med undertryck (Negative Airflow Technology) för att kontinuerligt ta bort överskottsfukt från huden på överdraget för att hantera mikroklimatet.

Prisvärd flexibilitet



Citadel patientvårdssystem är utformat för att erbjuda sjukhus en prisvärd sängramslösning som tillgodoser den enskilda patientens behov vad gäller mobilitet och tryckavlastning.



Citadel patientvårdssystem erbjuder sängramsfunktioner som behövs på medicin-/kirurgi-, intermediärvårds- och intensivvårdsavdelningar

Öppen arkitektur utformad för att passa alla madrasser*

Citadel-sängramens öppna arkitektur gör att både Arjo-madrasser och de madrasser sjukhuset redan har kan användas*.

* Använd alltid en madrass av rätt storlek och typ. Madrasser som inte passar kan medföra risker. Se bruksanvisningen för kompatibilitetsvägledning rörande specifika madrasser.


Säkerhetsfunktioner ingår. Alltid.

Arjo anser att varje patient och vårdpersonal ska kunna dra nytta av viktiga säkerhetsfunktioner.



Låghöjdsintegration främjar säkerhet och mobilitet

Integrerade terapisystem i kombination med låg sänghöjd ger vårdpersonal och patienter en stor fördel när de påbörjar tidig mobilisering.

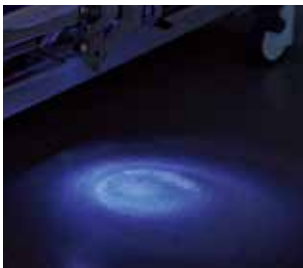

Nattlampa



Klämskyddssystem



SafeSet

Fördelarna med integration

Integration ger viktig kommunikation mellan sänggramsystemet och patientvårdssystemet som levererar:

- Hjärt-/lungräddning med en knapp ställer madrassen och ramen samtidigt i hjärt-/lungräddningsläge
- Automatisk tryckkompensation i sättesektionen när huvudändan justeras
- Begränsar vändning när sängens huvudända har en vinkel som överstiger 30 grader
- Begränsar vändning när en eller flera sidogrindar är nedfällda

Dessutom måste hopparade vårdssystem och sängar erbjuda skräddarsydd madrass- och ramdesign för att förhindra klämrisker som kan uppstå när ram och madrass från två olika leverantörer används.

En gemensam uppsättning säkerhetsfördelar inbyggda i sängramen:

- Meddelande om patientrörelse via VariZone-systemet för detektering av patientrörelser
- Golvet längs sängens sidor lysas upp av nattlampan under sängen
- Kan hjälpa till att förhindra att objekt eller lemmar fastnat under sängramen som ett resultat av klämskyddssystemet. Citadel kan också levereras med det visuella varningssystemet SafeSet® som tillval.

Standardiserar effektiviteten

Citadel patientvårdssystem ingår i Arjos sängsortiment och baseras på en grunddesign som är byggd på en gemensam plattform.

Oavsett vilken sänggram som valts för sjukhuset kan du vara säker på att varje system bygger på en enhetlig design som hjälper dig att hantera säker patientvård.



ENTERPRISE®
Sänggram



CITADEL
Sänggram



CITADEL PLUS
Bariatrisk sänggram

Tillval: Finns nu med ett intuitivt elektriskt drivhjul

IndiGo är ett eldrivet femte hjul som gör det enkelt för vårdpersonal att hantera transporter med bara en lätt beröring – vilket gör jobbet både säkrare och enklare. IndiGo finns alltid tillgängligt och är inbyggt direkt i din Citadel- eller Enterprise-säng. Det gör att bara en sak förändras under vårdpersonalens dag: arbetsinsatsen som krävs för att flytta sängen.

Läs mer om IndiGo: Arjo.se/indigo



Upp till
60 %



mindre
belastning
i uppförslutning¹

Upp till
70 %



mindre
belastning
i nedförslutning¹

Enklare underhåll

Den gemensamma grunddesignen för hela det medicinska sänggramssortimentet underlättar underhåll, utbildning och lagerhållning av delar.



Praktisk infektionskontroll

De lättillgängliga komponenterna innebär enkel rengöring och desinficering.



Manövrerbarhet och säkerhet

Alla sänggramar från Arjo är konstruerade för att vara enkla att manövrera. De levereras dessutom med säkerhetsfunktioner och manöverpaneler som gör att du slipper fundera på hur du ska ge patienten säker vård.

Allt för att göra ditt liv enklare

Du kan välja produkter efter det värde de ger. Men det värdets verkliga nytta kan bara förverkligas när du se bortom produkterna ... Det handlar också om företaget och hur det stödjer dina och ditt sjukhus behov. Arjo erbjuder följande för att förenkla arbetet:

Flexibla affärsmodeller

Vi erbjuder inköp, leasing och uthyrning. För att göra det än bättre för dig erbjuder vi samma produkter oavsett vilken affärsmodell du väljer.

Kliniskt stöd

Kliniskt stöd för att se till att rätt produkter väljs för patienterna.

Kunskap om patientvård

Att välja en partner med lång och framgångsrik historia inom patientvårdsbranschen är ett förnuftigt beslut.

Arjos mångsidiga plattform för sjukvårdssängar är konstruerad för livet, för valfrihet och för värde.

Vi anser att en bra sjukhussäng ska:



Kliniskt fokus

Ge kliniska fördelar för patienterna
Vara enkel och intuitiv att använda



Fokus på infektionskontroll

Vara lätt att rengöra



Säkerhetsfokus

Erbjuda en säker miljö för patienten
Säker för vårdpersonalen att använda



Servicefokus

Vara enkel att serva och underhålla
Vara stark, tålig och hållbar



Citadel demonstrationsvideo



IndiGo demonstrationsvideo

*Citadel patientvårdssystem avser kombinationen Citadel medicinsk sänggram och Citadel Patient Therapy-system

Referens:

1. Cohen, M. et al. (2010) PHAMA Patient Handling And Movement Assessment. The Facility Guidelines Institute.

Oktober 2019 Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.se