



Mehr
Wohlbefinden
und Sicherheit für
Pflegebedürftige
und Pflegekräfte

BADEWANNE CLASSIC LINE® 2 VON ARJO

Höhenverstellbare Lösung für begleitetes Baden

Mehr Sicherheit und einfacheres Baden für Pflegebedürftige und Pflegekräfte



Nicht selten wird die hygienische Versorgung der Bewohner/Patienten **von Pflegekräften** als zeitaufwendige Aufgabe mit hohem Verletzungsrisiko wahrgenommen. Die Badewanne Classic Line™ 2 ist höhenverstellbar, sodass die Pflegekraft eine bessere Arbeitshaltung einnehmen kann und mögliche Haltungsschäden reduziert werden. Dank des geringeren Verletzungsrisikos können sich Pflegekräfte besser auf die individuellen Bedürfnisse bei der Pflege jedes Pflegebedürftigen konzentrieren.



Aufgrund der Intimität beim Baden, kann es **für Pflegebedürftige** unangenehm sein oder sogar zum Verlust der Würde führen. Die Badelösungen von Arjo werden diesen Herausforderungen gerecht, da sie den Pflegekräften ermöglichen, bei der hygienischen Versorgung einen personenzentrierten Ansatz zu verfolgen.

Verbesserte hygienische Versorgung der Bewohner

Wellness-Vorteile

- Das Eintauchen des gesamten Körpers in warmes Wasser (etwa 40 Grad) kann sich positiv auf die Stimmung auswirken und Müdigkeit, Stress, Anspannung und Angst reduzieren.¹

Klinische Vorteile des Badens in warmem Wasser

- Baden in warmem Wasser (37 bis 39 Grad) hat sich bei der Behandlung von Kniearthrose als wirksam erwiesen und reduziert über einen längeren Zeitraum Schmerzen, wodurch die Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten gesenkt werden kann. Des Weiteren trägt das Baden zu funktionellen Verbesserungen bei.²
- Die passive Körpererwärmung durch ein warmes Bad (15 halbstündige Badevorgänge über drei Wochen) wirkt sich positiv auf die Schlafmuster von Frauen mit Fibromyalgie aus.³



Neu: Die Classic Line 2

Die Badewanne Classic Line 2 von Arjo ist Teil einer vollständigen Badelösung, die das Wohlbefinden des Bewohners/ Patienten erhöht und gleichzeitig die Sicherheit der Pflegekräfte fördert.

Das Baden eines Bewohners oder Patienten in einer höhenverstellbaren Badewanne kann die statische Überbelastung des Rückens der Pflegekraft im Vergleich zur Verwendung einer nicht höhenverstellbaren Badewanne⁴ um über 15 % senken.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Die Classic Line 2 verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen, um dem Pflegebedürftigen ein entspanntes und sicheres Baderlebnis zu ermöglichen. Sie beinhalten einen dreifachen Verbrühschutz, eine Wassertemperaturanzeige, einen Not-Aus-Schalter und eine Notabsenkung sowie eine Funktionssperre des Bedienfelds. Die Badewanne umfasst ein optionales integriertes Desinfektionssystem und eine regelmäßige, automatische Wasserspülung, welche für einen zusätzlichen Schutz des Bewohners sorgen.

Mehr Wellness-Vorteile

Das gemütliche Design trägt zu einem angenehmen Baderlebnis bei. Optionale Funktionen, wie das Luftperlbad (Air Spa™), können das Baderlebnis noch weiter verbessern, indem sie dem Pflegebedürftigen Entspannung und eine Massage bieten. Dies fördert die Durchblutung und das Wohlbefinden.

Verwendung durch eine einzelne Pflegekraft


Die Classic Line 2 ist mit dem Arjo-Sortiment aus Transferliftern kompatibel und ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, optimierte Badevorgänge für Personen unterschiedlicher funktioneller Mobilität durchzuführen. Mit dieser höhenverstellbaren Badewanne wird das Risiko einer statischen Überbelastung des Rückens der Pflegekraft reduziert, wodurch sie sich besser auf die Pflege des Pflegebedürftigen konzentrieren kann.

Ausstattungsmerkmale

DREIFACHER VERBRÜHSCHUTZ
Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur die Sicherheitswerte überschreitet.

NOTABSENKUNG (OPTIONAL)
Im Falle eines Stromausfalls kann die Badewanne abgesenkt werden, um den Bewohner sicher aus der Badewanne zu transferieren.

LUFTPERLBAD THERAPIE (AIR SPA) (OPTIONAL)
Das Luftperlbad (Air Spa™) Therapiesystem bläst mit variabler Intensität Luft durch 10 strategisch positionierte Düsen in das Badewasser und bietet der badenden Person Entspannung und eine Massage.

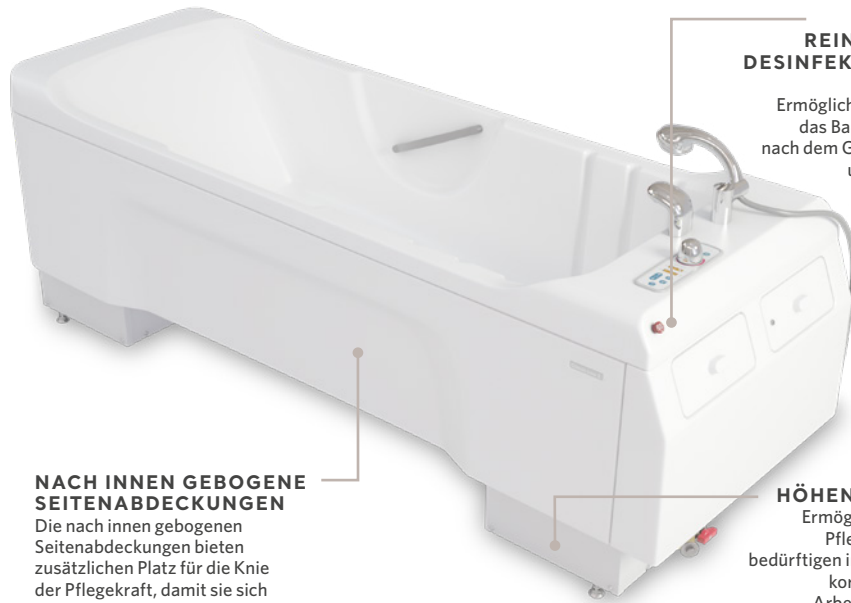

INTEGRIERTES REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSSYSTEM (OPTIONAL)
Ermöglicht es der Pflegekraft, das Bad und die Hilfsmittel nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren.

NACH INNEN GEBOGENE SEITENABDECKUNGEN
Die nach innen gebogenen Seitenabdeckungen bieten zusätzlichen Platz für die Knie der Pflegekraft, damit sie sich so nah wie möglich am Pflegebedürftigen bewegen kann.

HÖHENVERSTELLBAR
Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Pflegebedürftigen in einer ergonomisch korrekten und sicheren Arbeitshaltung zu baden.

Regelmäßige, automatische Wasserspülung

Alle 24 Stunden werden die Rohrleitungen mit Wasser durchgespült, um stehendes Wasser zu vermeiden und mögliches Bakterienwachstum zu reduzieren.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE

In Kombination mit einem passiven Lifter oder Badelifter ist die Badewanne für Albert, Barbara, Carl, Doris und Emma geeignet.



Badelösungen für Bewohner mit unterschiedlicher funktioneller Mobilität

Transferlifter

Transfer zum und vom Badelifter



Sara® Steady



Sara® Flex



Maxi Sky®

Badelifter

Transfer in und aus der Badewanne



Alenti®



Miranti®

Badewanne



Classic Line 2

1. Goto et al (2014). Physical and mental effects of bathing: A Randomised Intervention Study. Evidence-Based Complimentary and Alternative Medicine. Volume 2018, Article ID 9521086. 2. Branco M, Rêgo NN, Silva PH et al. Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med. 016;52(4):422-30. 3. Silva A, Queiroz SS, Andersen ML, et al (2013). Passive body heating improves sleep patterns in female patients with fibromyalgia. Clinics (Sao Paulo) 68(2): 135-139. 4. Knibbe NE, Knibbe JJ (1996). Postural Load of nurses during bathing and showering of patients: Results of a laboratory Study. American Society of Safety Engineers. November. 37-39.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“. www.arjo.com

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hügendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56
www.arjo.de