



TYPHOON™, TORNADO™ OG NINJO™

Bekkenspylere

Dokumentert effekt¹ som bidrar til å redusere infeksjoner i helsevesenet

Håndtering av menneskelig avføring er svært viktig i kampen mot sykehusinfeksjoner. Bruk av bekkenspylere til å tømme, spyle, rengjøre og desinfisere bekkener, urinflasker og andre beholdere med menneskeavføring kan redusere risikoen for krysskontaminering betydelig, og støtter arbeidet for å begrense og forebygge nosokomiale infeksjoner.¹

En studie fra 2018 viser at våre bekkenspylere Ninjo, Tornado og Typhoon effektivt fjerner mer enn 99,99 % av *C. difficile*-sporer.²

Andre fordeler som berøringsfri betjening, funksjonelt tilbehør og et utvalg holdbare overflatematerialer gjør Arjo bekkenspylere ideelle som en del av infeksjonskontrollsystemet ved din institusjon.



Sykehusinfeksjoner er en utbredt og global bekymring

4 %

Innlagte sykehuspasienter i en amerikansk studie, som fikk minst én sykehusinfeksjon.³

Over 2,6 millioner

Årlig antall pasienter med påviste sykehusinfeksjoner EU/EØS.⁴

9,1 %

Total utbredelse av sykehusinfeksjoner i sørøst-asiatiske land.⁵

Det er dokumentert at Arjo bekkenspylere fjerner **99,99 %** av C. difficile-sporer.²

Arjo bekkenspylere

Sterke allierte i kampen mot kryssinfeksjoner



Typhoon

Kjent for VIP-glassdøren (View in Process) som gjør det mulig å se fremdriften når som helst i løpet av syklusen. Typhoon er også utstyrt med skyvedør og automatisk roterende holder som standard.



Tornado

Tornado er utstyrt med det forbedrede programvaresystemet PACS350, og tilbyr prosesstyring og sporingsfunksjon for sporbarhet.

Ninjo

Ninjo er tilgjengelig i et utvalg modulbaserte enheter og overflatematerialer, og gir fleksibilitet til å utforme et system som passer dine ønsker og behov.





Ninjo

Tiltalende, moderne design kombinert med enestående desinfiseringsytelse. Ninjo gir effektive rengjørings- og desinfiseringsresultater og har i tillegg svært fleksibel utforming.



PRODUKTINFORMASJON

NINJO	Frittstående	Under benk	Veggmontert modell
Vekt	90 kg	70 kg	70 kg*
Mål (BxDxH) i mm	450x580x1320	450x580x1320	450x580x1320*
Støynivå		53 db (A)	
Elektrisk tilkobling		230V, 1N, 50 Hz, 1x16A	
Energiforbruk		0,16 kWh/syklus	
Vannforbruk			Økonomiprogram 11 liter/syklus ±10 % Normalprogram 18 liter/syklus ±10 %

* Veggfester og ramme er ikke inkludert

KJØLEVIFTE

Innebygde kjølevifter avkjøler beholderne med HEPA-filtrert luft (H13).

VISNING AV A₀-VERDI

Desinfiseringsnivået vises tydelig på A₀-verdidisplayet, slik at brukeren enkelt kan følge med på desinfiseringsprosessen.

VISNING AV GJENSTÅENDE TID

Visning av gjenstående tid gjør at personalet kan kontrollere fremdriften i syklusen, planlegge arbeidet mer effektivt og slippe å vente på at prosessen skal bli ferdig.

DESINFISERING AV RØRSYSTEM (PSD)

Denne funksjonen desinfiserer hele rør- og dysesystemet på slutten av hver syklus, slik at risikoen for kontaminering reduseres.

FLEKSIBLE DESIGNALTERNATIVER

Velg finish i rustfritt stål eller fargerik polymerplast, og moduler for frittstående montering, benkemontering eller veggmontering.



Tornado

Tornado er en kraftig bekkenspyler for tømning, rengjøring, termisk desinfisering og avkjøling av beholdere for menneskeavføring. De automatiske betjeningsfunksjonene bidrar til å redusere risikoen for krysskontaminering, og gir svært effektive vaske- og desinfiseringsresultater.

PRODUKTINFORMASJON		
TORNADO	Frittstående	Under benk
Vekt	100 kg	120 kg
Mål (BxDxH) i mm	450x580x1320	900x620x870
Støynivå		53 db (A)
Elektrisk tilkobling		230V, 1N, 50 Hz, 1x16A
Energiforbruk		0,16 kWh/syklus
Vannforbruk	Økonomiprogram 11 liter/syklus ±10 % Normalprogram 18 liter/syklus ±10 % Intensivprogram 25 liter/syklus ±10 %	



KJØLEVIFTE

Innebygde kjølevifter avkjøler beholderne med HEPA-filtrert luft (H13).

A₀-VERDIVISNING OG KONTROLL

Desinfiseringsfasen kan også kontrolleres etter enten tid eller temperatur, eller etter valgt A₀-verdi.

AUTOMATISK DØRFUNKSJON

Tornado støtter berøringssviktige hygienerutiner via IR-sensor- eller fotpedalbetjening av døren som tilleggskutstyr.

DESINFISERING AV RØRSYSTEM (PSD)

Denne funksjonen desinfiserer hele rør- og dysesystemet på slutten av hver syklus, slik at risikoen for kontaminering reduseres.

PROSESSREGISTRERING

Gir sporingsmulighet med detaljerte logger over desinfiseringsoperasjoner. Tornado kan registrere og spore prosesser via skriver eller USB.



Typhoon

Effektivitet møter høy ytelse i Typhoon, en helautomatisk bekkenspyler med en rekke brukervennlige funksjoner.



PRODUKTINFORMASJON

TYPHOON

Vekt	135 kg
Mål (BxDxH) i mm	600x600x1840
Støynivå	60 db (A)
Elektrisk tilkobling	230V, 1N, 50 Hz, 1x16A
Energiforbruk	0,25 kWh/syklus
Vannforbruk	Økonomiprogram 25 liter/syklus ±10 % Normalprogram 31 liter/syklus ±10 % Intensivprogram 39 liter/syklus ±10 %

AUTOMATISK DØRFUNKSJON

Innebygd IR-sensor støtter berøringsfri betjening. Du beveger bare hånden foran døren, så åpnes og lukkes den automatisk.

VIEW IN PROCESS (VIP)

Gjør det enkelt å følge med på prosessen.

SKYVEDØR

Skyvedøren er et mindre plasskrevende alternativ til en svingbar dør. For å unngå søl kan ikke holdere begynne å rotere før døren er lukket.

ROTARENDE HOLDER

Når døren er låst, roteres holderen 150° og tømmer beholderne, slik at det ikke er nødvendig å snu dem manuelt. Dermed reduseres risikoen for krysskontaminering. Den roterende holderen har også integrerte dyser for effektivt vaske- og desinfiseringsresultat.

DESINFISERING AV RØRSYSTEM (PSD)

På slutten av hver syklus utføres rask desinfisering gjennom alle de faste og roterende dysene, slik at hele rør- og dysesystemet desinfiseres og risikoen for kontaminering reduseres.

Tilbehør og design

Tilpass din Arjo bekkenskyller ytterligere til dine ønsker og behov med funksjonelt tilbehør og designalternativer.

Trinn 1: Velge riktig holder


Selv om universalholderen passer til de feste vanlige bekkener, tilbyr vi også et bredt utvalg holdere for andre typer gods. Disse holderne kan håndtere en rekke ulike bekkener, samt de fleste toalettstolpotter og urinflasker. Bruk bare holdere som er kompatible med dine Arjo bekkenspylere for best mulig resultat.

Trinn 2: Legge til tilbehør

Vi tilbyr også en rekke ulike tilbehør, som vårt unike, anatomisk designede bekken med lokk, samt skyllemidler og vaskemidler i Arjo Liquids-serien, som er utviklet for å styrke bekkenspylerens effektivitet.

Trinn 3: Designe et komplett skyllerom

Arjo vurderer alle aspekter ved skyllerommet, og tilbyr et bredt utvalg støttealternativer fra opplæring i gode hygienerutiner til råd om rommets oppsett og valg av utstyr. Vi tilbyr også et komplett møbelkonsept til skyllerommet for å skape et hygienisk og sikkert arbeidsmiljø.

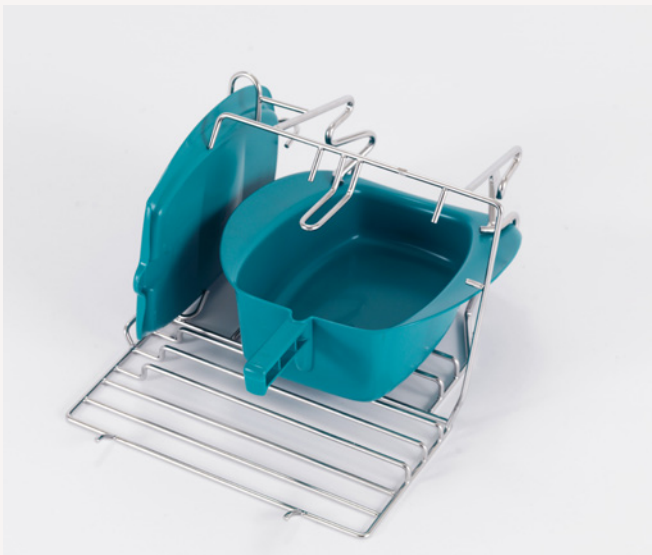



Et godt planlagt skyllerom

Et godt planlagt skyllerom har en sentral rolle i effektiv infeksjonskontroll.

En skylleromsløsning fra Arjo er alltid basert på de fire viktige hjørnesteinene for gode arbeidsrutiner og infeksjonskontroll på høyt nivå.

Arjo kan bistå med alle aspekter innen planlegging, utforming og utstyring av et skyllerom for institusjonens behov. Vi tilbyr også ekspertkunnskap og detaljerte retningslinjer for romlayout, og veiledning i etablering av et effektivt infeksjonskontrollsystem.

Kontakt den lokale Arjo-representanten hvis du vil vite mer, eller gå til arjo.com for å utforske Arjo Guide for arkitekter og planleggere.



1. Område for urent gods

En oppsamlingspunkt for urent gods, som er atskilt fra de rene områdene.

2. Håndvaskstasjon

En praktisk plassert vaskeservant med tilbehør.

3. Bekkenspyler

For automatisk rengjøring og desinfisering av ulike bekkener, urinflasker og toalettstolpotter.

4. Oppbevaringsområde for rent utstyr

En oppbevaringsløsning for rent gods, som er atskilt fra de urene områdene.

Møbelkonsept for skyllerommet



• Pleiekombinasjon 900 mm, består av bekkenspyler og utslagsvask



• Pleiekombinasjon 1350 mm, består av bekkenspyler, 450 mm underskap med håndvask og utslagsvask



• Pleiekombinasjon 2250 mm, består av bekkenspyler, 900 mm underskap med vaskeum, 450 mm underskap med håndvask og utslagsvask



Flere fargealternativer med Ninjo og Tornado

Utforsk et bredt utvalg av designalternativer med Ninjo. Tilgjengelig som frittstående enhet som gir tilgang i skulderhøyde, eller for montering under benk for maksimal benkeplass.

Velg elegant rustfritt stål av høy kvalitet, eller skap litt farge på skyllerommet med fargerikt polymerbelegg (fargekode: NCS S 2060-R80B) som er slagfast og ripesikkert, samt sopphindrende, lett å rengjøre og stabilt. Begge alternativene er tilgjengelige som materialfinish på frontpaneler og skyllekammer.

Gjør bekkenspyleren komplett med skap og andre funksjonelle møbelkomponenter, for eksempel overskap, hyller og oppbevaringsstativer for bekkener og urinflasker, samt tilpassede løsninger som dekker dine plassbehov.



Arjo Care

Bidrar til å sikre at Arjo-utstyret fungerer som det skal.



Feil på utstyret kan være både upraktisk og svært kostbart. Det gjelder spesielt hvis personalet må utføre arbeidsoppgaver manuelt, noe som er mer tidkrevende, kan være mindre effektivt og utsetter pasientene og personalet for risiko.

Arjo Care tilbyr fagmessig service på utstyret, fra prioritert respons i tilfelle feil på utstyret til planlagt, forebyggende vedlikehold og inspeksjoner for å forebygge problemer før de oppstår. Vi foretar inspeksjoner og gir en detaljert evaluering av utstyrets tilstand, og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Vi bruker kun originaldeler og originalt tilbehør, som vi kan bestille direkte for å sikre rask levering. Vi tilbyr støtte til samsvarsprosesser med nødvendig dokumentering av alle inspeksjoner og reparasjoner.

La Arjo Care hjelpe dere med å holde utstyret i stand, slik at dere kan fokusere på det som er viktig: å gi pleie av høy kvalitet.

Kontakt din lokale Arjo-representant for å finne ut mer om våre skreddersydde serviceavtaler.

Arjo Liquids

Vi tilbyr et utvalg spesielt utviklede midler til våre effektive bekkenspylere.



Flusher Rinse

En mild alkalisk løsning for forebygging av kalkavleiringer under automatisk rengjøring av beholdere for menneskelig avfall. Flusher Rinse avkalker bekkenspyleren og beholderne samtidig. Egnert for alkalibestandige overflater, som rustfritt stål, keramikk, glass og bestandig plast.



Flusher detergent

Et mildt alkalisk vaskemiddel som er effektivt ved svært skitne pleieredskaper. Egnert for alkalibestandige overflater, som rustfritt stål, keramikk, glass og bestandig plast.

Referanser

1. Arjo Clinical Whitepaper. Flusher Disinfectors: Reducing the risk of cross contamination, 2019.
2. Walder M, Nilsson B. Validation of Clostridium difficile spore elimination in Arjo flusher disinfectors: Tornado/FD18-series, Ninjo/FD16-series & Typhoon SP6000. Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Lund University, 2018.
3. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Emerging Infections Program Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use Prevalence Survey Team Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections. N Engl J Med, 2014.
4. Cassini A, Plachouras D, Eckmanns T, et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med, 2016.
5. Ling ML, Apisarnthanarak A, Madriaga G. The Burden of Healthcare-Associated Infections in Southeast Asia: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis., 2015.

Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel. © Arjo, September 2019.

I Arjo forplikter vi oss til å forbedre dagliglivet til mennesker med redusert bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi leverer produkter og løsninger som sikrer ergonomisk pasienthåndtering, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og effektiv forebygging av trykksår og venes tromboembolisme, som hjelper fagfolk i alle typer pleiemiljø med hele tiden å heve standarden for sikker og verdig pleie. Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Norge AS • Olaf Helsets vei 5 • 0694 • Oslo • Norway • +47 22 08 00 50

www.arjo.no