



SERIE BRANCARDS

Lifeguard®



Uw partner in zorgbeheer

De Lifeguard serie brancards met variabele hoogte biedt flexibele oplossingen om alle aspecten van zorgbeheer te verbeteren. Dankzij hun licht gewicht en uitstekende wendbaarheid helpen de duurzame, eenvoudig te gebruiken brancards

de risico's bij verplaatsing te beperken. Bovendien voldoen de uitgebreide scala aan functies, opties en accessoires aan de uiteenlopende zorgbehoeften en de verschillende budgetten.

Lifeguard range

Een gamma van brancards geschikt voor wondbehandeling, transfer, onderzoek en beeldvorming, behandeling en herstel.

LG 55

- Röntgenstraalcompatibel over de gehele lengte
- Compatibel met de volledige lengte van de C-boog
- Zijdelingse röntgenstraalcompatibel
- Veilige belasting 250 kg



LG 50

- Geschikt voor röntgenopname over hele lengte (optie)
- Compatibel met C-boog over hele lengte (optie)
- Veilige belasting 250 kg

LG 20

- Geschikt voor röntgenopname over hele lengte (optie)
- Keuze uit door de klant samen te stellen opties naargelang behoeften/budgetten
- Veilige belasting 180 kg



Verplaatsen en positioneren

Hoogteverstelbare,
ergonomische
duw-/trekhendels

Uitstekend hoogtebereik

Voetpedalen aan weerszijden voor
hoogte-instelling (en Trendelenburg/
anti-Trendelenburg op LG 50 en LG 55)

Easitrack™ vijfde
wiel stuursysteem




Beeldvorming

Brancards uit de Lifeguard range kunnen beeldvormingstechnieken over de gehele lengte ondersteunen met behulp van conventionele röntgencassettes en C-boogsystemen. (N.b.: niet geschikt voor gebruik met MRI-apparatuur)



Lifeguard 55 verschuifbare
röntgencassettehouder

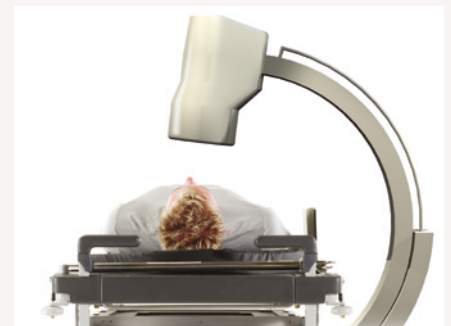

Lifeguard 55 C-boog toegang
over de hele lengte



Infectiepreventie

Dankzij het open design en gladde oppervlakken die zijn toegepast in het ontwerp van de Lifeguard reeks zijn de brancards op alle plaatsen gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten.



Flexibiliteit en keuze

Lifeguard biedt de gebruiker allerlei functies om zorgbeheer in zorgomgevingen te ondersteunen. De veelzijdige LG 20-brancard biedt een grotere keuze aan gebruikersgedefinieerde opties en kan worden aangepast aan verschillende behoeften en budgetten. Mogelijke opties zijn o.a. een in hoogte verstelbaar röntgencassette-platform en een Easitrack 5e zwenkwielsysteem.



LG 20 getoond in gebroken wit




Lifeguard 50 & 20 over de hele lengte in hoogte instelbaar röntgenplatform





Flexibele matrasoporties

Er is een assortiment matrassbeschermers beschikbaar voor de Lifeguard trolley (zie Productspecificaties), inclusief de Bi-Flex® drukreducerende matrass die is ontwikkeld om decubitus te helpen voorkomen.

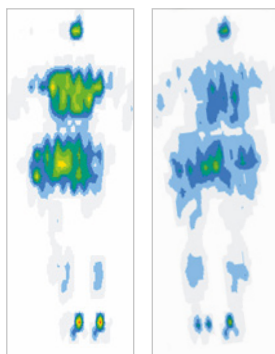

Standaard
matras

Bi-Flex
matras

Laag  Hoog
Oppervlaktedruk



Bi-Flex matrass afgebeeld op LG 55 brancard

Accessoires



CLIP-ON EETTAfel



VOETENEINDEPANEEL



STOOTEKUSSENS



**MONITORHOUDER/
DOCUMENTENHOUDER**

Standaard op LG 55 en LG 50 modellen



ARMSTEUN



INFUUSPAAL

Productspecificaties

KENMERKEN	LG 55	LG 50	LG 20
Gasveeondersteunde verstelbare rugleuning (0-87 °)	•	•	•
Voetpedalen aan weerszijden voor instelling van hoogte/ Trendelenburg/anti-Trendelenburg	•	•	
Voetpedalen aan weerszijden voor hoogte-instelling			•
Noodvoetpedaal aan hoofdeinde voor Trendelenburg	•	•	
Met hendel te bedienen Trendelenburg-instelling aan hoofdeinde			•
Hoogteverstelbare, ergonomische duw-/trekhendels	•	•	•
Over de hele lengte röntgendoorlatende matrasbodem	•	•	•
Verschuifbare röntgencassettelade over de hele lengte	•		
In hoogte instelbaar röntgencassetteplatform over de hele lengte		(•)	(•)
Easitrack vijfde wiel stuursysteem	•	•	(•)
Antistatische zwenkwielen met 200 mm diameter	•	•	•
Centraal rem-/stuursysteem - 4-hoeken-bediening	•	•	
Centraal rem-/stuursysteem - 2-hoeken-bediening (aan hoofdeinde)			•
Geïntegreerde, inklapbare infuuspaal (aan hoofdeinde)	•	•	•
Opbergbare infuuspaal (onderaan frame brancard)	•	•	•
Geïntegreerde, inklapbare en roestvrijstalen veiligheidhekken	•	•	•
Opbergruimte voor zuurstoffles (maat D, E of F)	•	•	•
Opbergruimte voor persoonlijke zaken van de zorgvrager	•	•	•
Bevestigingsbeugel voor zuurstof/zuigflessen	•	•	•
Afneembare, neerklapbare monitorplank/documentenhouder	•	•	(•)
Kleur - lak/profielen in gebroken wit	•	•	•
Kleur - grijze lak/donkergrijze profielen	(•)	(•)	(•)
Veilige belasting	250 kg	250 kg	180 kg
(Anti-)Trendelenburg ligvlak	+/- 12 °	+/- 12 °	+/- 12 °
Hoogtebereik ligvlak	560-930 mm	560-930 mm	600-920 mm
Breedte ligvlak	670 mm	670 mm	670 mm
Totale breedte	770 mm	770 mm	770 mm (30")
Totale lengte	2110 mm	2110 mm	2110 mm

Matrasopties

Bestelnummer

• Standaard (•) Optioneel

65 mm diepe matrasbeschermer met 2-wegs stretchhoes

LGMAT/10

2-delige transfermatras

LGMAT/13

Bi-Flex* drukreducerende matras

TRM2

* maakt deel uit van het Arjo Therapie-en-Preventiegamma

Februari 2018 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, 2018

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be