

VEELZIJDIG EN COMPLEET LIFTSYSTEEM

# Maxi Sky® 2 Plus



Ons complete assortiment Maxi Sky plafondliften is zo ontworpen dat ze in uw zorgomgeving kunnen worden geïntegreerd, zodat ze een comfortabele en waardige ervaring voor alle betrokkenen mogelijk maken. De Arjo plafondliften stellen zorgverleners in staat om zorgvragers te verplaatsen zonder handmatig te tillen, waardoor het risico op letsel voor henzelf en zorgvragers wordt verminderd.

## MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

**D.** Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.

**E.** Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Ontworpen op maat van de zorgvragers**

Zorgvragers met een groter postuur hebben recht op een comfortabele en waardige behandeling. Maxi Sky 2 Plus maakt dit mogelijk voor niet-ambulante obese zorgvragers (tot 454 kg).

- **Eenvoudig voor de zorgverleners**

Het 4-punts telescopische tiljuk voor obese zorgvragers is makkelijk te manoeuvreren, met automatische aanpassing aan de gestalte en de positie van de zorgvrager. Het tiljuk kan worden gebruikt om obese zorgvragers op te tillen, te verplaatsen, om te draaien en te herpositioneren met behulp van de bariatrische tilbanden van Arjo.

- **Flexibel af te stemmen op de behoeften van uw zorgomgeving**

De verschillen in lichaamsbouw bij obese zorgvragers vereisen bariatrische tilbanden. Om daarop in te spelen heeft Arjo een assortiment tilbandmodellen in vier maten ontwikkeld. Bij gebruik in de 'Single Mode' is de Maxi Sky 2 Plus volledig compatibel met de Maxi Sky 2 tilbanden en het assortiment tiljukken, inclusief het elektrisch kanteljuk (PDPS, Powered Dynamic Positioning System), zodat uw zorginstelling deze plafondliften optimaal kan gebruiken bij zorgvragers van uiteenlopende gestalte.

## PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting (SWL)	Dual Mode: 454 kg Single Mode: 272 kg
Gewicht, compleet (incl. trolley en twee plafondliften)	51,6 kg
Tiljuk	6,6 kg
Hijssnelheid (Dual mode)	4,3 cm/s zonder belasting 3,4 cm/s bij 240 kg 3,0 cm/s bij 400 kg 2,8 cm/s bij 454 kg
Max. bereik (vanaf plafond)	2300 mm
Horizontale verplaatsingssnelheden	n.v.t., handmatig bediend
Lengte van het lint	2500 mm
Afstandsbediening	Kantelen en achteroverleunen
Werkingskracht	< 5 N
Optionele weegunit	Externe weegunit verkrijgbaar, max. gewicht 454 kg

### Algemeen

Duw- en trekkracht bij 454 kg voor horizontale beweging en kanteling	< 60 N
--	--------

### Elektrisch

Bedrijfscyclus	Motor omhoog/omlaag: Max. 10%, 1 minuut continu Motor zitten/achteroverleunen ('single mode'): Max. 10%, 1 minuut continu
Motor horizontale as	n.v.t.
Motor verticale as	24 V DC, 62 watt
Vermogen	24 V DC, 15 A max.
Geluidsniveau bij omhoog/omlaag brengen, met of zonder belasting	58,2 dBA zonder belasting, 65,3 dBA bij 454 kg
Medische apparatuur	Type BF bescherming tegen elektrische schok in overeenstemming met IEC 60601-1
Type accu	12 V, 5 Ah, verzegelde oplaadbare klep-gereguleerde loodzuuraccu
Accucapaciteit	Capaciteit voor maximaal 120 transfers bij een belasting van 200 kg, max. 70 transfers bij een belasting van 400 kg, max. 34 transfers bij een belasting van 454 kg
Beschermingsklasse - Afstandsbediening	IPX7
Beschermingsklasse - Maxi Sky 2 plafondlift	IP24
Tillift - beschermingsklasse - schokpreventie	Intern gevoede apparatuur
Ingang voor de batterijlader	100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 - 70 VA
Uitgang batterijlader	28,1 VDC, 1 A max, 28,1 VA
Veiligheidsbescherming van de batterijlader	Klasse 2, dubbel geïsoleerd

### Werking, transport en opslagomstandigheden


Normaal gebruik	Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F) Bereik relatieve luchtvochtigheid: 0 % tot 93 % Atmospheric pressure range: 700 hPa tot 1.060 hPa
Vervoer/opslag	Omgevingstemperatuur: -40 °C tot 70 °C (-40 °F tot 158 °F) Bereik relatieve luchtvochtigheid: 0 % tot 100 % Atmospheric pressure range: 500 hPa tot 1060 hPa

## BENODIGDE RUIMTE

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met het hulpmiddel om de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

De tilbanden en tiljukken van Arjo zijn een essentieel onderdeel van onze tilsystemen voor zorgvragers. De diverse tilbanden en tiljukken bieden een scala aan verschillende keuzes bij het tillen en overbrengen van zorgvragers.

Neem voor meer informatie over onze accessoires contact op met Arjo of kijk op [www.arjo.be](http://www.arjo.be)

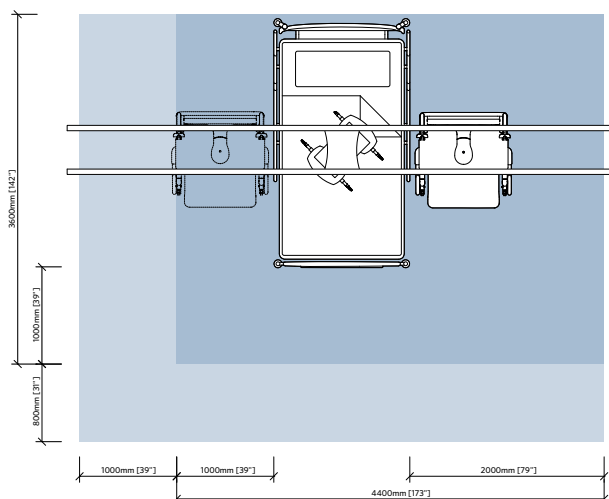

November 2019. Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo Belgium nv • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • België • +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00242.1.0.BE.NL

**arjo**