

Maxi Sky® 440



La nostra gamma completa di sollevapazienti a soffitto Maxi Sky è concepita per integrarsi con l'ambiente di degenza e cura, contribuendo a garantire un'esperienza sicura, comoda e dignitosa a tutte le persone coinvolte. I sollevapazienti a soffitto Arjo consentono agli assistenti di sollevare e trasferire pazienti/residenti senza alcun sollevamento manuale, contribuendo a ridurre il rischio di infortuni per se stessi e i loro assistiti.

- **Semplicità per l'assistente**

Il Maxi Sky 440 è un sistema di sollevapazienti a soffitto portatile di facile utilizzo che consente a un unico assistente di trasferire i pazienti/residenti evitando sforzi inutili e dannosi riconducibili al sollevamento manuale.

- **Flessibilità per rispondere alle esigenze dei vostri contesti sanitari**

Progettato per essere facilmente spostato e collegato rapidamente a un sistema mobile autoportante o un binario, questo sollevapazienti a soffitto portatile può essere installato ovunque sia necessario movimentare un assistito. Maxi Sky 440 e la barra di sollevamento pieghevole a due punti integrata sono compatibili con l'ampia gamma di corsetti ad asola Arjo.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Non è in grado di sostenere il proprio peso sugli arti inferiori. È in grado di stare seduta se ben sostenuta.

E. Ha difficoltà a stare seduta, pertanto rimane a letto in posizione sdraiata o semisdraiata, sedendosi solo su sedie speciali che offrono il massimo sostegno.

Per ulteriori informazioni contattare Arjo.

SPECIFICHE TECNICHE

Carico di Lavoro Sicuro (SWL) max	200 kg
Peso totale dell'unità motore (comprensivo di batterie)	6,5 kg
Velocità di sollevamento	4,3 cm/s
Ganci per corsetto pieghevoli	Spazio ridotto per lo stoccaggio/trasporto
Microprocessore elettronico	Controllo di avvio/arresto progressivo del motore
Indicatore di manutenzione necessaria	LED visivo
Sollevapazienti, classe di protezione, prevenzione da scosse elettriche	Apparecchiatura alimentata internamente
Lunghezza cinghia	2.200 mm
Bilancia opzionale	Bilancia esterna disponibile
Livello acustico per il sollevamento/abbassamento, con o senza carico	54 dBA max

Batterie

Batteria	Due batterie da 2,3 Ah impiegano in media da 2 a 4 ore per caricarsi completamente
Capacità batteria	Fornisce fino a 30 trasferimenti con un carico di 80 kg
Spia batteria scarica	Allarme
Indicatori LED visivi	Giallo lampeggiante (in carica). Giallo fisso (carico).

Pulsantiera di controllo

Pulsanti di attivazione a bassa forza, membrana in poliestere	IPX7
ABS ignifugo	V0

Caricabatteria

Indicatore di alimentazione sul modulo di caricamento	
100-240 V CA/50-60 Hz/24 VA	
Protezione di sicurezza caricabatteria	Classe 2, doppio isolamento

Funzioni di sicurezza


Pulsanti di sollevamento/abbassamento elettrici di emergenza	Situati sul motore
Dispositivo di arresto di emergenza (pulsante) sotto l'unità	Funzioni di arresto
Freno di emergenza	In caso di guasto meccanico
Dispositivo manuale di discesa di emergenza	Accessibile dal motore
Custodia ignifuga in ABS	V0

REQUISITI DI SPAZIO

- L'area evidenziata in blu indica lo spazio di lavoro minimo necessario per un utilizzo ergonomico degli ausili meccanici da parte del personale, operando da un lato.
- La zona celeste mostra l'estensione dell'area di lavoro richiesta per facilitare le attività dai due lati per fornire un accesso adeguato al paziente.

I corsetti e le barre di sollevamento di Arjo sono una parte essenziale dei nostri sistemi di sollevamento per pazienti. Un'ampia gamma di corsetti e barre di sollevamento offre diverse possibilità per il sollevamento e il trasferimento dei pazienti.

Per ulteriori informazioni relative ai nostri accessori, contattare il rappresentante di vendite locale o visitare la pagina www.arjo.com.

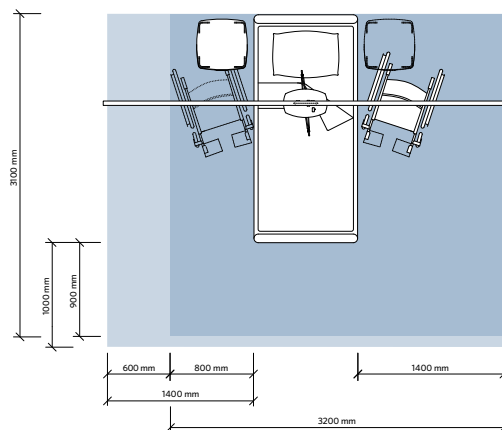

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

© e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
Arjo AB • Hans Michsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 0687426211

Arjo.A00240.1.0.IT.IT

arjo