

Maxi Transfer Sheet



Le Maxi Transfer Sheet est un drap de levage et de repositionnement (pouvant également être utilisé à la place des draps de lit) utilisé avec un lève-personne pour le positionnement au lit et le positionnement latéral. Ainsi, ce dispositif a été conçu pour simplifier les transferts quotidiens.

MOBILITHÈQUE D'ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Incapable de supporter son poids sur ses pieds. Le patient peut s'asseoir s'il est bien soutenu.

E. Éprouve des difficultés à rester assis et risque donc de rester allongé ou partiellement allongé au lit et ne peut s'asseoir que sur un siège apportant un soutien spécifique.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Amélioration de l'efficacité des tâches quotidiennes du personnel soignant grâce à un produit tout-en-un**
Ce drap de transfert simple épaisseur et sans couture combine un drap standard et un harnais de repositionnement. Grâce à sa microfibre haute technologie permettant d'améliorer le microclimat général, il est inutile de retirer le drap sous le patient après le transfert. Le drap est en effet hautement respirant et permet d'éviter l'accumulation de chaleur.¹ Le transfert et le repositionnement sont plus efficaces et demandent moins d'efforts de la part du personnel soignant, ce qui permet également d'améliorer le confort du patient.^{2,3}
- **Perméabilité**
Le Maxi Transfer Sheet n'entrave en rien les performances et les avantages des surfaces de supports thérapeutiques.⁴ Il améliore le microclimat global grâce à sa haute respirabilité et permet d'éviter l'accumulation de chaleur.¹

Principales caractéristiques




SANGLES ET COUTURES

Les sangles indicatrices avec code couleur situées au bord du drap indiquent les dimensions de ce drap. Toutes les coutures se trouvent au bord du lit, la surface située sous le patient ne présente donc pas de couture.



JUPES LATÉRALES INTÉGRÉES

Les jupes latérales couvrent les sangles du Maxi Transfer Sheet, ce qui lui donne l'apparence d'un drap de lit standard.

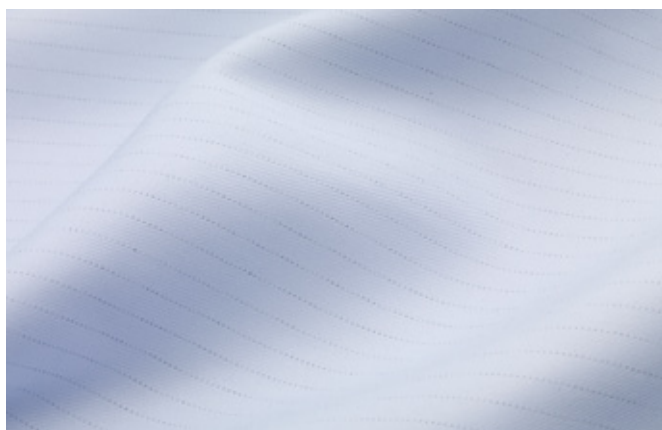

TISSU DOUX

Tissu en polyester hautement respirant permettant d'éviter l'accumulation de chaleur, pour favoriser la gestion du microclimat.¹



SANGLES D'ATTACHE EN BOUCLES

Tissu doux et conception à boucle permettant une fixation sur le lève-personne afin d'obtenir plus de flexibilité lors du repositionnement du patient. Le Maxi Transfer Sheet est compatible avec le Maxi Move (lève-personne au sol), ainsi qu'avec le Maxi Sky 2 et le Maxi Sky 2 Plus (lève-personnes sur rail).

INFORMATIONS PRODUIT

	Version standard	Version large
Capacité maximale admissible	272 kg	272 kg
Dimensions		
Support thérapeutique (largeur)	960 mm	1 250 mm
Support thérapeutique (longueur)	2 440 mm	2 440 mm
Jupe latérale (largeur)	400 mm	400 mm
Jupe latérale (longueur)	2 440 mm	2 440 mm

1. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it simple. In: Duffy V, Lightner N (eds). Advances in Human Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors and Ergonomics : USA. 2014 ; 3: 19-24.
2. Moving patients safely. British Journal of Nursing 2015; 24(6): S1-S23.
3. Knibbe HJJ, Onrust M, Dieperink W & Zijlstra J. Analysis of a Transfer Device for Horizontal Transfers and Repositioning on an ICU: Effects on the Quality of Care and the Quality of Work. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014.
4. Phillips L & Clark M. A novel lifting sheet has minimal impact on the off-loading performance of an 'active' (alternating) pressure-redistributing (PR) mattress? EPUAP, 2013.

Décembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Maxi Transfer Sheet est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13

Arjo.A00183.1.0.FR.FR

arjo