

Komfort omplaceringssele med öglor



Komfort omplaceringssele med öglor är ett lyft- och omplaceringslakan (som också kan användas som sänglakan), som används tillsammans med en passiv lyftenhet för förflyttningar i sidled och positionering i sängen. Ett nytänkande koncept som utformats för att underlätta förflyttningar i sidled och positionering i sängen.

ARJOS MOBILITETSGALLERI



D



E

© Arjo 2019

D. Kan inte bära upp vikt på fötterna. Kan sitta om det finns bra stöd.

E. Svårighet med att bibehålla sittande läge, kan därför ligga/delvis ligga i sängen och kan bara sitta i en speciell stödjande stol.

Kontakta Arjo för mer information.

- **Förbättra effektiviteten i vårdpersonalens dagliga arbetsuppgifter med en allt-i-ett-produkt**
Detta sömlösa lakan i ett lager erbjuder en kombination av ett vanligt sänglakan och en omplaceringssele. Lakanet behöver inte avlägsnas efter förflyttningen tack vare det avancerade mikrofibermaterialet som förbättrar mikroklimatet, eftersom det har god andningsförmåga och förhindrar värmeutveckling.¹ Förflyttningar och omplacering kan utföras snabbare och med mindre ansträngning för vårdpersonalen, vilket även ökar komforten för patienten.^{2,3}
- **Andningsbarhet**
Komfort omplaceringssele med öglor påverkar inte prestandan eller funktionen hos terapeutiska madrasser.⁴ Förbättrar mikroklimatet eftersom det har god andningsförmåga och förhindrar värmeutveckling.¹

Viktiga funktioner




REMMAR OCH SÖMMAR

Färgkodade märkningar på remmarna i lakanets kant visar lakanets storlek. Alla sömmar är placerade i sängens kant så att ytan under patienten blir bekväm och sömlös.



INTEGRERADE SIDOKAPPOR

De långa sidokapporna täcker remmarna hos Komfort omlaceringssele med öglor, och gör att speciallakanet ser ut precis som ett vanligt sänglakan.

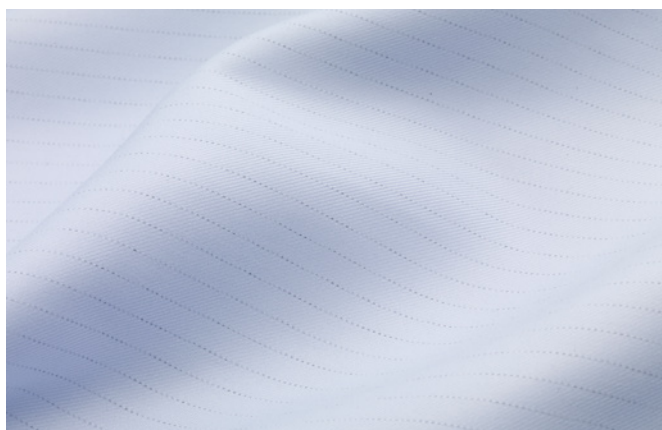

MJUKT MATERIAL

Polyestermaterial med hög andningsförmåga som förhindrar värmeutveckling, och stödjer hanteringen av patientens mikroklimat.¹



ÖGLANS DESIGN

Öglorna är tillverkade i ett mjukt material och designade för att fästas vid valfri lyft och erbjuder flexibilitet vid omlacering av patienter. Komfort omlaceringssele med öglor är kompatibel med Maxi Move (golvlyft) samt Maxi Sky 2 och Maxi Sky 2 Plus (taklyftar).

PRODUKTINFORMATION

	Standardutförande		Brett utförande	
Säker arbetslast	272 kg	600 lb	272 kg	600 lb
Mått				
Stödyta (bredd)	960 mm	38 tum	1 250 mm	49 tum
Stödyta (längd)	2 440 mm	96 tum	2 440 mm	96 tum
Sidokappa (bredd)	400 mm	16 tum	400 mm	16 tum
Sidokappa (längd)	2 440 mm	96 tum	2 440 mm	96 tum

1. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it simple. I: Duffy V, Lightner N (redaktörer). Advances in Human Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors and Ergonomics: USA. 2014; 3: 19-24.
2. Moving patients safely. British Journal of Nursing 2015; 24(6): S1-S23.
3. Knibbe HJJ, Onrust M, Dieperink W & Zijlstra J. Analysis of a Transfer Device for Horizontal Transfers and Repositioning on an ICU: Effects on the Quality of Care and the Quality of Work. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014.
4. Phillips L & Clark M. A novel lifting sheet has minimal impact on the off-loading performance of an 'active' (alternating) pressure-redistributing (PR) mattress? EPUAP, 2013.