

ŘEŠENÍ V PODOBĚ PŘENOSNÉHO STROPNÍHO ZVEDÁKU

Maxi Sky® 440



Naše kompletní řada stropních zvedáku Maxi Sky 440 je navržena pro plnou integraci do Vašeho ošetřovatelského prostředí, v němž pomůže zajistit pohodlí a důstojnost pro všechny zúčastněné. Stropní zvedáky Arjo umožňují ošetřujícímu personálu přesuny pacientů či klientů bez ručního zvedání, čímž pomáhají snižovat riziko poranění ošetřujícího personálu i osob v jeho péči.

Stropní zvedáky Maxi Sky 440 jsou navrženy s ohledem na potřeby Doris a Emmy.*



Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.



Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Jednoduchá obsluha pro ošetřující personál

Maxi Sky 440 společnosti Arjo je systém přenosného stropního zvedáku s jednoduchou obsluhou, který jedinému ošetřovateli dovoluje provádět přesuny pacientů bez stresu a námahy spojených s ručním zvedáním.

Flexibilita naplňující potřeby ošetřovatelského prostředí

Díky snadné manévrovatelnosti a rychlému připojení k portálu nebo dráze kolejnicového systému je přenosný stropní zvedák připraven k použití tam, kde je zapotřebí manipulovat s pacienty. Maxi Sky 440 s integrovaným sklopným dvoubodovým závěsným ramenem je také kompatibilní s širokou škálou poutkových vaků Arjo.

1 Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Zvedák Maxi Sky 440 je určen jako pomůcka ošetřujícímu personálu v nemocnicích, zařízeních dlouhodobé péče, pečovatelských domech i v prostředí domácí péče, včetně soukromých obydlí, a pacientům/ klientům s omezenou mobilitou k následujícím účelům:

1. Přesun z a zpět do přilehlého místa, jako je židle, invalidní vozík, lůžko, vana, toaleta, podlaha nebo nosítka.
2. Opora pacienta/klienta při rehabilitačním cvičení.
3. Pomoc pacientovi/klientovi s takovými úkony, jako je použití toalety nebo polohování na lůžku.

Přesun pacienta/klienta musí být prováděn pod dohledem školeného ošetřujícího personálu v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Výrobek musí být používán pouze k výše uvedeným účelům. Zvedák musí být instalován oprávněnými pracovníky Arjo v souladu s platnými místními předpisy.

INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení (SWL)	200 kg
Hmotnost zařízení (vč. baterií)	6,5 kg
Rychlost zvedání	4,3 cm/s
Sklopné háky na upevnění vaku	Menší prostor pro skladování/přepravu
Elektronický mikroprocesor	Řízení motoru měkkého startu a zastavení
Indikátor potřeby údržby	Vizuální LED kontrolka
Zvedák - stupeň ochrany - prevence úrazu elektrickým proudem	Interní elektrický pohon
Délka popruhu	2 200 mm
Volitelná váha	K dispozici je externí váha
Hladina hluku při zvedání nebo spouštění se zátěží nebo bez	Max. 54 dBA

Baterie

Baterie	2 x 2,3 Ah s průměrnou dobou plného dobití 2 až 4 hodiny
Kapacita baterie	Umožňuje až 30 přesunů se zatížením 80 kg
Indikátor téměř vybité baterie	Zvukové upozornění
Vizuální LED indikátory	Bliká žlutě (nabíjení). Svítí žlutě (nabito).

Ruční ovladač

Tlačítka s nízkou aktivační silou, polyesterová membrána	IPX7
Materiál ABS zpomalující hoření	VO

Nabíječka

Indikátor napájení na nabíjecím modulu	
100-240 V AC/50-60 Hz/24 VA	
Bezpečnostní ochrana nabíječky baterie	Třída 2, dvojitá izolace


Bezpečnostní prvky

Nouzová tlačítka elektricky ovládaného zvedání a spouštění	Umístěná na krytu motoru
Nouzové zastavení (tlačítko) přístupné pod zařízením	Funkce zastavení
Nouzová brzda	Pro případ mechanické poruchy
Manuální mechanismus nouzového spouštění	Přístupný na krytu motoru
Plášť z materiálu ABS zpomalujícího hoření	VO

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modrá plocha znázorňuje minimální pracovní prostor, který je nezbytný pro personál, aby mohl používat mechanické pomůcky ergonomickým způsobem z jedné strany.
- Světle modrá oblast znázorňuje požadované rozšíření pracovního prostoru, které zajistí odpovídající přístup pro práci z obou stran.

Vaky a závěsná ramena společnosti Arjo jsou nedílnou součástí našich systémů pro zvedání pacientů. Řada vaků a závěsných ramen umožňuje výběr ze široké nabídky pro zvedání a přesun pacientů.

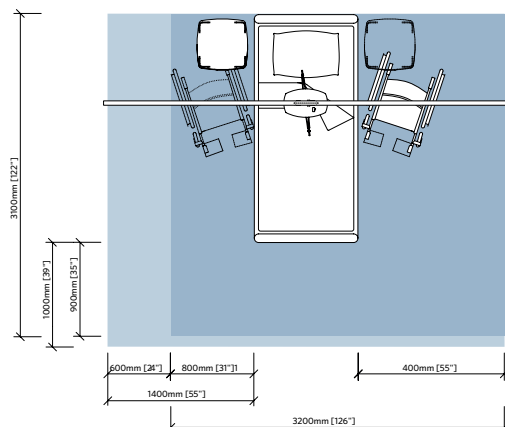

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.